



**2015年3月23日(第6版)

*2013年8月5日(第5版)

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸固定用具 33519000

スーチャーブーツ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止


【形状、構造及び原理等】*

大(ピンク)、小(イエロー)

貼付シート付カートリッジ

＜原材料＞

ポリ塩化ビニル

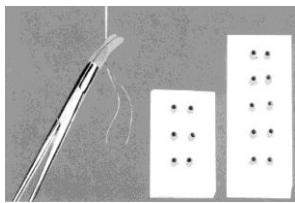

サイズ	色	カタログNo.	
		標準 (5対)	ミニ (3対)
大	ピンク	1001-516	1001-515
小	黄	1001-514	1001-513

【使用目的又は効果】*

縫合糸の張力をより広範に分布させることで、創傷の治癒を補助することを目的とする糸支えの器具である。縫合糸の張力の分布は、縫合糸で皮膚が切れるのを防止するのに役立つ。

【使用方法等】

1. カートリッジの裏面に貼ってある紙を剥がして粘着部分を表面が滑らかな乾いたところに貼り付けてください。
2. 使用する鉗子の先端ジョー部をしっかりとスーチャーブーツに差込み、カートリッジから引き抜いてください。
3. 鉗子の先端ジョー部にスーチャーブーツがしっかりと装着されるよう、締め付けてから使用してください。
4. 鉗子の先端ジョー部分で縫合糸をしっかりと把持します。
5. 使用後は使用したスーチャーブーツをカートリッジに戻し数量の確認をしてください。

【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意
 - 使用する鉗子のジョー部分にスーチャーブーツの脱落が無く、しっかりと装着されている事を確認してください。
2. その他の注意
 - 本品は、滅菌包装されており、同一症例に限り使用可能です。使用後は必ず廃棄し、再滅菌はしないでください。また未使用であっても一旦開封した製品は破棄してください。
 - 本品は、滅菌有効期限内であっても、パッケージが破損または開封していた場合、製品の滅菌状態を保証できないので使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管してください。
 - 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないでください。
 - 本品は改良されることがあるので、先入れ先出しを励行してください。
2. 有効期間
 - 自己認証(当社データ)による使用期限は被包に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**



製造販売業者：日本エー・シー・ピー株式会社
TEL：042-429-0200

製造業者：スキャンラン インターナショナル インク

Scanlan International, Inc. (米国)