

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000

トーマス チューブホルダー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状>

1. 各部の名称

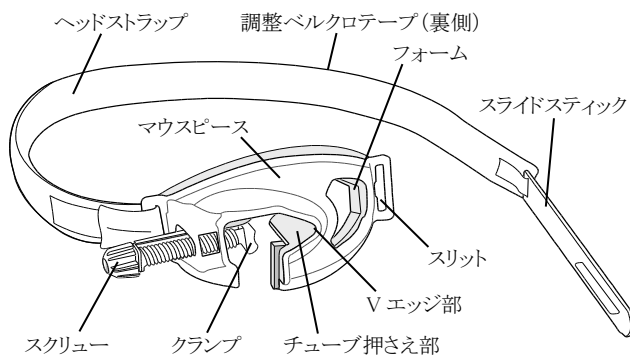

2. 寸法及び重量

成人用:

寸法

マウスピース ^(注)	113mm(W)×68mm(D)×45mm(H) ±5%
ヘッドストラップ	540mm(L)×22mm(W) ±10%、厚さ最大 7mm
スライドスティック	145mm(L)×16mm(W)×5mm(H) ±10%

重量 35 g ±10%

小児用:

寸法

マウスピース ^(注)	85mm(W)×48mm(D)×35mm(H) ±5%
ヘッドストラップ	430mm(L)×22mm(W) ±10%、厚さ最大 7mm
スライドスティック	145mm(L)×16mm(W)×5mm(H) ±10%

重量 23 g ±10%

(注)マウスピース寸法にはフォームを含む。

<体に接触する部分の原材料>

マウスピース : ポリプロピレン

フォーム : ポリエチレンフォーム

【使用目的又は効果】

挿管された気管内チューブを保持する。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書を参照して下さい。

<使用方法>

1. マウスピースの開口部が患者の足方向に向いていることを確認し、マウスピースのVエッジ部に気管内チューブが位置するようにマウスピースをスライドさせます。
2. 唇がマウスピースのチューブ押さえ部と歯に挟まれないように、チューブ押さえ部を患者の口腔内に差し込みます。

3. スライドスティックを患者の首の下を通し、マウスピースの反対側のスリットに挿入します。
4. スライドスティックを外し、ベルクロテープでヘッドストラップを完全に固定します。頭部及び頸部の小さい患者の場合は、調整ベルクロテープを用いてヘッドストラップの長さを調整します。
5. スクリューを回してクランプを進め、チューブをしっかりと固定します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. クランプで気管内チューブを圧迫し過ぎないこと。無理にスクリューを進めてチューブを圧迫し過ぎると、空気の流れを制限するおそれがあります。
2. 使用方法の手順を守ること。ヘッドストラップでマウスピースの位置を固定した後に、気管内チューブがチューブ押さえ部に密着していることを確認しながら、クランプをスクリューで進めること。

【保管方法及び有効期間等】

<使用条件>

使用温度: -18℃ ~ 43℃

使用期間: 24 時間を超えて使用しないこと。

<保管方法>

保管温度: -34℃ ~ 52℃

<有効期間>

3 年 (包装に記載)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: レールダル メディカル ジャパン株式会社

住 所: 東京都千代田区一番町 8 住友不動産一番町ビル

電 話 番 号: 03-3222-8080

お問い合わせ先: レールダル・ヘルプデスク

*電 話 番 号: 0120-309-060 平日 9:00~17:30

取扱説明書を必ずご参照下さい。