

機械器具(06)呼吸補助器

一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000

幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクシリーズ

再使用禁止

【警告】

1. 併用医療機器

(1) 併用する人工呼吸器は装置の故障を知らせるための適切なアラームや安全装置を備えている機種を使用してください。[患者の急変を見逃し迅速な対処ができず、患者に障害を及ぼすことがあります。]

2. 使用方法

(1) 幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクは呼吸ポートが内蔵されていないため、別途、呼吸ポートを装着して使用してください。または排気システムを有する人工呼吸器に使用してください。[適切な換気補助が行えず、患者に障害を及ぼすことがあります。]

(2) 酸素使用中は、喫煙しないでください。[火災の原因となります。]

【禁忌・禁止】

1. 適用対象(患者)

(1) 自発呼吸がない患者、意識がない患者、心停止の患者[本品は生命維持を目的とする治療に使用されることは意図していません。適切な換気補助が行えず、患者に障害を及ぼすことがあります。]

2. 使用方法

(1) 再使用禁止

(2) 火気のある場所、静電気の発生する場所など発火の恐れがある場所では使用しないでください。[火災の原因になることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するための人工呼吸器用マスクです。主に幼児/小児に使用します。

2. 構成

名 称	個 数
(1) 幼児/小児用NPPV フルフェイスマスク XL VM-321Z	1(選択)
(2) 幼児/小児用NPPV フルフェイスマスク L VM-322Z	1(選択)

※再使用禁止です。

※構成品は、単品でも販売されることがあります。

3. 形状

本品には以下のようなシンボルマークが使用されています。シンボルマークが示す名称および意味は下表のとおりです。
※本品で使用している名称および意味がJIS規格などと異なる場合は、[]内に本品の内容を記載しています。

シンボルマーク	名称・意味	シンボルマーク	名称・意味
	取説説明に従うこと		CEマーク (XXXXはNotified Bodyの識別番号)
	再使用不可、単回使用		欧州代理人
	使用期限		製造業者
	ロットナンバー		製造日
	カタログナンバー		温度制限
	[湿度制限]		[気圧制限]
	水ぬれ防止		医療機器 (欧州連合の法令要求マーク)
	注意		型式・モデルナンバー
	機器固有識別		

4. 原材料

- | | |
|--------------|------------------|
| (1) マスククッション | シリコーンゴム |
| (2) マスクボディ | ポリカーボネート |
| (3) エルボコネクタ | ポリカーボネート／シリコーンゴム |
| (4) 大気開放弁 | シリコーンゴム |
| (5) フレーム | ポリカーボネート |
| (6) 額当て | シリコーンゴム |
| (7) ヘッドギア | ポリアミド |

5. 性能

- (1) リーク量
- 1) 10L/min以下(4hPaのとき)
 - 2) 20L/min以下(10hPaのとき)
 - 3) 30L/min以下(20hPaのとき)
 - 4) 35L/min以下(30hPaのとき)
 - 5) 40L/min 以下(40hPaのとき)
- (2) 圧力低下(大気開放弁閉鎖時)
- 1) 1hPa未満(流量50L/minのとき)
 - 2) 4hPa未満(流量100L/minのとき)
- (3) 抵抗(大気開放弁開放時)
- 1) 呼気、吸気ともに10hPa未満(流量50L/minのとき)

6. 適用規格

- (1) ISO 10993-1(2009)

【使用目的又は効果】


1. 使用目的

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するために用います。


【使用方法等】

1. 使用方法


- (1) 患者さんに装着する
- 1) 患者さんの下顎からマスククッションを顔に当て、フレームの額当てが額にくるよう、ヘッドギアを頭にかぶせます。

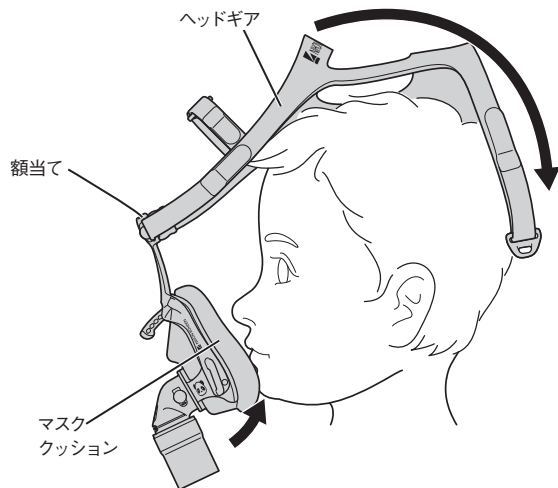


- 2) 額当てにある左右のストラップを適切な長さに調整します。

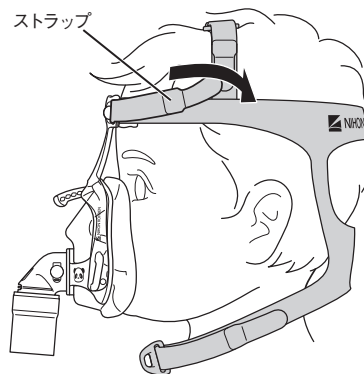


- 3) 取り外した左右のバックルをフレームの左右のバックル取付部に取り付けます。

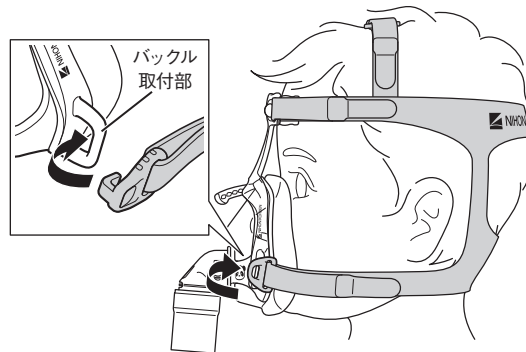


- 4) 再度、額当てにある左右のストラップを適切な長さに調整します。

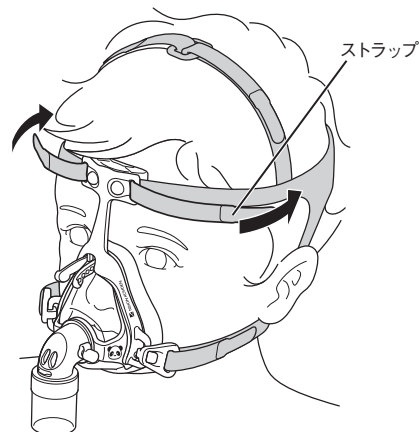

- 5) バックル取付部に取り付けたバックルの左右のストラップを適切な長さに調整します。

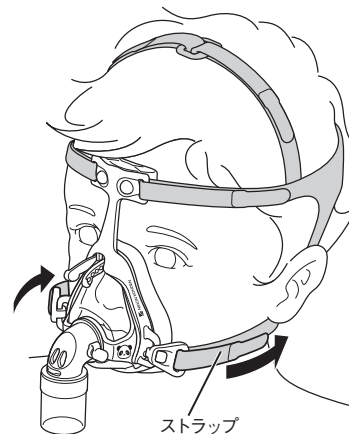


- 6) 頭頂部にある左右のストラップを適切な長さに調整します。

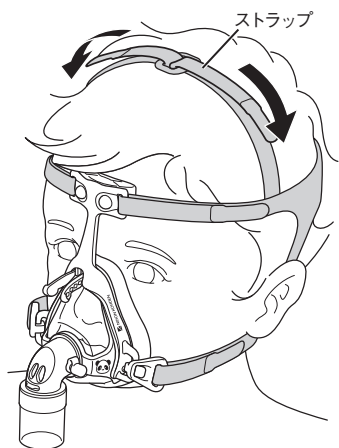

- 7) マスククッションが患者さんから滑り落ちないように、ヘッドギア全体にゆるみやたるみがないか確認します。



- 8) サポートアームを使用して、患者さんの目元や口元から空気が漏れないよう、装着位置を調整します。

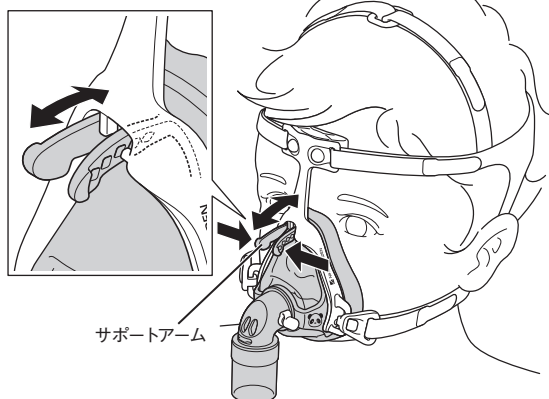


(2) 呼吸回路に接続する


呼気ポートが接続された呼吸回路をエルボコネクタに接続します。

- (3) 患者さんから取り外す


- 1) 左右のバックルのストラップを緩めます。

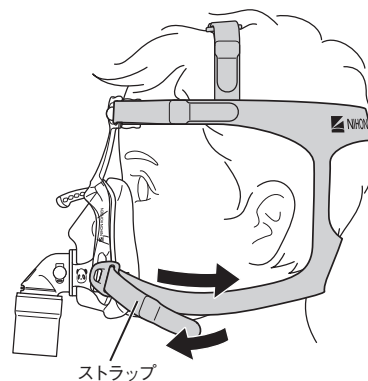

- 2) 左右のバックルをバックル取付部から外します。

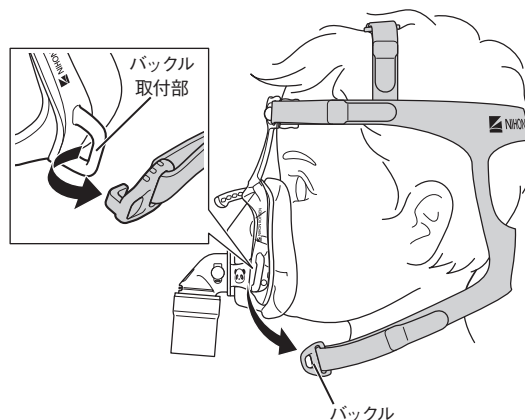

- 3) マスククッションを上を持ち上げ、ヘッドギアを頭から外します。

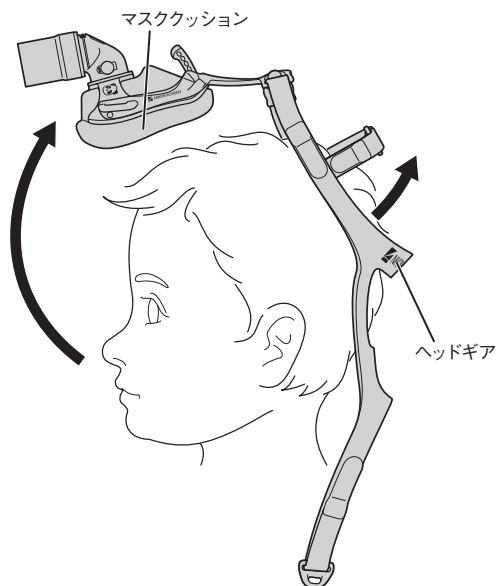

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) 全般的な注意事項

- 1) 使用を開始する前に幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクに汚れや破損、変形がないことを確認してください。
- 2) 大気開放弁を塞がないでください。窒息することがあります。
- 3) 再呼吸を避けるために、設定圧力は4hPa以上で使用してください。また、40hPa以上で使用する場合は、リーク量の増加などにより意図した換気が行えないことがあるため、患者の状態を十分に確認してください。
- 4) 呼気ポートにより加わるリークを補うため、必要に応じて圧力設定を調節してください。適切な換気が行えないことがあります。

- 5) 使用中にフレームやマスククッション、額当て、エルボコネクタを無理に引っ張ったり、ねじったりしないでください。損傷(亀裂、ひび割れ、裂け目など)や部品の外れなどが発生し、適切な換気が行えないことがあります。
- 6) エルボコネクタ内部の大气開放弁を引っ張ったり、エルボコネクタから取り外したりしないでください。
- 7) 窒息を防止し、CO₂再呼吸の可能性を軽減するため、以下の点に注意してください。
 - ① 死腔を考慮し、患者に合ったサイズを使用してください。
 - ② 人工呼吸器の設定が適切であることを確認してください。
 - ③ 呼気ポートを閉塞しないでください。
 - ④ 使用前および使用中に、呼気ポートからガスが排出できていることを確認してください。
 - ⑤ 換気動作中以外は、患者から幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクを取り外してください。装着したまま換気動作が停止すると、呼気ポートから呼気ガスが十分に排出できません。また、意図せず換気動作や装置の動作が停止した場合は、速やかに患者から幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクを取り外してください。
- 8) 付属のサイズゲージを使用して、患者ごとに適切なサイズのものを使用してください。不適切なものを使用すると、皮膚への刺激や圧迫による皮膚障害(発赤、痛み、褥瘡など)が発生したり、患者の適切な換気が行えないことがあります。
- 9) 患者の装着部の状態は定期的に確認してください。皮膚への刺激や圧迫による皮膚障害(発赤、痛み、褥瘡など)が発生することがあります。
- 10) 酸素の流量が固定されている場合は、圧力設定、患者の呼吸パターン、マスクの選択、酸素投与部の状態、リーク量などにより、吸入される酸素の濃度が変わることにご注意してください。
- 11) 人工呼吸器の設定を決定する際は、患者の装着部からのリークを適切に考慮してください。リークにより呼気の一回換気量の測定値と供給された一回換気量に差異が生じ、患者が低換気や過換気になることがあります。なお、この影響の大きさは、人工呼吸器の補正能力によって異なります。
- 12) 患者に接続する前および使用中に、ガスが流れていることを確認してください。
- 13) ヘッドギアのストラップを締めすぎないようにしてください。
- 14) 包装袋は使用する直前まで開封しないでください。
- 15) 幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクの部品を患者が嚥んだり、飲み込んだりしないように注意してください。
- 16) マスク設定が必要な人工呼吸器を使用する場合は、必要な設定を行ってから使用してください。
- 17) 胃管チューブを取り付けている患者に使用する場合は、頬部の圧迫が増加し、皮膚への刺激や圧迫による皮膚障害の原因となる場合があります。患者の状態を定期的に確認してください。
- 18) 圧力ポートを使用しない際はキャップをはめてください。リークが発生し、患者が低換気になることがあります。
- 19) 患者に幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクを装着する前に、呼吸回路に緩みや外れ、閉塞などが無いことを確認してください。
- 20) 本品の使用時は以下の使用環境条件を守ってください。
 - ① 温度範囲 5～40℃
 - ② 湿度範囲 15～95% RH (結露しないこと)
 - ③ 気圧範囲 700～1060hPa
- (2) 廃棄に関する注意事項
 - 1) 廃棄する場合には、各自治体または施設の基準に従ってください。感染のおそれがある製品を廃棄する場合には、感染性廃棄物として各自治体または施設の基準に従ってください。正しく廃棄されない場合には、感染や環境に影響を及ぼす可能性があります。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 非侵襲的陽圧換気療法の非適応の患者[適応患者以外に使用した場合、症状が悪化することがあります。適応となる疾患、条件、注意事項などに関しては「NPPVガイドライン(改定第2版)」を参照してください。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクの輸送および保管時は、以下の環境条件を守ってください。
 - 1) 温度範囲 -20℃～+65℃
 - 2) 湿度範囲 10%～95% RH
 - 3) 気圧範囲 700～1060hPa
- (2) 直射日光の当たらない場所に保管してください。幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクが劣化します。
- (3) 高温時の車内(特にダッシュボードの上など)に保管しないでください。幼児/小児用NPPV フルフェイスマスクが変形することがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本光電工業株式会社

電話番号: 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>