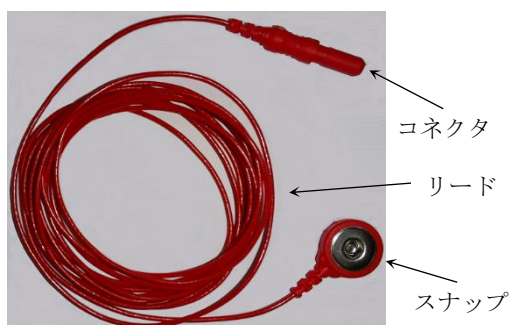


Natus スナップリード**【禁忌・禁止】****併用医療機器**

- ・磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置)との併用
[MRI 装置への吸引、故障、破損、熱傷等が起こる恐れがある。]
- ・除細動器
[故障、破損、熱傷等が起こる恐れがある。]
- ・可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素存在下では使用しない事。
[爆発または火災を引き起こす恐れがある。]

使用方法

- ・痛みや痒みなどの異常を感じた場合は使用を中止する事。

【形状・構造及び原理】**1. 形状**

品番	リード長 (m)	リード 色	スナップ 色	組数
1411516	1	緑	緑	1
1411517	1	橙	橙	2
1411520	1.5	黒	黒	2
1411524	2	橙	橙	2
1411530	3	黒	白	2
1411535	3	黒	黒	2
1411541	0.6	赤	赤	1
1411542	0.75	黒	黒	1
1411548	0.6	緑	緑	1

寸法精度:10%

2. 原理

被検者体表に貼付したスナップ電極から導出された生体電気信号を睡眠評価装置へ伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、被検者体表に貼付したスナップ電極から導出された生体電気信号を、睡眠評価装置へ伝達する睡眠評価用センサである。

【使用方法等】

1. スナップ電極を、本品のスナップに接続する。
2. スナップ電極を、被検者の体表貼付部位に貼付する。
3. 本品のコネクタを、本品を使用する睡眠評価装置の該当コネクタに接続する。
4. 併用医療機器

販売名	認証番号
エンブラ N 7000	21500BZY00548000
エンブレッタ MPR	228AFBZX00023000
エンブラ Dx シリーズ	302ALBZX00023000

【使用上の注意】

- ・本品とスナップ電極の接続、スナップ電極の被検者への貼付は確実にを行い信号品質を確認する事。
- ・溶剤などの化学薬品を使用しない事。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しない事。
- ・水滴のかかる場所や湿気の多い場所には置かない事。
- ・本品が被検者の首に巻き付かない様に注意する事。
- ・本品を取り外す時は、スナップ及びコネクタを持って外す事。

【保管方法及び有効期間】**1. 保管方法**

高温、多湿、直射日光、ほこりの多い場所を避ける事。
塩分、硫黄分などを含んだ空気に晒されない事。

2. 保管環境

- ・温度:-25 ～ +55 ℃
- ・湿度:20 ～ 80 %
- ・気圧:500 ～ 1060 hPa

3. 耐用期間

6 か月[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- ・水で薄めた中性洗剤に糸くずの出ない布を浸し固く絞ったもので汚れを拭き取る。
- ・スナップ及びコネクタを液体に浸さない事。
- ・自然乾燥させた後、絡まない様に整理して保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
チェスト株式会社
03-3813-7200
- ・製造業者
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) (カナダ)