

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 アプライヤ 16446000
AVM クリップアプライヤー（XS タイプ）

【禁忌・禁止】

製品を組立の際にはそれぞれのパーツ（ジョー、シース、アウターチューブ、ハンドルパート）に同一番号が記載されていることを確認し、異なる番号同士を組み合わせないこと。[AVM 用マイクロクリップに過度な負荷がかかる場合があります。]

＜相互作用＞「相互作用の項参照」

本品はエスクラップ社 AVM 用マイクロクリップ専用鉗子のため、他社との組み合わせで使用することはできない。[クリップの損傷、クリップの性能に影響を及ぼすため]


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



写真は製品の一例を示す。

各部名称

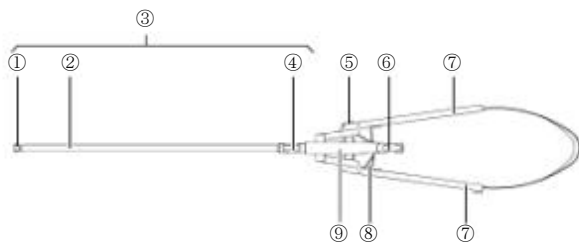

- ① ジョー（クリップ把持部）
- ② アウターチューブ
- ③ シース
- ④ ローテーションダイヤル
- ⑤ ラチェットボタン（プッシュ式）
- ⑥ ロックボタン
- ⑦ ハンドル把持部
- ⑧ ラチェット
- ⑨ ハンドルパート

2. 原理

本品のハンドル部を操作することでジョー一部にて AVM 用マイクロクリップを把持し、血管に取り付ける。

【使用目的又は効果】

AVM 用マイクロクリップを組織に取り付けるために用いる。

【使用方法等】

＜AVM 用マイクロクリップのつけ方＞

正しい把持方法（図 1）



誤った把持方法（図 2-1）



誤った把持方法（図 2-2）




誤った把持方法（図 2-3）




AVM クリップアプライヤーのジョー①部分に AVM 用マイクロクリップのコイル部分全体が包み込まれるように、収まって把持されていることを確認する。

AVM 用マイクロクリップのコイル全体が包み込まれていない（図 2-1）、斜めに把持されていない（図 2-2）、片側のコイルしか把持されていない（図 2-3）などがないかを確認する。

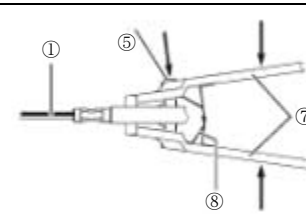


ラチェットボタン⑤を押しながらハンドル把持部⑦を握るとラチェット⑧がかかり、AVM 用マイクロクリップを把持したままラチェットをかけることができる。

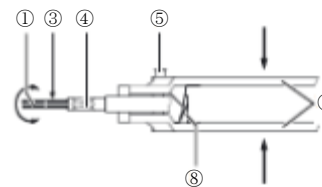

ローテーションダイヤル④を回し、AVM 用マイクロクリップを必要方向へ回転させることができる。ハンドル把持部⑦を握ると AVM 用マイクロクリップ先端が開く。それと同時にラチェット⑧のかかっていたラチェットボタン⑤は自動的にリリースされる。

＜AVM 用マイクロクリップの外し方＞

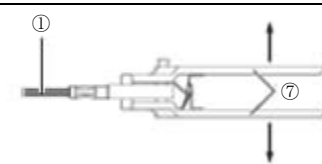

ハンドル把持部⑦をゆっくり離していくと、ジョー①が開き、AVM 用マイクロクリップが閉じる。その後、AVM 用マイクロクリップを AVM クリップアプライヤーから外す。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前

- ・ 本品は使用前に必ず洗浄、滅菌をすること。
- ・ 損傷、磨耗、又は機能していない部位がないかを必ず点検すること。



2. 使用中

- ・ 血液や組織片は局方精製滅菌水をひたしたリントフリークロスの柔らかい布でこまめに清拭すること。

- 使用中は接合部に過剰な負荷や負担をかけないこと。誤った使用は把持部にずれや亀裂を生じさせる原因となる。
3. 使用後
- 使用後は出来るだけ早く洗浄を行うこと。



4. 分解組立

<分解方法>

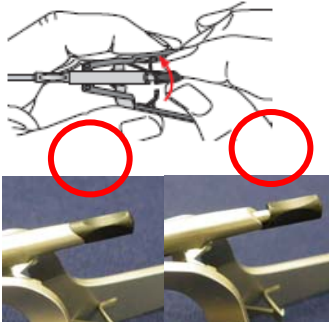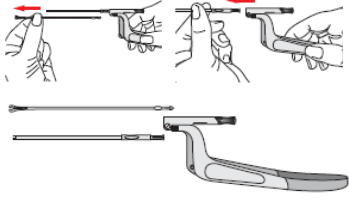分解時には下記の分解方法をよく確認の上、注意深く行うこと  図 1.閉じている状態 図 2.開いている状態	ロックボタン⑥を、左図 2 の位置まで回転させる。
 図 1.閉じている状態 図 2.開いている状態	その後、ジョー①、アウターチューブ②の順に、引っ張りハンドルパート⑨から外し、3 つのパーツへ分解する。

<組立方法>

- 組立時には下記の組立方法をよく確認の上、注意深く行う。
- 製品を組立の際にはそれぞれのパーツ（ジョー、シース、アウターチューブ、ハンドルパート）に同一番号が記載されていることを確認し、組み立てる。異なる番号同士を組み合わせると AVM 用マイクロクリップに過度な負荷がかかる場合がある。

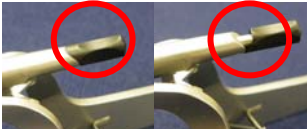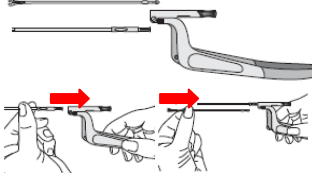図 1.閉じている状態 図 2.開いている状態 	ロックボタン⑥を、左図の位置まで回転させます。
	その後、アウターチューブ②、ジョー①の順にハンドルパート⑨内に差し込む。シースアウターチューブは完全にハンドルに挿入する。
	ジョー①が、アウターチューブ②のスリットにしっかりと入っていることを確認する。（左図○部分） 組立後、にアプライヤーが正常に作動することを確認する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療用具の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社製クリップへの使用	クリップを確実に把持することができない。	クリップの損傷、クリップの性能への影響

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- 不適切な取り扱い、洗浄、管理により破損、変形、腐食、分解、変色、屈曲が生じる可能性がある。
- 金属疲労による機械器具の破損、分解

[重大な有害事象]

以下のような有害事象が発現した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

- 不適切な取り扱い、使用方法により血管、神経、軟部組織、筋肉、内臓、骨、若しくは関節の損傷
- 破損した機械器具の破片の体内留置
- 感染症

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
- 院内での移動保管に際しては本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。
- 異種金属の手術器具は、原則として別にセットすること。これは長期間保管の際に異種金属同士の電解沈着を防止するためである。

【保守・点検に係る事項】

- 適切な洗浄、取扱及び滅菌、そして標準的な日常メンテナンスを怠った場合、器具の機能低下要因となる。
- 溶液（例：生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨード含有消毒剤など）にはステンレススチールに腐食や孔食を起こしやすいものがあるため長時間の接触を避ける、接触後は迅速に洗い流すこと。
- 漂白剤や水銀の重塩化物などの強酸（pH4 以下）又はアルカリ（pH10 以上）製剤を消毒に使用しないこと。
- ステンレススチール製の手術器具を長時間血液や生理食塩水にさらすと腐食が生じ、孔食や磨耗の発生原因になる。

1. 洗浄・滅菌

- 血液や体液に汚染された器具を取扱う際は、適切な保護用のマスク、手袋、メガネ、防水性エプロン等を着用すること。
- 器具に付着した血液及び体液は乾燥させないこと。
- 洗浄及び滅菌の前に手術器具を適切に分解すること。
- 壊れやすい手術器具は先端の損傷を防ぐために注意して取り扱うこと。特に洗浄及び滅菌の際は注意すること。
- 金属間の電解作用を避けるため、異なる金属組成の器具は別々に処理すること。
- 血液や体液に汚染された手術器具を安全に取り扱うために、必ず以下に概説する手順に従うこと。

(1) 洗浄

- 粘液、血液、その他の体液の凝固を防ぐため、手術器具を熱湯や消毒剤に浸けないこと。
- 金属ブラシ（スチールウール、ワイヤーブラシ、パイプクリーナー等）や硬質ナイロンスポンジ、研磨剤入り洗剤を使わないこと。

- 接合部のある器具は、先端を開いた状態で洗浄すること。接合部と把持部は特に注意して洗浄すること。分解できるものは分解して器具の全面を洗浄すること。
- 洗浄剤/消毒剤の製造元の指示に従い、濃度・温度・時間に関する使用を順守すること。
- 洗浄時の温度は 55℃を超えないようにすること。

以下の方法を薦める。

用手洗浄後、消毒の場合

- ヒンジ、接合部を開いた状態で製品を洗浄する。
- 用手洗浄／消毒後に目視で表面の残存物を点検する。
- 必要に応じて洗浄処理を繰り返すこと。

消毒剤に浸漬後、ブラシを用いた用手洗浄

段階	手順	温度 [°C]	時間 [分]	水質
I	洗浄	RT (冷)	15	D-W
II	中間洗浄	RT (冷)	1	D-W
III	消毒	RT (冷)	15	D-W
IV	最終すすぎ	RT (冷)	0.5	FD-W
V	乾燥	RT	-	-

D-W：飲料水

FD-W：RO 水（脱ミネラル水）

RT：室温

第I段階

- 製品を洗浄剤/消毒剤に製品を十分に浸漬させること。すべての表面が浸漬していることを確認すること。
- 付属の専用洗浄ブラシ（品番：FM32800）を用い、表面から残存物が目視できなくなるまで、内腔を含む製品を流水（水道水）にて洗浄すること。
- 見えない窪み、内腔、複雑な形状など、目視検査で分からない箇所を少なくとも1分間または残存物がなくなるまでブラッシングすること。可動性器械は可動部を動かしながらブラッシングすること。
- その後、単回使用シリンジ（20 ml）を用いて、アクセスの難しい部分を洗浄剤で十分（少なくとも5回）に洗浄すること。
- 腐食のリスクを避けるために、表面を破損する可能性のある金属ブラシや研磨剤を洗浄に使用しないこと。

第II段階

- 流水で製品を完全にすすぐこと（すべてのアクセスできる表面）。
- 十分な時間をかけて水気を切ること。

第III段階

- 消毒剤に製品を十分に浸漬させること。すべての表面が浸漬していることを確認すること。

第IV段階

- 流水で製品を完全にすすぐこと（すべてのアクセスできる表面）。
- 十分な時間をかけて水気を切ること。

第V段階

- リントフリークロス、もしくはエアガンを用いて、製品を完全に乾燥させること。

ブラシによる用手予備洗浄

段階	手順	温度 [°C]	時間 [分]	水質
I	消毒 洗浄	RT (冷)	15	D-W
II	中間洗浄	RT (冷)	1	D-W

D-W：飲料水

RT：室温

第I段階

- 製品を洗浄剤/消毒剤に十分に浸漬させること。すべての表面が浸漬していることを確認すること。

- 目視できる残存物が表面からなくなるまで、付属の専用洗浄ブラシ（品番：FM32800）で、内腔を含む製品を洗浄すること。
- 見えない窪み、内腔、複雑な形状など、目視検査で分からない箇所を少なくとも1分間または残存物がなくなるまでブラッシングすること。可動性器械については、可動部を動かしながらブラッシングすること。
- その後、単回使用シリンジ（20 ml）を用いて、アクセスの難しい部分を洗浄剤で十分（少なくとも5回）に洗浄すること。
- 腐食のリスクを避けるために、表面を破損する可能性のある金属ブラシや研磨剤を洗浄に使用しないこと。

第II段階

- 流水下で製品を完全にすすいで下さい。（すべてのアクセスできる表面）

機械的アルカリ性洗浄および熱水消毒の場合

洗浄機のタイプ: 超音波工程のないシングルチャンバーのウォッシャーディスインフェクター

- 洗浄用のトレイに製品を置くこと（ブラインドスポットの洗浄は避けること）。
- ヒンジや接合部付きの製品は接合部を開放してトレイに置くこと。

段階	手順	温度 [°C]	時間 [分]	水質
I	前洗浄	< 25	3	D-W
II	洗浄	55	10	FD-W
III	中間洗浄	> 10	1	FD-W
IV	温熱洗浄	90	5	FD-W
V	乾燥	-	-	-

D-W：飲料水

FD-W：RO 水（脱アルカリ水）

(2) 滅菌

推奨滅菌方法及び条件は以下のとおりです。

滅菌方法：高圧蒸気滅菌（プレバキューム式）

滅菌条件：134℃、5 分

2. 日常のメンテナンス

＜注油/組立て＞

- 器具は再生処理工程の中で、毎回潤滑処理を行うこと。特に接合部及び可動部分の潤滑が重要である。また、メンテナンスオイルを使用する場合は、乾燥後冷却した器具に注油すること。
- 鉱油物、石油、シリコンベースのオイルは使用しないこと。接合部への注油は、非シリコン系、水溶性の潤滑油、例えば Aesculap 器具用オイル（JG598 又は JG600）などを用いて滅菌前に行うこと。
- 器具を再度組み立てる際は、必要に応じて組立て前にバスケットかトレイに入れること。
- 先端の折れ曲げ、くぼみ、亀裂、ずれや腐食がないかを点検すること。錆、変色又は損傷した器具は必ず取り除くこと。可動部分を点検し、各部が正しく作動することを確認すること。
- 応力亀裂を避けるために、滅菌する際に器具を完全に開放しておくこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG