

類別：器12 理学診療用器具

一般的名称：再使用可能な止血帯

JMDNコード：17230000

クラス分類：クラスⅠ 一般医療機器


再使用禁止

SAM ジャンクショナルターニケット

【禁忌、禁止】

- 1 本器は改造又は分解しないでください。
- 2 本器に異常が生じた際は、使用を中止してください。
- 3 4時間を超える連続使用は、行わないでください。
- 4 医師の適切な管理のもと取り外しを行ってください。
- 5 本器は単回使用品です。

【形状、構造等】

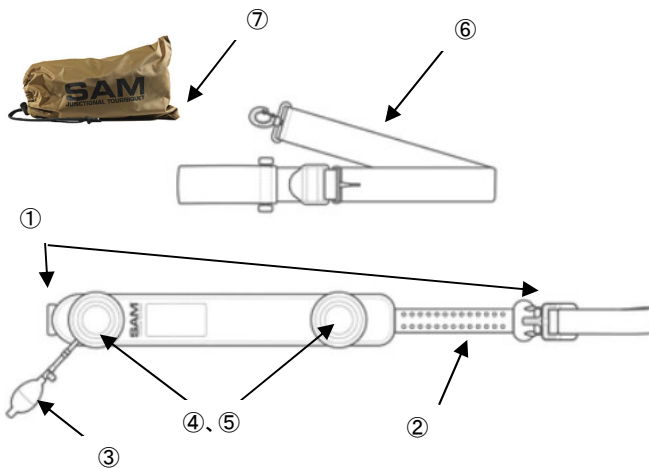

- ① オートストップバックル
- ② ウェビングベルト
- ③ コントロールポンプ
- ④ TCD(ターゲットコンプレッションデバイス)
- ⑤ TCDエクステンダー
- ⑥ 補助ストラップ
- ⑦ 収納ケース

1 仕様

	名称	全長 mm	全幅 mm
①	オートストップバックル	1420	100
②	ウェビングベルト・ハンドル		
③	コントロールポンプ	130	50
④	TCD 収納時	110	20
⑤	TCDエクステンダー	100	50
⑥	補助ストラップ	92	50

本体重量：488g

収納袋含総重量：680g

2. 原材料

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| ① | オートストップバックル | ポリアセタール |
| ② | ウェビングベルト・ハンドル | コーデュラナイロン |
| ③ | コントロールバルブ | 非フタル酸ポリ塩化ビニル |
| ④ | TCD | ポリウレタン・ポリカーボネート |
| ⑤ | TCD エクステンダー | ポリカーボネート |
| ⑥ | 補助ストラップ | ナイロン |
| ⑦ | 収納ケース | ナイロン |

3. 原理

止血したいに損傷部位に対し適切な位置に本器をセットしウェビングベルトの両端を引くとオートストップバックルは、適切な位置で自動的にロックされます。TCD は血流を止めたい位置にセットする事が可能です。TCD をセットした位置にてコントロールポンプを使用し空気を入れ、膨張させるとウェビングベルトとの間で膨らみ加圧される事で血流を止めます。

TCD エクステンダーは、TCD の上部にフィットし、加圧箇所をより限定的にさせる事で上半身の損傷に対する接合止血帯用途を提供します。

【使用目的、効能又は効果】

- 1 使用目的 上下肢等からの出血に対し血管を圧迫し、血流を止め止血する。
骨盤損傷の疑いのある患者に対し骨盤の固定を行う。

【使用方法】 下肢の場合

- 1 ベルトを患者の下にスライドさせ、ターゲット圧迫の位置を決めます。
圧迫する損傷部とTCD との間には滅菌ガーゼを使用するか、損傷部上を直接ターゲットにする場合は止血包帯等を併用します。
- 2 TCD を所定の位置に保持し、バックルを使用してウェビングベルトを接続します。
- 3 バックルが固定されるまで、茶色のハンドルをカチッと音が聞こえるまで互いに引き離します。余ったベルトを押し込んで固定します。
ベルクロを下げます。ベルトが固定されると、2 回目のカチッという音が聞こえる場合があります。
- 4 ハンドポンプを使用して、出血が止まるまで TCD を膨張させます。

出血を制御するために搬送中に患者を監視し、出血量を調整します。

患者の容態変化など必要に応じてデバイスを変更します。

5 取り外す時は、医師の管理・指示のもとベルトを外します。

【使用方法】 上肢の場合

- 1 本器を患者の脇の下のできるだけ高い位置に当て配置します。
負傷側の D リングを首の側面に合わせます。接続バックルを締め、茶色のハンドルを引いてストラップを所定の位置に固定し、カチッと音がするまで引き離します。
- 2 使用前に補助ストラップ上の茶色のベルクロに TCD に取り付けます。
- 3 大きなナスカンを使用して補助ストラップを 本器 前面の D リングに接続します。
- 4 小さなナスカンを使用して補助ストラップを 本器の背面にあるコードに、患者の正中線のできるだけ近くで接続します。
- 5 補助ストラップ上の茶色のハンドルを使用してストラップをできるだけ締めます。
ポンプを使用して、出血が止まるまで TCD を膨張させます。
出血を制御するために搬送中に患者を監視し、必要に応じて装置を調整します。
- 6 取り外すには、医師の指示のもとベルトのバックルを外します。

【使用上の注意】

- 1 装着時には、必ず複数名で行います。
- 2 使用方法を習得した人以外は使用できません。
- 3 本体に破れ等破損のある物は使用しないでください。
- 4 使用中は、患者の状態を絶えず確認すると同時に、本体に異常がない事を確認します。
- 5 本体の改造、分解は禁止です。
- 6 患者または本体に異常が生じた場合には、患者の安全を確保しながら本体を外し、他の止血方法を選択する等の措置を講じてください。
- 7 本器は、単回使用品です。
- 8 本器を外す時は、必ず医師の管理・指示のもと行ってください。

【貯蔵、保管方法及び使用期限】

- 1 貯蔵、保管方法
常温・常湿にて保管する。ガスの発生する場所等に保管しない
- 2 使用期限

設定なし。

単回使用品です。

【保守・点検に係る事項】

- 1 本品は、単回使用品です。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel:03-5820-4649

2 製造業者 SAM MEDICAL PRODUCTS
米国

取扱説明書を必ずご参照下さい。