

類別：医05 副木

一般的名称：成形副木

JMDNコード：35354000


クラス分類：クラスⅠ 一般医療機器

サンプルビックスリングⅡ

【禁忌、禁止】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 2 乳幼児、子供への使用は禁止です。
- 3 腰部には使用しないで下さい。
- 4 複数回使用が可能な製品ですが、明らかな製品劣化が見られる場合には使用しないで下さい。

【形状、構造等】

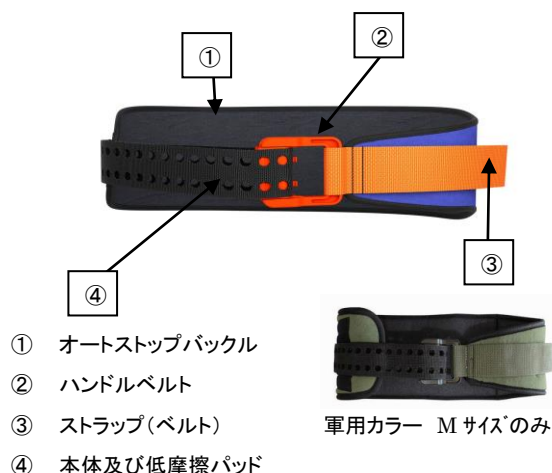

1 仕様

	全長	全幅	厚み
Small (S)	1400 mm	180 mm	25 mm
Standard (M)	1520 mm	180 mm	25 mm
Military (M)			
適応胴寸	S サイズ* 690-1140mm M サイズ* 810-1270mm		
重量	250 g		

2. 原材料

- | | |
|---------------|----------|
| ① オートストップバックル | プラスチック |
| ② 本体及び低摩擦パッド | PVC、コットン |
| ③ ストラップ(ベルト) | ポリエステル |
| ④ ハンドルベルト | ポリエステル |

3. 原理


本体を骨折、またはその疑いのある骨盤に巻き、ストラップ及びハンドルを相反方向を引くことにより150Nの力が掛かるとオートストップバックルが働き、適切な位置で固定されます

【使用目的、効能又は効果】

- 1 使用目的 骨盤骨折、またはその疑いがある傷病者の骨盤を適切に固定し、二次障害を防止するための成形副木として使用します。
- 2 性能 本器を装着したまま、レントゲン撮影、CT撮影、MRI撮影が行えます。

【使用方法】 下肢の場合

- 1 患者のポケットや骨盤周りから巻き付けに邪魔になる物を全て取り除き、本体の黒い面を臀部と並行になる様にセットします。

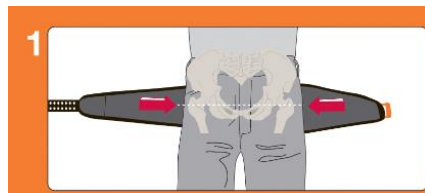

- 2 黒いストラップをバックルに通し完全に引きます。



- 3 黒いストラップ及びオレンジのハンドルを相反方向(反対方向)へバックルが自動的にロックするまで引きます。ロック時には「カチッ」とロック音がかかります。



- 4 ロックしたら、黒いストラップを本体まわりのベルクロに巻き付けます。
- 5 製品の取り外しは、医師の管理の下で行ってください。

【使用上の注意】

- 1 装着時には、必ず2名以上で行います。

- 2 使用方法を習得した人以外は使用できません。
- 3 使用中は、患者の状態を絶えず確認すると同時に、本体に異常がない事を確認します。
- 4 傷病者又は機器に異常が生じた時は、傷病者の安全を確保しながら機器を外し、他の固定方法を選択する等の措置を講じます。
- 5 本体の取り外しは、医師の管理の下行ってください。
- 6 本体の改造、分解は禁止します。
- 7 しばらく使用しなかった時には、使用前に必ず点検を行います。

【貯蔵、保管方法及び使用期限】

1 貯蔵、保管方法

常温・常湿にて保管する。(水濡れ不可)
ガス等の発生する場所に保管しないで下さい。

2 使用期限

設定なし

【保守・点検に係る事項】

- 1 本体に亀裂、破れ等ないか確認して下さい。
- 2 本体が汚れた場合には、洗濯アミ・中性洗剤を使用した洗浄が行えます。(温水、漂白剤等は使用しないで下さい。)
- 3 洗浄後は、完全に乾燥させてからご使用下さい。
- 4 滅菌不可です。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
 東京都千代田区岩本町1丁目9番5号
 FKビル 4階
 Tel:03-5820-4649
- 2 製造業者 SAM MEDICAL PRODUCTS
 米国

取扱説明書を必ずご参照下さい。
