

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

ピンレトラクター

【警告】*

- ① 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[折損の原因となる]
- ② 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。[製品の寿命を著しく低下させる]
- ③ 全ての手術器具は、使用によって受ける反復的応力により疲労にさらされる。明らかな疲労が見られる場合には使用せずに新しいものと取り換えること。[様々な不具合の原因になると考えられる]

【禁忌・禁止】*

- ① 本書記載の【使用目的又は効果】以外の使用目的には使用しないこと。[誤った使用方法は本品の折損その他予期せぬ事象を招くおそれがある]


【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、軸様のハンドルをもつ手術器具で、先端部からハンドル部にかけて直角に曲がった後、カーブした形状となっている。また、先端部付近に箱状の突起部がある。先端部は下向きに曲がっており、その先端は尖った鋸刃状になっている。

2. 形状、構造

形状

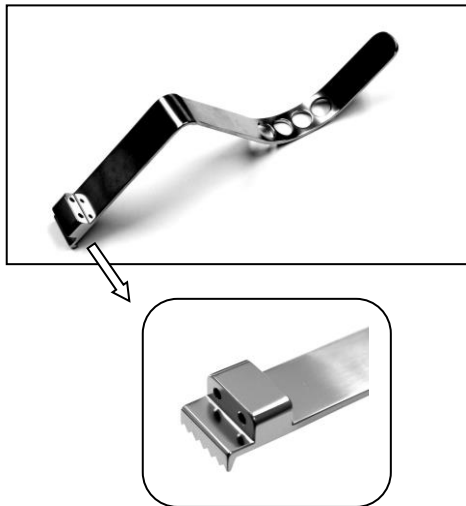

カタログ番号：E J 0 0 0 6 3 9

3. 原理

軸様のハンドルをもつ医療機器で、組織の挙上又は牽引により、手術部位の露出、維持、又は空間の確保をおこなう。

4. 組織・体液に接触しうる部位の原材料*：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

整形外科領域における組織の挙上又は牽引により、手術部位の露出、維持、又は空間の露出、維持、又は空間の確保を行う。

【使用方法】

本品は出荷時、未滅菌であるため、使用前及び再使用前には適切な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後の無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっては院内の規定に従うこと。

洗浄方法代表例

- (1) 製造元の指示に従い、医療機器用の中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。把持部の溝部分は念入りにブラシで洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上流し、十分にすすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。

滅菌方法代表例

- (1) 高圧蒸気滅菌
1) 重力差空気除去滅菌
方法：包装、時間：15分、温度：132℃
2) 強制空気除去滅菌
方法：包装、時間：3分、温度：132℃

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- ・本品の先端部は特に取り扱い、洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、掻きキズなどを生じさせる恐れがあるので注意すること。又、異常が見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り、磨耗）では使用しないこと。
- ・本品を廃棄する場合は、感染等に注意し、院内で定められた手順に従い適切に処理を行うこと。

【保守・点検に係る事項】*

- ・日常点検及び使用前点検を行い、正常に作動していることを必ず確認すること。
- ・本品の使用後は血液、体液が乾燥する前に直ちに洗浄を行うこと。
- ・血液や残片物を取り除き、稼動部分が全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
- ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しないこと。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保存条件によっては腐食が発生することがある。

機械器具 38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

ピンレトラクター

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。
この添付文書をよくお読みになり、内容を十分ご理解された上で
ご使用ください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-2

お問い合わせ窓口：

TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361