


医療用品 5 副木

一般医療機器 成形副木 35354000

マイアミJカラー

【形状・構造及び原理等】＊

1. 形状、構成＊

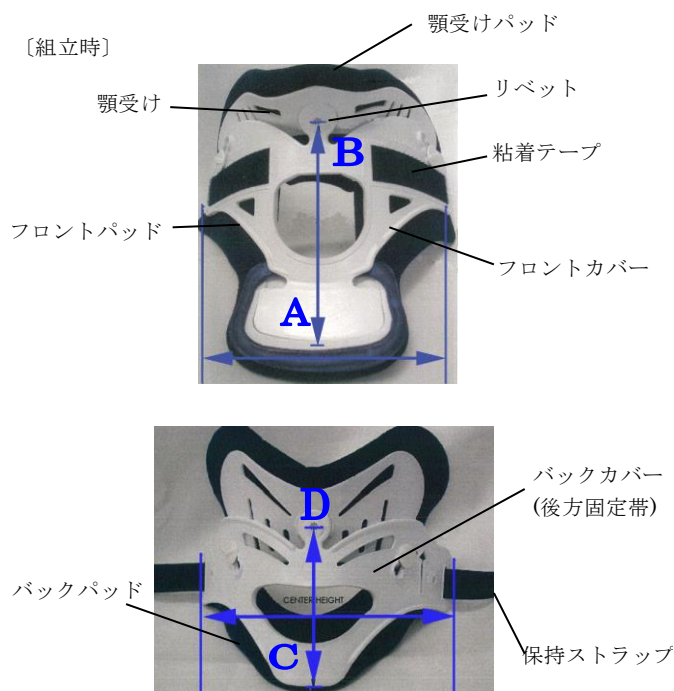

(1) 本体

商品名	商品コード	規格	フロントカバー		バックカバー	
			巾 A(mm)	中心部の 高さ B(mm)	巾 C(mm)	中心部の 高さ D(mm)
マイアミJカラー STOUT	MJ-200L	STOUT	358.90	128.27	358.90	89.66
マイアミJカラー SUPER SHORT	MJ-200S	SUPER SHORT	248.92	89.41	298.45	113.54
マイアミJカラー XS	MJ-250	XS	298.45	89.41	229.11	81.03
マイアミJカラー SHORT	MJ-300	SHORT	298.45	128.27	298.45	89.66
マイアミJカラー REGULAR	MJ-400	REGULAR	298.45	146.05	298.45	113.54
マイアミJカラー TALL	MJ-500	TALL	298.45	151.89	298.45	122.17
マイアミジュニア カラー-P0	MJ-P0	P0 0～6ヶ月	223.52	71.63	225.30	114.30
マイアミジュニア カラー-P1	MJ-P1	P1 6ヶ月～2歳	223.77	96.77	225.30	114.30
マイアミジュニア カラー-P2	MJ-P2	P2 2歳～6歳	244.35	109.98	232.17	107.95
マイアミジュニア カラー-P3	MJ-P3	P3 6歳～12歳	269.11	148.34	251.71	131.45

(2) フロントカバー単体

商品名	商品コード	規格	巾 A(mm)	中心部 の高さ B(mm)
マイアミJカラー-STOUT FRT ONLY	MJ-200LFRT	STOUT	358.90	128.27
マイアミJカラー REGULAR FRT ONLY	MJ-400FRT	REGULAR	298.45	146.05
マイアミJカラー TALL FRT ONLY	MJ-500FRT	TALL	298.45	151.89
マイアミJカラー SS FRT ONLY	MJ-200SFRT	SUPER SHORT	248.92	89.41
マイアミJカラー XS FRT ONLY	MJ-250FRT	XS	298.45	89.41
マイアミJカラー SHORT FRT ONLY	MJ-300FRT	SHORT	298.45	128.27

(3) 交換パッド

商品名	商品コード	規格
マイアミJカラー SUPER SHORT,S,M,L用 交換パッド	MJP-100	MJ200S, 300,400, 500用 交換パッド
マイアミJカラー STOUT用交換パッド	MJP-200L	MJ-200L用 交換パッド
マイアミJカラー XS用交換パッド	MJP-250	MJ-250XS用 交換パッド
マイアミジュニアカラー P0用交換パッド	MJP-P0	MJ-P0用 交換パッド
マイアミジュニアカラー P1用交換パッド	MJP-P1	MJ-P1用 交換パッド
マイアミジュニアカラー P2用交換パッド	MJP-P2	MJ-P2用 交換パッド
マイアミジュニアカラー P3用交換パッド	MJP-P3	MJ-P3用 交換パッド

2. 原材料（接触部の組成）

SORBATEX

3. 動作原理

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため、頭頸部を中央位置に維持し、前後左右に曲ることのないように固定する。同時に脊髄のひねり・圧迫による、生理学的な損傷、虚血性の損傷が脊髄に加わることを防ぐ。

【使用目的又は効果】

頸椎損傷修復術の後、頸椎を固定する為に使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 患者の顎から肩までの垂直距離を測り、最も適合したサイズの本品を選択する。
- (2) バックカバー（後方固定帯）を患者の後部の中心にきちんとあてがう。
- (3) フロントカバー（前方固定帯）を広げ患者の顎下にあてがい、フロントカバーの側面が耳の真下にくる様に合わせる。

同じように両側面を固定する。

- (4) 保持ストラップで調整しながら、患者の顎が顎受けの中心にフィットしているか、本品が患者の首を適切にサポートしているか等、装着状態を確認する。
- (5) 当て物を使用せず、かつ顎部が圧迫されないように固定する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1. に示したように洗浄したことを確認する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (2) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法

- (1) パッドをカバー部（固定帯）から外し、破棄交換するか、洗濯する。
- (2) カバー（固定帯）を石鹼水で拭く。塩素系又はざらつく化学洗剤は使用しないこと。
- (3) 乾燥させ、保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727

外国製造業者**

オズール エイチエフ（アイスランド）

Ossur hf (Iceland)