


機械器具 58 整形用器具器械

一般医療機器 手術用ドリルビット 32390000

中空ドリル

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状*

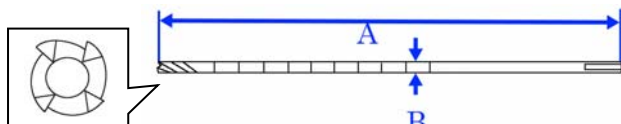

商品名	商品コード	全長 A(mm)	外径 B(mm)
中空ドリル	LKI22	200.0	7.0
	LKI22-60		6.0
	LKI22-55		5.5
	LKI22-50		5.0
	LKI23		4.5
	LKI23-40		4.0

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理*

本品を動力式の手術用穿孔器（商品の指定はない）に接続し、先端から処置部にあらかじめ挿入されているキルシュナーを通す。キルシュナーに沿って、適当な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。

【使用目的又は効果】

動力式の手術用穿孔器に取り付ける器具。適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。再使用可能である。

【使用方法等】*

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作*

- (1) 動力式の手術用穿孔器（商品の指定はない）に取り付ける。
- (2) あらかじめ処置部に挿入しておいたキルシュナー（外径2mm 商品の指定はない）を、本品の先端からとおす。
- (3) 手術用穿孔器により、キルシュナーに沿って本品を適切な速度で回転させ、骨孔を作製する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損するので使用しないこと。

- (3) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (5) 使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高压蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高压蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL: 03-3811-1131

FAX: 03-3811-1727