

胸部患者固定具 MEDTEC

※【形状・構造及び原理等】

本品は、放射線治療時に患者の胸部を適切に位置決め、固定する目的で特別に設計された板などの固定式又は調節可能な部品等から構成される装置である。再現性のある位置決めを行うことが可能となる。本品は再使用可能である。

下記の種類によって、形状・寸法の異なる構成部品が複数あり、それぞれ単品で製造販売を行うことがある。また、構成部品を組合わせて製造販売する場合がある。

一般的名称「全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具」等に該当する当社製品を組み合わせて使用することも可能である。（写真は全て代表例）

1. プレストボード
2. アームサポート
3. プレストサポートサーモプラスチック
4. ホライズンブローンプレストボード
5. ウィングボード
6. ブラジャー
7. ウェッジ
8. ラングボード
9. その他の胸部固定具

1. プレストボード

・MT350 シリーズ

本品は背もたれ式で患者の身体を適切に位置決めする。



型番	型番	型番
MT350	MT350W	MT350302
MT350301	MT350N036	MT350N037
MT350N	MT350300	MT350N030

・MT250 シリーズ


本品は背もたれ式で患者の身体を適切に位置決めする。



型番	型番	型番
MT-250C	MT-250RV1	MT-250WV1
MT-250N	MT-250W	MT250TB
MT-250R	MT-250WC	
MT-250RD	MT-250WN	

・ヘッドレスト

患者の頭部を固定するクッションである。

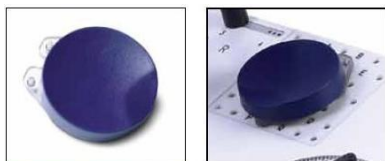

型番	型番	型番	型番
MT250SUB4	MT250SUB9	MT250TB1	MT250SUB11

・ジェルヘッドカップ


患者の頭部を固定するドーナツ状のゲル入りのクッションである。



型番	型番
MT200NSUB6	MT250SUB10

・ティモヘッドレスト

胸部固定時に構成部品にTIMO ベースプレートアダプタプレートを
使用して取り付け、患者の頭部を固定するクッションである。

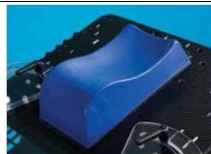

型番
MTTIMO2BBB
MTTIMO2FBB


TIMO プレートアダプタプレート



型番
MT350400

・ニューホライズン水平伏臥位プレストボード

<本品>

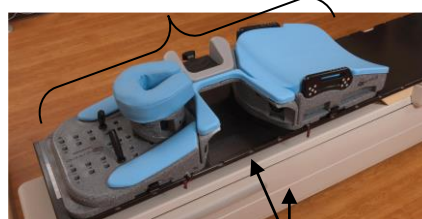

天板（本品に含まない）

型番
MTHPB01

・フラットクッション New Horizon Prone Breastboard 用



型番
MTHPB0100

・ニューホライズン水平伏臥位プレストボード ブリッジ、CLAM-LOK クッション付キット



型番
MTHPB01K


本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

- ・その他のプレストボード

型番	型番	型番
MT200CV	MT200NV	MTHPBB103

2. アームサポート

- ・ビアクシアルアームサポートシステム
上腕、前腕及び手首の位置決めをする。

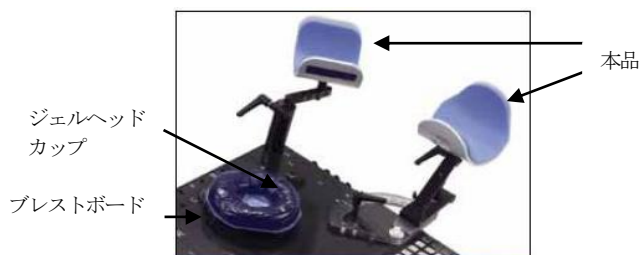

型番	型番	型番
MTTAS	MTTWS	MTTWSW
MTTWS2S	MTTWSA	MTTAS2L
MTTAS2R		

- ・サポート用クッション

型番	名称
006365	MT350 リストサポート用クッション
006337	MT350 アームサポート用クッション

- ・デルリンハンドグリップ


放射線治療の際、腕を上げた状態で患者の位置決めをする。



型番	名称
MT2504	MT-250/350 用デルリンハンドグリップ

3. プレストサポートサーモプラスチック

乳房を上方及び胸壁から離れた位置に配置し、放射線被曝を減らす。

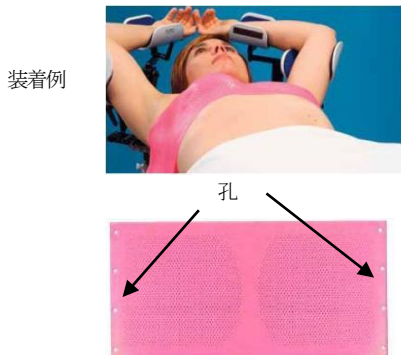

型番	連番	型番
MTRF918	MTRF9241.6	MTRFH2
MTRF9181.6	MTRF9242.4	MTRFI918
MTRF9181.6X	MTRFBS2LB	MTRFI9182.4
MTRF9182.4	MTRFBS2W	MTRFI918HP
MTRF9182.4X	MTRFBSA	MTRFX918
MTRF918X	MTRFBSW	MTRFX9182.4
MTRF924	MTRFH	MTRFH3

4. ホライゾンプロンプレストボード

機能：患者を仰向けの状態で胸部の位置決めをする。




型番
MTAPBB01

5. ウィングボード

- ・スタンダードウィングボード


機能：「ティモヘッドレスト」に患者の頭をのせ、患者の両手をハンドグリップに置き位置決めをする。

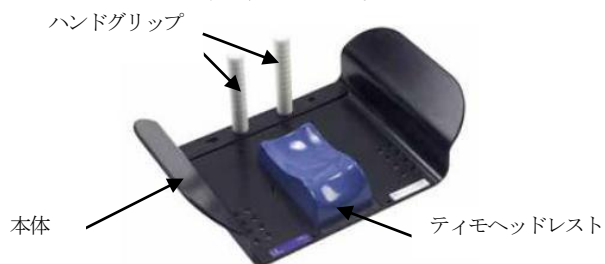

型番	セット内容
MTWB09	本体、ハンドグリップ

- ・エクステンディッド

放射線治療で「ティモヘッドレスト」に患者の頭をのせ、患者の両手を「ハンドグリップ」に置き位置決めをする。

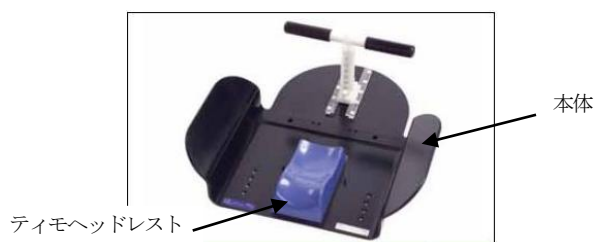

型番	セット内容
MTWB08T	本体、ハンドグリップ (T グリップ)
MTWB08U	本体、ハンドグリップ (U グリップ)

- ・ティバードウィングボード

放射線治療でティモヘッドレストに患者の頭をのせ、患者の両手をハンドグリップに置き位置決めをする。



型番	セット内容
MTWB10T	本体、ハンドグリップ (T グリップ)
MTWB10U	本体、ハンドグリップ (U グリップ)

- ・カーブドウィングボード

機能：放射線治療で「ティモヘッドレスト」に患者の頭をのせ、患者の両手をハンドグリップに置き位置決めをする。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。



型番	型番
MTCWB01	MTCWB

・その他のウィングボード

型番	型番	型番
MTGBSUB1	MTWB01	MTWB06
MTGBSUB3	MTWB0102	MTWB07
MTVLWGB01	MTWB01SUB1	
MTVLWGB01C	MTWB03	

6. ブラジャー

①トリートメントブラジャー

乳房の放射線治療で治療側の乳房の形状を保ち、治療対象外の乳房の照射を防止する。



型番	型番	型番
MTBR100	MTBR100LR1000	MTBR100XLL2500
MTBR100LL	MTBR100LR1250	MTBR100XLL3000
MTBR100LR	MTBR100LR1500	MTBR100XLR1000
MTBR100ML	MTBR100LR500	MTBR100XLR2000
MTBR100MR	MTBR100LR750	MTBR100XLR3000
MTBR100SL	MTBR100ML1000	MTBR100XLR2500
MTBR100SL400	MTBR100ML1250	MTBR100LL500
MTBR100SL600	MTBR100ML500	MTBR100XLR1500
MTBR100SR	MTBR100ML750	MTBR100ML250
MTBR100TBC	MTBR100MR1000	MTBR100MR250
MTBR100XLL	MTBR100MR1250	MTBR100SR300
MTBR100XLR	MTBR100MR500	MTBR100SR600
MTBRLPANEL	MTBR100MR750	MTBR100SL200
MTBRTBC	MTBR100SL300	MTBR100SL500
MTBRXLPANEL	MTBR100SR200	MTBR100SR500
MTBR100LL1000	MTBR100SR400	MTBR100LL750
MTBR100LL1250	MTBR100XLL1000	MTBR100XLL2000
MTBR100LL1500	MTBR100XLL1500	

②チャブナーXRT ブラ

型番 (Qty 1)	型番 (Qty 5)	品名
CRTBRA01	CRTBRA01PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ1
CRTBRA02	CRTBRA02PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ2
CRTBRA03	CRTBRA03PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ3
CRTBRA04	CRTBRA04PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ4
CRTBRA05	CRTBRA05PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ5
CRTBRA06	CRTBRA06PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ6
CRTBRA07	CRTBRA07PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ7
CRTBRA08	CRTBRA08PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ8
CRTBRA09	CRTBRA09PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ9
CRTBRA10	CRTBRA10PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ10
CRTBRA11	CRTBRA11PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ11
CRTBRA12	CRTBRA12PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ12
CRTBRA13	CRTBRA13PK5	チャブナーXRT ブラ、サイズ13

③エクステンダー

型番	品名
CRTEXT01	チャブナーXRT ブラ、バックエクステンダー

CRTEXT01PK5	チャブナーXRT ブラ用バックエクステンダー 5 個セット
CRTSHLDEXT01	Chabner bra ショルダーエクステンダー (2 本1 組、計5 組[10 本] 入り)

7. ウェッジ

放射線治療の際、患者の位置決めをするクッションである。

型番	型番	型番
20SW0102	MTWG15	MTWG45
MTWG	MTWG30	MTWG60

8. ラングボード



型番	型番	型番
202004	20250SUB9	MTLB01

9. その他の胸部固定具

型番	型番	型番
MTBB01	MTRD	MTRFTP

詳しくは弊社が提供する資料を参照ください。

【使用目的又は効果】

放射線治療をする際に、女性患者の乳房を含む胸部を適切で容易に再現性のある位置決めする為に使用する。

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

・プレストサポートサーモプラスチックを加温後、患者の装着位置へプレストサポートサーモプラスチックを強く圧着されますので、加温されたプレストサポートサーモプラスチックを使用される場合は、装着時によく患者及び患者の皮膚の状態を確認すること。

1. シュミレーターテーブルまたは治療カウチのようなしっかりとした平坦面にプレストボードをセットしてください。アルミ製ロッドの大きな穴に真鍮製のピンを差し込んでください。この部分がロッドの下部になります。
2. 真鍮製の調整ハブからスプリングブランジャを引き出し、アルミ製ロッドの上部からこのハブを取付けてください。アルミ製ロッド調整ハブのノッチと面が合っているかチェックしてください。
3. アルミ製ロッドの下部に差込んだ真鍮製ピンをプレストボードのベース版の2つの溝に嵌めこんでください。
4. 付属の2個のネジでプレストボードのベースに底カバープレート（狭い溝）を取付けてください。
5. 傾斜板の下位置に、真鍮製ハブを取付けたアルミ製ロッドを位置決めしてください。
6. 残りのネジ2個で、トップカバープレート（広い溝）を取付けてください。
7. プレストボードのヘッドカップインデックスプレートにヘッドカップの位置決めを行って下さい。ヘッドカップ2個のピンがインデックスプレートの穴に合います。ボードのどちらかのサイドに面しているピンでベースの位置決めを行わないでください。

・ニューホライズン水平伏臥位プレストボード

1. 必要に応じて、下位部と上位部の底部にスペーサーアセンブリを均等間隔に取り付ける。
2. 下位部と上位部を Lok-Bar ピンに取り付ける。
3. 治療が必要な側を開口部にして、下位部と上位部の間のドッキングボタンに中央保持部をスライドさせる。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

- 適切なウェッジクッションとウェッジスライドトレイ（必要な場合）を反対側の胸部に配置する。
- 同側インサートを中央保持部の処置側に挿入し（必要な場合）、対応するサイズのクッションで覆う。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本品（チャプナーXRT ブラ、エクステンダー）は、MR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
その他の構成品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。
- 本品を使用する前に、次の事項に注意すること。
 - ①各構成品の点検を行ない正常に使用できることを確認すること。
- 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - ①本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ②本品及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で本品の使用を止める等適切な措置を講ずること。
- 本品を移動・回転する際には、次の事柄について注意すること。
 - ①本品を使用中は常に患者の状況を監視すること。（姿勢や本品との位置関係を含む）
 - ②本品を動作させる前には、患者が安全な位置にいることを確認した上で、操作すること。
 - ③次に該当する患者の場合は、特に慎重な対応をすること。
 - ・医療従事者の指示した状態を維持できない患者
 - ・意識のない患者
 - ・身体に障がいのある患者
 - ・本品を使用する上で、医療従事者が慎重な対応が必要と判断した患者
- 取付けの際、ボードのどちらかのサイドに面しているピンでベースの位置決めを行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 本品の保管場所については次の事項に注意すること。
 - ①水のかからないこと。
 - ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れがないこと。
 - ③傾斜、振動、衝撃等を避けること。
 - ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 使用期間(耐用年数)は、製品に添付されている製造業者のリファレンスガイド(使用説明書)に従って使用された場合、次の通りです。[自己認証データ]
 - (1) 次の種類の製品は、新品出荷後1年間
MT350 シリーズ、ヘッドレスト、ジェルヘッドカップ、アームサポート
 - (2) 次の種類の製品は、40回(1回/1照射治療)
チャプナーXRT ブラ、エクステンダー

【保守・点検に係る事項】

- 暫く使用しなかった本品を使用する時は、必ず使用前に点検してください。
- 清掃
必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従ってください。）
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。
但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。
- 殺菌
本品は滅菌処理をしないこと。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

東洋メディック株式会社

電話：03-6825-3003

製造業者：

Medtec LLC dba CIVCO Radiotherapy dba CQ Medical
(アメリカ)

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。