



マスターカウチ

【形状・構造及び原理等】

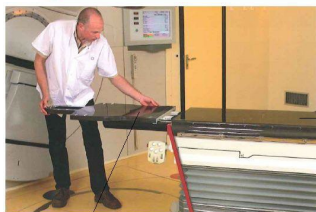


マスターカウチ

スナップオンシステム

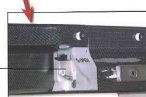

マスターカウチをスナップオンシステムによりオーバーレイにし
っかかりと固定され、正確かつ迅速交換ができる。

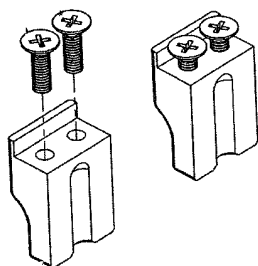

固定サイドピース

型番: 109038

型番	型番	型番
106014	114040	114222
109015	114110	114223
109027	114111	114230
109028	114120	114232
109038	114132	114240
114010	114133	114310
114011	114140	114311
114020	114210	114320
114032	114220	114332
114033	114221	114333
114340	301017	662050
114601	301090	662060
115401	301091	662070
115403	600250	662080
115451	651010	662090
115453	652010	663010
115471	653010	663020
115473	662010	866030
115481	662030	109018
115483	662040	
109012	109016	

【使用目的又は効果】

放射線治療時において患者を適切に位置決め、固定する。また連続的
放射線治療において容易に再現性のある位置決めをするためにも使用
する

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書(リ
ファレンスガイド)をよくお読み下さい。

A) マスターカウチ

- 目視にて使用上有害な欠陥がないかを確認する。
- 本品をオーバーレイに差し込む。
- 本品が確実にオーバーレイに差し込まれたかを確認する。

B) アルミレール

本品はポジフィックスやポジレストのベースプレートに取り付け
て使用する。

- 取り付けるベースプレートを用意する。
- 目標の位置に本品を取り付ける(インデックスに本品をはめ込む)
- 必要に応じてベースプレートに向かって横方向のインデックス
を調整する。(縦方向は固定したまま移動が可能である)
- 調整後は、患者ごとに設定値の記録を取る。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 磁気共鳴画像診断装置には使用しないこと。
- 本品又は本品と他の医療機器、構成品と組み合わせて磁気共鳴画
像診断装置(MRI)に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療
機器、構成品に次の材質が含まれていないか、よく確認をすること。

画像に写り込む恐 れ	画像歪み、アーチフ ァクトの発生の恐 れ	発熱の恐れ
ABS樹脂、金属	ABS樹脂、金属、 カーボンファイバ ー	金属、カーボンフ ァイバー

本品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。

- 患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないよう
にすること。治療の妨げになります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1)に立てかけて保管しないでください。
- 2)のかからない場所に保管してください。
- 3)高温の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

**【保守・点検に係わる事項】

1.清掃

必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消毒剤(塩
化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等)を湿らせて、
本品の表面を拭き清掃をしてください。(ご使用される洗浄剤及び
殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。)
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布
又はワイフ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、
体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。
但し、化学薬品(アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品(トル
エン、ラッカ等)が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しな
いこと。

- 2.殺菌: 本品は滅菌処理をしないこと。

***【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等】

製造販売業者

東洋メディック株式会社

電話: 03-6825-3003

FAX: 03-6825-3318

製造元: CIVCO Medical Solutions Co., Inc.

シブコ メディカル ソリューションズ (アメリカ)



For All Your Tomorrows

TOYO MEDIC