


## マルチフィックス

### 【禁忌・禁止】

1.皮膚が敏感な患者への使用にはご注意ください。


【形状・構造及び原理等】

#### A) マルチフィックス

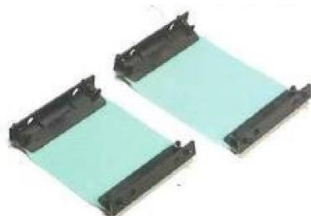

| 型番     | 型番     | 型番     |
|--------|--------|--------|
| 107062 | 107064 | 109011 |
| 107063 |        |        |


#### B) コンビフィックス

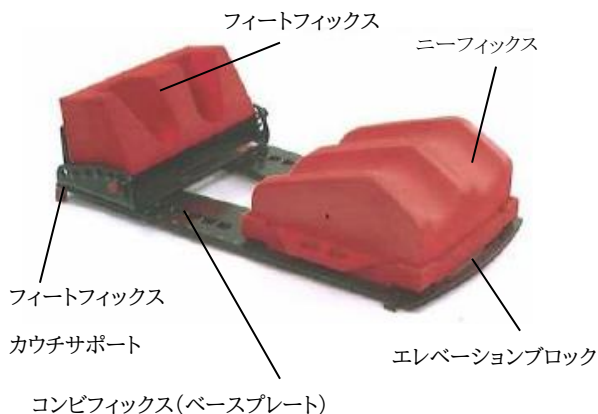

コンビフィックス(ベースプレート)

| 型番     | 型番     | 型番     |
|--------|--------|--------|
| 151002 | 302067 | 412525 |
| 151003 |        | 412820 |
| 151004 | 400006 | 412848 |
| 151011 | 401313 | 413024 |
| 151014 | 402422 | 420006 |
| 151015 | 402525 | 421313 |
| 151020 | 402820 | 422422 |
| 301045 | 402848 | 422525 |
| 301046 | 403024 | 422820 |
| 301050 | 410006 | 422848 |
| 301053 | 411313 | 423024 |
| 301065 | 412422 | 301071 |
| 301052 |        |        |

#### 型番 301048 ニーフィックス

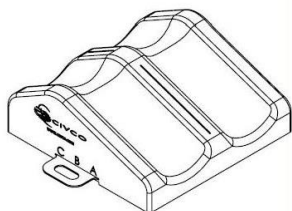


#### 型番 301047



#### 型番 402525



#### エレベーションブロック

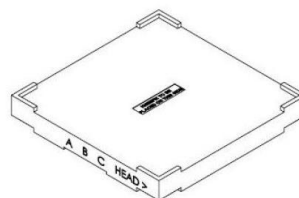

| 型番     | 重量     | 備考                  |
|--------|--------|---------------------|
| 301051 | 0.61kg |                     |
| 301054 | 1.83kg | 型番 301051 を3つ重ねている。 |
| 301056 | 1.83kg | 型番 301055 を3つ重ねている。 |
| 301055 | 0.61kg |                     |

#### フィートフィックス

#### 型番 301066



#### Combifix3 システム

| 型番       | 型番       | 型番       |
|----------|----------|----------|
| 151005   | 151004MR | 151005MR |
| 151014MR |          |          |

#### ショルダーリトラクタ

| 型番     | 型番     |
|--------|--------|
| 302070 | 302072 |

#### カウチサポート

| 型番     |
|--------|
| 302071 |

### 【使用目的又は効果】

放射線治療時における患者の腕と足を適切に位置決め、固定する。また連続的放射線治療において容易に再現性のある位置決めをするためにも使用する。

本品は組み合わせにより角度及び高さの調整が可能である

### 【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

#### A) マルチフィックス

1. マルチフィックス本体にLプロファイルをナイロンファスナーで取り付けます。
2. マルチフィックスに取り付けたLプロファイルを持ち70℃～80℃のお湯に浸します。（30～40秒程度で軟化致します）
3. マルチフィックスをお湯から引き上げて乾布等で水分を拭き取ります。
4. マルチフィックスを直接患部（腕または脚）に当て、Lプロファイルをベースプレートに固定した後、輪郭に合わせて成形します。（硬化所要時間：5～6分）
5. 硬化後は、変形することなくいつでも同じ治療姿勢が再現できます。

#### B) コンビフィックス

1. 患者を本品の上に仰向けに寝かせる。
2. 治療に合わせ、ニーフィックスをエレベーションブロックの上にのせる。
3. 患者の体形に合わせニーフィックス及びフィートフィックスの位置を調整する。また、必要に応じてフィートフィックスの角度調整を行う。
4. ニーフィックス及びフィートフィックス調整後は、患者ごとに設定値の記録を取る。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

1. 本品（次の構成品）はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。  
151004MR  
151005MR  
151014MR  
301052, 301071
2. 患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないようにすること。
3. セットアップ及び治療の間、患者が動かないことを確認すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
A) 斜めに立てかけて保管しないでください。  
B) 水等のかからない場所に保管してください。  
C) 高温高湿の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。
2. 使用期間（耐用年数）は、製品に添付されている製造業者のリファレンスガイド（使用説明書）に従って使用された場合、次の通りです。  
[自己認証データ]  
次の種類の製品は、新品出荷後3年間まで  
カウチサポート

#### 【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃  
必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイブ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。）  
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイブ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。  
但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。
2. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

### \*,\*\*【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等】

製造販売業者：  
東洋メディック株式会社  
電話：03-6825-3003

製造業者：  
Medtec LLC dba CIVCO Radiotherapy dba CQ Medical  
(アメリカ)