

マルチフィックス

【禁忌・禁止】

1.皮膚が敏感な患者への使用にはご注意ください。


**【形状・構造及び原理等】

A) マルチフィックス



型番	型番	型番
107062	107064	109011
107063		


B) コンビフィックス

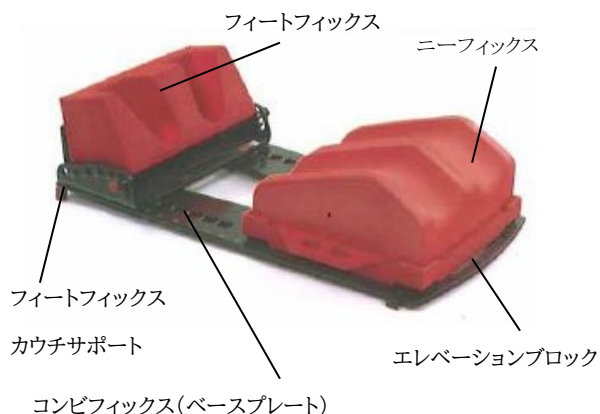

コンビフィックス(ベースプレート)

型番	型番	型番
151002	302067	412525
151003		412820
151004	400006	412848
151011	401313	413024
151014	402422	420006
151015	402525	421313
151020	402820	422422
301045	402848	422525
301046	403024	422820
301050	410006	422848
301053	411313	423024
301065	412422	301071
301052		

型番 301048 ニーフィックス

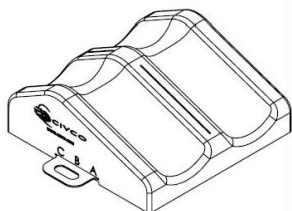


型番 301047



型番 402525



** エレベーションブロック

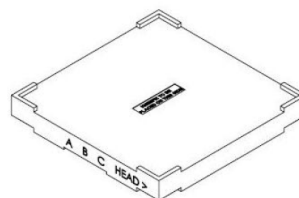

型番	重量	備考
301056	1.83kg	型番 301055 を3つ重ねている。
301055	0.61kg	

フィートフィックス

型番 301066



Combifix3 システム

型番	型番	型番
151005	151004MR	151005MR
151014MR		

ショルダーリトラクタ

型番	型番
302070	302072

カウチサポート

型番
302071

【使用目的又は効果】

放射線治療時における患者の腕と足を適切に位置決め、固定する。また連続的放射線治療において容易に再現性のある位置決めをするためにも使用する。

本品は組み合わせにより角度及び高さの調整が可能である

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

A) マルチフィックス

1. マルチフィックス本体にLプロフィールをナイロンファスナーで取り付けます。
2. マルチフィックスに取り付けたLプロフィールを持ち70℃～80℃のお湯に浸します。（30～40秒程度で軟化致します）
3. マルチフィックスをお湯から引き上げて乾布等で水分を拭き取ります。
4. マルチフィックスを直接患部（腕または脚）に当て、Lプロフィールをベースプレートに固定した後、輪郭に合わせて成形します。（硬化所要時間：5～6分）
5. 硬化後は、変形することなくいつでも同じ治療姿勢が再現できます。

B) コンビフィックス

1. 患者を本品の上に仰向けに寝かせる。
2. 治療に合わせ、ニーフィックスをエレベーションブロックの上に乗せる。
3. 患者の体形に合わせニーフィックス及びフィートフィックスの位置を調整する。また、必要に応じてフィートフィックスの角度調整を行う。
4. ニーフィックス及びフィートフィックス調整後は、患者ごとに設定値の記録を取る。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品（次の構成部品）はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
151004MR
151005MR
151014MR
301052, 301071
2. 患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないようにすること。
3. セットアップ及び治療の間、患者が動かないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
A) 斜めに立てかけて保管しないでください。
B) 水等のかからない場所に保管してください。
C) 高温高湿の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。
2. 使用期間（耐用年数）は、製品に添付されている製造業者のリファレンスガイド（使用説明書）に従って使用された場合、次の通りです。
【自己認証データ】
次の種類の製品は、新品出荷後3年間まで
カウチサポート

【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃
必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイプ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。）
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイプ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。
但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。
2. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

*,**【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等】

製造販売業者：
東洋メディック株式会社
電話：03-6825-3003

製造業者：
Anholt Technologies dba Qfix and CQ medica（アメリカ）