


ポジボード

添付文書番号：0101

*【形状・構造及び原理等】

患者の体形に合わせてアームホルダー及びアームサポートの位置を調整が可能。アームホルダーは位置調整が 3 段階、アームサポートは位置調整が 3 段階、角度調整の 5 段階が可能。

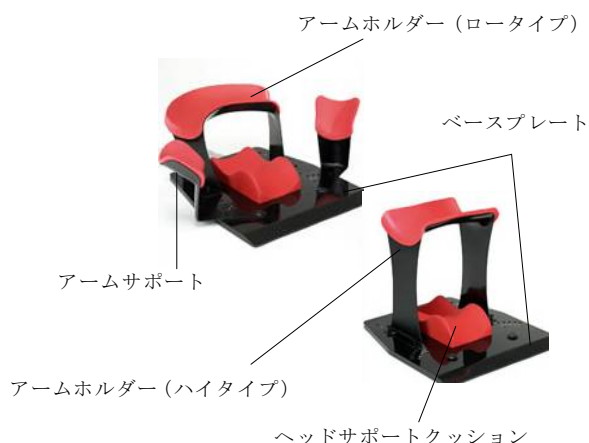

型番：

型番	型番	型番
MT400	106025	109510
102204	106028	301008
102205	106046	301080
106011	106047	301081
106012	106049	301082
106013	109007	301083
106015	109010	301084
106016	109013	106020
106017	109020	106048
106018	109030	106023
106019	109035	
106024	109040	

*・C-Qual プレストボード

型番	名称
MT40010	C-Qual 用リストサポート
MT40011	C-Qual 用アジャスタブルアームサポート左
MT40012	C-Qual 用アジャスタブルアームサポート右
MTM400	C-Qual M プレストボード（Monarch 腕上げボジショナー付）
OAP100	Monarch 腕上げボジショナー C-Qual 用
OAP110	Monarch 腕上げボジショナー Lok-Bar 用
MT40015	C-Qual アジャスタブルアームサポート左
MT40016	C-Qual アジャスタブルアームサポート右
MT40017	C-Qual リストサポート
MT400SUB04	C-Qual アジャスタブルアームサポートシエルアセンブリ
MT400SUB06	C-Qual リストサポートサブアセンブリ

【使用目的又は効果】

胸部放射線治療（体外照射）時における上腕の固定補助に使用する固定具。

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

- 患者を本品の上に仰向けに寝かせる。
- 治療に合わせ、アームホルダーのハイタイプとロータイプ（アームサポート含む）を選択する。
- 患者の体形に合わせてアームホルダー及びアームサポートの位置を調整する。（アームホルダーは位置調整が 3 段階、アームサポートは位置調整が 3 段階、角度調整の 5 段階が可能）
- アームホルダー及びアームサポート調整後は、患者ごとに設定値の記録を取る。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 磁気共鳴画像診断装置には使用しないこと。

- 本品又は本品と他の医療機器、構成品と組み合わせて磁気共鳴画像診断装置(MRI)に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療機器、構成品に次の材質が含まれていないか、よく確認をすること。

画像に写り込む恐れ	画像歪み、アーチフの発生の恐れ	発熱の恐れ
ABS 樹脂、金属	ABS 樹脂、金属、カーファイバー	金属、カーボンファイバー

本品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。

- 磁気共鳴画像診断装置には使用しないこと。
- 患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないようにすること。治療の妨げになります。

*【保管方法及び有効機関等】

1.保管方法

- 斜めに立てかけて保管しないでください。
- 水等のかからない場所に保管してください。
- 高温高湿の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

- 使用期間(耐用年数)は、製品に添付されている製造業者のリファレンスガイド(使用説明書)に従って使用された場合、次の通りです。
[自己認証データ]

- (1) 次の種類の製品は、新品出荷後、780 回/1 年間の使用で、それを 5 年間まで
型番 OAP100,OAP110

【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃

必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。）
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。
但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。

- 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

*【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等】

製造販売業者

東洋メディック株式会社

電話：03-3268-0021

FAX：03-3268-0264

製造元：MEDTEC, Inc. DBA CIVCO Medical Solutions and

CIVCO Radiotherapy

メドテック、インク．ディブイエイ シブコ メディカル

ソリューション アンド シブコ ラジオセラピー

（アメリカ）