

器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具（40902000）


CT テーブルカバー

添付文書番号：0166

【形状・構造等】

本品は、CT の画像診断用の撮影で、CT テーブルマットを覆うように設置することでテーブルマットを保護し、患者の位置決め、固定する目的で使用する。

本品は、未滅菌で使用され、再使用可能です。

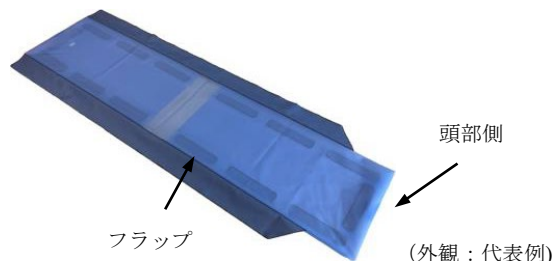

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品の適用部位に創傷又は切開創がある場合は、当該部位には使用しないこと。
2. 本品は衣服の上から使用すること。もし、皮膚と接触する場合は、衛生用のカバー又は不織布等を使用するなどして、本品に直接皮膚に接触することを避けること。

【保管方法及び有効期間等】

<環境および保管の注意>

水のかからない乾燥した場所に常温で保存してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃：使用後は殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）で本品を拭き清掃をしてください。
2. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

東洋メディック株式会社

電話：03-6825-3003 FAX：03-6825-3318

製造業者

Pearl Technology AG（スイス）

パール テクノロジー エージ

品番	名称	補足
1164	CT テーブルカバー 2090	
1166	CT テーブルカバー 2360	
1165	CT テーブルカバー 1790	
1167	CT テーブルカバー 1860	
1168	CT テーブルカバー 2070	
1169	CT テーブルカバー 400	
1175	CT テーブルカバー 310	
1177	CT テーブルカバー 2190 S	シーメンス向け
1183	CT テーブルカバー 2220 P	フィリップス向け
1203	CT テーブルカバー 2320 P 44	フィリップス向け
1204	CT テーブルカバー 2100 P	フィリップス向け
1184	CT テーブルカバー 2170 G	GE 向け
1185	CT テーブルカバー 270 G	GE 向け
1205	CT テーブルカバー 2720 G	GE 向け
1206	CT テーブルカバー 2580 G	GE 向け
1207	CT テーブルカバー 2100 G	GE 向け
1208	CT テーブルカバー 370 G	GE 向け
1221	CT テーブルカバー 2630 G	GE 向け
1209	CT テーブルカバー 2400 S	シーメンス向け
1210	CT テーブルカバー 350 S	シーメンス向け
1211	CT テーブルカバー 2170 S46	シーメンス向け
1212	CT テーブルカバー 2190 S46	シーメンス向け
1223	CT テーブルカバー 2400 S46	シーメンス向け

【使用目的又は効果】

本品は CT の画像診断用の撮影で、患者の位置決め、患者を固定する目的で使用する。

【使用方法等】

本品を使用する前に、取扱説明書（Instructions for Use）をよくお読み下さい。

1. CT テーブルからテーブルマットを取り外します。
2. テーブルマットの頭部側を、本品の頭部側にスライドしながら差込み、マットを本品の端まで引っ張ります。
3. テーブルマットの残りの部分を折り曲げて、本品の脚部にはめ込み、最後まで引っ張ります。
4. テーブルマットと本品を平らにし、フラップを使用して両端の開口部を閉じます。
5. 本品を裏返し、フックをフック穴に沿って CT テーブルに取り付けます。