

一般医療機器

類別：機械器具 30 結紮器及び縫合器

一般的名称：持針器

JMDN：12726010

販売名：マッチュー型持針器

【警告】


1. 本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。
また患者の安全に細心の注意をはらい、添付文書に従って使用すること。[重篤な不具合、有害事象が発現する恐れがあります]
2. 接触凝固での使用禁止
接触凝固等、電気メス先を本品に直接接触させて使用することは絶対にしないこと。[「使用上の注意」(2) 相互作用の項を参照下さい]
3. クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止
使用目的にあった器具を必ず使用すること。[誤った使用方法是本品の折損を招く恐れがあります]
2. 併用禁忌（併用しないこと）
弊社が指定した製品以外と併用しないこと。[設計・開発方針が異なるため適合しない恐れがあります]
3. 化学薬品の使用禁止
本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]
4. 本品への二次加工禁止
本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[折損の原因となります]
5. 粗雑な取扱いの禁止
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させます]
6. 磨き粉や金属ウールの使用禁止
洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となります]
7. アルカリ性・酸性洗剤・家庭用洗剤の使用禁止
洗浄に使用する洗剤は必ず中性洗剤 (pH 6～8) を使用し、アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないこと。また、医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。[脱色や腐食の原因となります。]
8. 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品は過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌には適合していません。[表面が褪色し、性状に影響を及ぼします。]

【形状、構造及び原理等】

形状、構造

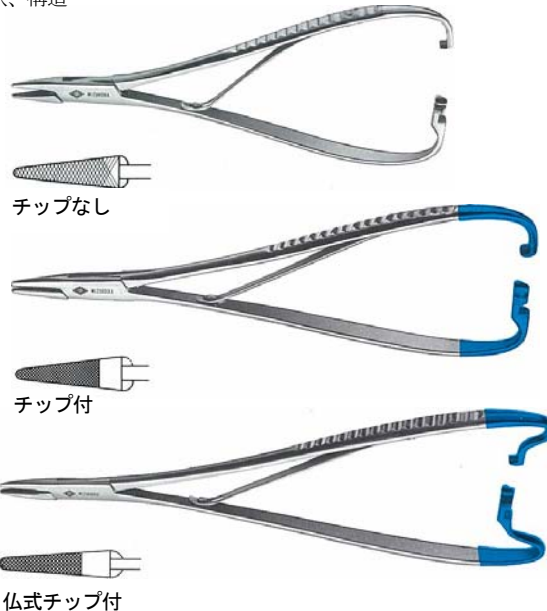

商品コード番号	商品名
06-771-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 16cm
06-772-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 19cm
06-773-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 21cm
06-804-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 16cm
06-805-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 19cm
06-806-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 21cm
06-807-00	マッチュー型持針器チップ付 仏 19.5cm

材質：ステンレス鋼
超硬質工具材料

【使用目的、効能又は効果】

本品は、ハンドルをもつ手術器具をいう。遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状（チップなし・チップ付・仏式チップ付）になっており、縫合時に縫合針を把持するように設計されている。

【品目仕様等】

外観：目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥又は汚染物を認めないこと。

【操作方法、使用方法等】

本品のご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行って下さい。
(保守・点検に関わる事項を参照下さい)

【使用上の注意】

(1) 警告

本品は、標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を施してご使用下さい。

過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わないで下さい。

(2) 相互作用

- ・ 接触凝固での使用禁止

接触凝固等、電気メス先を本品に直接接触させて使用することは、絶対にしないで下さい。感電、火傷の原因になります。

(3) 不具合・有害事象

- ・ 化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品にさらすことは避けて下さい。腐食による損傷の原因となります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管して下さい。
2. 指定した保守点検及び適切な保管をした場合：7年（自己認証）

【保守・点検に係る事項】

1. 動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認して下さい。

2. 直ちに清水で洗浄する

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄して下さい。

3. 洗浄後は直ぐに乾燥する

洗浄後の本品は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けて下さい。

4. 蒸留水や脱イオン水を使用する

洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用下さい。水道水中に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。

5. 水性潤滑防錆剤を使用する

洗浄後は潤滑油も完全に取り除かれています。摺動部があるものについては、かじりの原因となりますのでそのまま摺動部を動かさないで下さい。洗浄後滅菌する前に水性潤滑防錆剤「ミルクテックS」を塗布して下さい。

6. 滅菌

本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行って下さい。

過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わないで下さい。

○標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌(日本薬局方)

滅菌温度	保持時間
115-118℃	30分
121-124℃	15分
126-129℃	10分

○クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又は疑いのある患者に使用した器具の滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌(ガイドライン参照)

滅菌温度	保持時間
134℃	18分

【包装】

本品は1個1包装となっております。

【主要文献及び文献請求先】

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班
プリオン病感染予防ガイドライン(2008年版)

【保証期間に係わる事項】

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場