

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

* 背板ショート

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]


【禁忌・禁止】

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]





【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観図

**

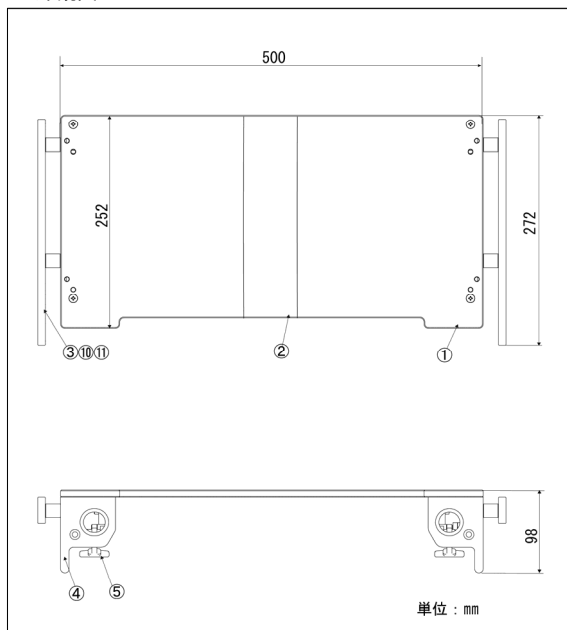

**

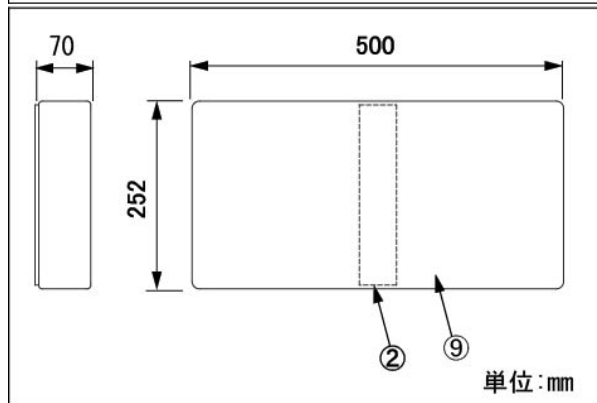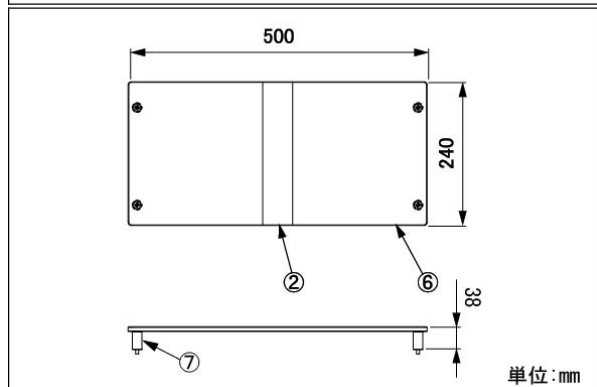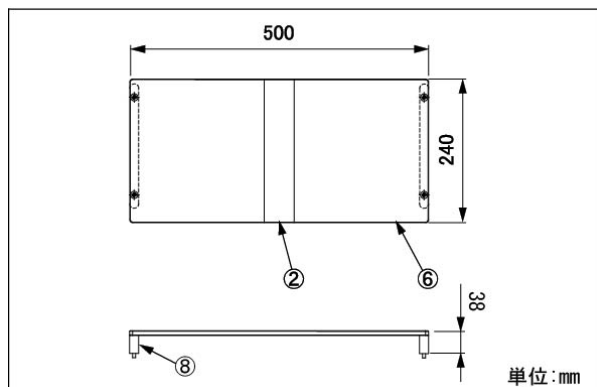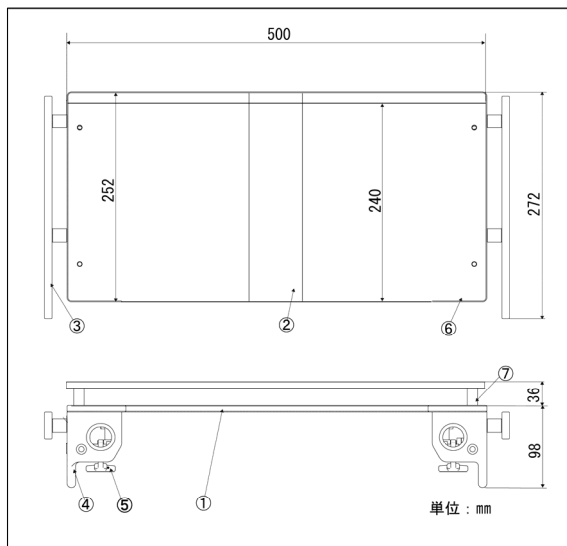

商品コード	商品名	構成	質量
* 08-007-21	背板ショート 本体	①②③④ ⑤	6.0kg
** 08-007-21-R1	背板ショート 本体 (R1)	①②④⑤ ⑩	6.0kg
** 08-007-21-R2	背板ショート 本体 (R2)	①②④⑤ ⑪	6.0kg
* 08-083-43	固定式・デジタル兼用ベーク板 背板ショート用	①	1.4kg
* 08-075-60	MOT-5700用背板ショ ートタイプ カセット固定式	①②③④ ⑤⑥⑦	7.5kg

* 08-083-23	デジタルカセット格納枠 背板ショート用	②⑥⑧	1. 4kg
* 08-083-03	固定式カセット格納枠 背板ショート用	②⑥⑦	1. 4kg
* 08-083-64	ミズホオリジナルマットレス 252mm タイプ	②⑨	0. 5kg

* 2. 質量

上表参照

3. 材質

- ① ボード：熱硬化性樹脂積層板
- * ② 面ファスナー：ナイロン
- ③ サイドレール：ステンレス鋼棒
- ④ フレーム：アルミニウム合金棒
- ⑤ 差込レバー：ステンレス鋼棒
- * ⑥ カセット格納枠：熱硬化性樹脂積層板
- ⑦ カセットカラー：ステンレス鋼棒
- * ⑧ カセット支柱：ポリカーボネート
- * ⑨ マットレス：ウレタンフォーム
- ** ⑩ サイドレール（R 1）：ステンレス鋼棒
- ** ⑪ サイドレール（R 2）：ステンレス鋼棒

注：番号は 1. 外観図の番号に対応


【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。患者の背部を支持するための器具。カセット固定式はカセット使用による X 線撮影が可能。

【使用方法等】


1. 取り付け方

- 1-1 手術台の背板を水平にした状態で、頭部板及び背板を取り外します。

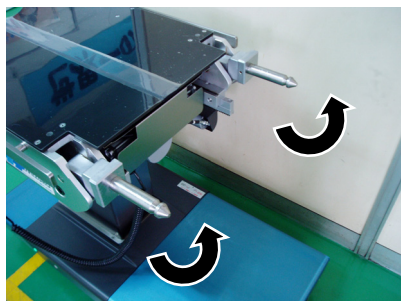

* 頭部板及び背板を取り外した状態(注)

- 1-2 手術台の背板取付ピンを水平にした状態を確認して、背板ショートタイプを差し込みます。

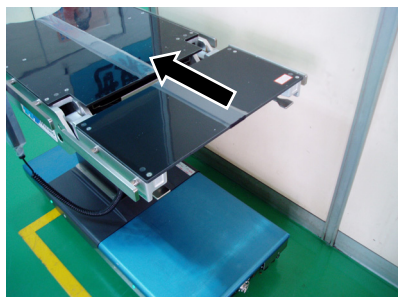

* 背板ショートタイプを取り付けた状態(注)

- 1-3 背板ショートタイプを手前に引き、手術台に完全に差し込まれていることを確認します。

* 注：写真は背板ショート本体

* 2. 使用可能な手術台

当社製手術台

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

- ** ① 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ② 背板ショートタイプが手術台本体に完全に差し込まれていることを必ず確認してください。
- ③ 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

3. 相互作用

[併用注意]

カセット固定式を取り付けて使用するときには他のテーブル板（腰板等）にカセット格納枠を取り付けた状態で使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ** 高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保管をした場合：7 年 [自己認証による]

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚物等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。