

MT-900シリーズ用カフ

【禁忌・禁止】


1. 使用前に外観を確認し、異常がある場合は使用しないこと。
[エア漏れなどで正常な止血ができない可能性があります。]
2. 四肢の止血以外に使用しないこと。[目的外使用となります。]
3. タニケット本体及び関連製品は当社指定のものを使用すること。
[エア漏れなどで正常な止血ができない可能性があります。]
4. 過剰な圧力で使用しないこと。[過剰な圧力で止血は、組織などの損傷の原因となる可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



2. 構造

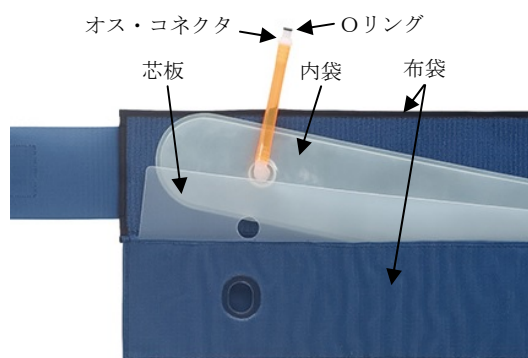

シングルカフ

3. サイズ一覧

単位：mm

商品コード	商品名	外形寸法 (幅×長さ)	適応周径
01-448-01	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.1 50×260mm	50×260	100～140
01-448-02	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.2 50×320mm	50×320	130～190
01-448-03	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.3 80×440mm	80×460	190～260
01-448-04	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.4 80×550mm	80×580	250～360
01-448-05	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.5 80×720mm	80×750	350～490
01-448-06	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.6 105×570mm	105×600	250～350
01-448-07	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.7 105×750mm	105×780	350～500
01-448-08	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.8 105×1050mm	105× 1040	500～700
01-448-09	MT-900 シリーズ用シングルカフ No.9 105×1350mm	105× 1390	700～980
01-448-10	MT-900 シリーズ用ダブルカフ No.10 150×550mm	150×580	250～360
01-448-11	MT-900 シリーズ用ダブルカフ No.11 150×720mm	150×750	350～490
01-448-12	MT-900 シリーズ用ダブルカフ No.12 200×1000mm	200× 1040	500～700
01-448-13	MT-900 シリーズ用ダブルカフ No.13 100×260mm	100×260	100～140
01-448-14	MT-900 シリーズ用ダブルカフ No.14 100×320mm	100×320	130～190

※商品コード：01-448-01、01-448-02、01-448-13、01-448-14 には芯板はありません。

* ※上記カフにはリング (5個) (商品コード：P01-447-20) が付属しております。

4. 作動原理

四肢の中枢端に巻き付けたカフの内袋にタニケット本体から圧縮空気を送り、膨らんだカフの圧力によって血管を圧迫し、止血を行う。芯板は、カフが外側へ膨らむのを防止する。

【使用目的又は効果】

本品は再使用することを目的としたバンド状の用具で、上下肢（腕又は脚）に装着して、循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断し、四肢の手術に際して無血手術野を得るためのものである。加圧を調節する止血器とともに用いる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

1. 患者及び術式に適した長さ・幅のカフを選択します。
2. 上肢・下肢ともその中枢端に、皮下静脈の怒張をきたさぬ程度に密着させて装着します。
3. 専用のカフホースを使用してタニケット本体と接続します。

【使用上の注意】

1. 上肢・下肢ともその中枢端に、皮下静脈の怒張をきたさない程度に密着させて巻き付けてください。巻き付けが強すぎても弱すぎても止血効果を減弱させることがあります。
2. 厚めの下敷きも止血効果を減弱させることがあります。
3. イソジンなどの薬液が付着し、布袋が硬くなったカフの使用は止血不良の原因となります。普段の手入れをお願いします。（保守・点検に係る事項を参照ください）
4. 使用前にカフ、カフホース、タニケット本体の接続を再確認してください。
5. 使用中はチューブ類の折れ曲がりには注意してください。
6. 使用するタニケットの取扱説明書を必ず参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ① 水のかからない場所に保管してください。
- ② 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
- ③ 適応周径を参照して、丸めて保管してください。折り曲げると芯板を破損する恐れがあります。

2. 耐用期間


指定した保守点検及び適切な保管をした場合：2年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】


1. 芯板と内袋の汚れは、消毒用アルコールで拭き取ってください。
内袋の中に水などが入らないように十分に注意してください。
2. 布袋の汚れは、中性洗剤で手洗いし、真水でよくすすいでから乾燥させてください。洗濯機をご使用の際はネットなどに入れてください。また、色落ちすることがありますので注意してください。
3. 手入れが終わったカフは、下図を参考にして正しく組み立ててください。間違った組み立ては、止血不良の原因になります。

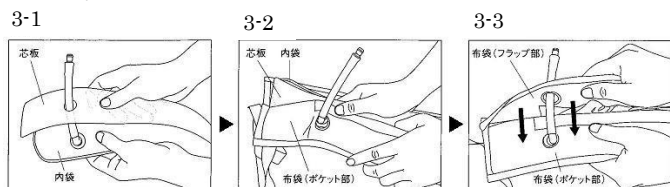

- 3-1 内袋に装着されたホースを芯板の穴に通します。
- 3-2 内袋と芯板を重ね合わせ、布袋の穴にホースを通して、布袋のポケット部に入れます。
- 3-3 布袋のフラップ部（蓋）の穴にホースを通し、フラップ部を閉じます。
4. Oリングの劣化は空気漏れの原因となります。ひび割れなどの劣化がないことを確認してください。

5. ひび割れなどで劣化したOリングは、下図を参考にして交換してください。

小型の（－）ドライバーなど、先端が細く平らな物でOリングを取り外します。新しいOリングを溝に引っ掛け、指で押さえながら他方を引き延ばす感じで広げて取り付けます。怪我などしないよう十分に注意して行ってください。

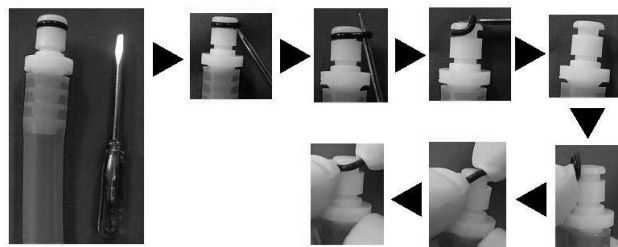

6. カフを滅菌する場合は、エチレンオキサイドガス滅菌による標準的滅菌条件又は医療機関で検証された滅菌条件で行ってください。
高圧蒸気滅菌及び過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL：03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。