

機械器具51 医療用尿管及び体液誘導管  
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

## VBMブロンコスコープバイトブロック

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

30-40-400-1、30-40-420-1、30-40-440-1  
VBMブロンコスコープバイトブロック



本品はブロンコスコープを使用する際に使用するバイトブロックである。

〈原材料〉

エチレン酢酸ビニル共重合体

〈滅菌方法〉

エチレンオキシドガス滅菌


### 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したプラスチック製のチューブをいう。本品は、舌による気流遮断の防止に有用である。

### 【使用方法等】

1. 開口して本品をグデルタイプエアウェイのように口腔内に挿入してください。
2. 側面開放部から通して、ファイバースコープを挿入してください（下図参照）。

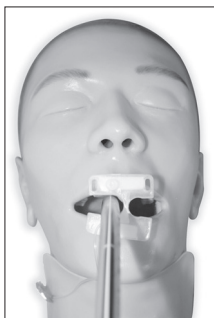

3. ファイバースコープをガイドにし、気管内チューブを挿入してください。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

・水濡れ、高温多湿および直射日光を避けて保管すること。

※※・保管時（運搬時も含む）は、元のパッケージに入れること。

〈有効期間〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※〈製造販売業者〉

**smiths medical**

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※※〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

VBM メディツインテヒニーク GmbH

VBM Medizintechnik GmbH

〈国名〉

ドイツ