

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

VBM SGAバイトブロック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

（併用医療機器）

1) 本品は、LTS-D「販売名：VBMラリンゲルチューブ・ディスボ（認証番号：227AIBZX00021000）」以外と使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】

（形状・構造）

40-66-050 LTS-D用ディスボバイトブロック（サイズ2/2.5用）
ネックテープ付

40-66-060 LTS-D用ディスボバイトブロック（サイズ3/4/5用）
ネックテープ付



（原材料）

No.	名称	原材料
①	バイトブロック	エチレン酢酸ビニル共重合体
②	ネックテープ	ポリアミド系合成繊維

・未滅菌

【使用目的又は効果】

（使用目的）


短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したプラスチック製のチューブをいう。

※【使用方法等】

1. ラリンゲルチューブの添付文書に従いチューブを挿管し、換気が行えることを確認した後、本品を下図のようにセットします。



2. ネックテープを下図のようにチューブに巻いてフックにかけることによってチューブを固定します。

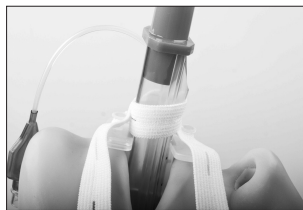

（使用方法等に関連する使用上の注意）

- 1) 使用前に本品に損傷及び遊離した粒子がないことを確認すること。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。

（その他の注意）

- 1) 本品は訓練を受けた専門の医療従事者のみが使用すること。

※2) 本品を再処理すると機能が損われる。また再使用すると交差感染の恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿および直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

※・保管時（運搬時も含む）は、元のパッケージに入れること。

（有効期間）

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※（製造販売業者）

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

（製造業者）

VBM メディツインテヒニーク GmbH

VBM Medizintechnik GmbH

（国名）

ドイツ

** (被包に記載されているシンボルの説明)

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	添付文書参照
Clean Packed	クリーンパック
	未滅菌
	製造業者
	有効期間
LOT	ロット番号
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
CE	CEマーク
Rx ONLY	連邦法（U.S.A.）によって、本品は、医師または医師の指示がある場合にのみ販売することが義務付けられています