

ジェルコ セーフティホルダ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

- 1) 留置しているカテーテル又はラインから真空採血のために本品を直接取り付けないこと。

【形状・構造及び原理等】

＊ ＊ 〈形状・構造〉

96002	ジェルコ	セーフティホルダ	タイプF	ロング
96002S	ジェルコ	セーフティホルダ	タイプF	ショート
96005	ジェルコ	セーフティホルダ	タイプB	



96002 96002S 96005

＊ ＊ 〈原材料〉

名 称	原 材 料
セーフティホルダ本体	ポリプロピレン
真空採血管アダプタ	ポリプロピレン
メスルアアダプタ	ポリ塩化ビニル
ゴムスリーブ	イソブレンゴム
カニューレ	ステンレス鋼（シリコーン油）

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）を使用しています。


〈滅菌方法〉

エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】


〈使用目的〉

本品は、血液培養ボトル又は真空採血管と注射筒の筒先を接続し、血液検体を分注する機器である。

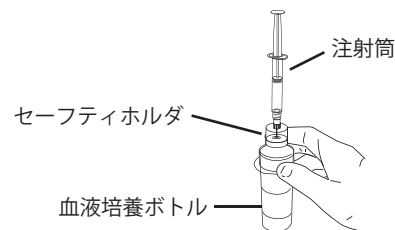

〈真空採血管を使用する場合〉

1. 院内指針に従って採血した後、注射筒の筒先をホルダのメスルアアダプタに接続します。
2. 採血管をホルダ内部に挿入し、穿通するよう押し込むと血液が採血管に流入します。このとき、注射筒のプランジヤを押して注入しないでください。必要に応じて追加の採血管へ分注してください。
3. 適正量の血液が採血管に移動したら、注射筒を付けたまま本品を採血管から取り外します。このとき、注射筒だけを持つと、本品から外れることがあるので注意してください。
4. 使用後は、注射筒を本品につけたまま耐貫通性廃棄容器に廃棄します。

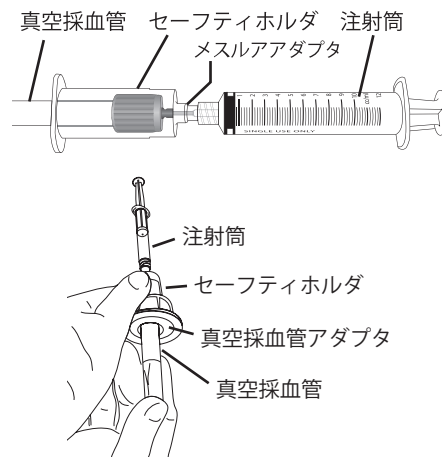

＊ ＊ 【使用方法等】

無菌操作で行うこと。

〈血液培養ボトルを使用する場合〉

1. 院内指針に従って採血した後、注射筒の筒先をホルダのメスルアアダプタに接続します。
2. 血液培養ボトルは、セプタム（検体刺入部位）を上にして平らな場所に置きます。
3. 本品に真空管採血アダプタが付属している場合は、取り外します。
4. 注射筒を本品のメスルアアダプタに接続した状態で、ホルダを血液培養ボトルの上に真っ直ぐかぶせ、穿通するよう押し込みます。注入している間はボトルにホルダを押さえつけたまま保持します。血液がボトルに自然と流入します。このとき、注射筒のプランジヤを押して注入しないでください。
5. 適正量の血液がボトルに移動したら、注射筒を付けたまま本品をボトルから取り外します。このとき、注射筒だけを持つと、本品から外れることがあるので注意してください。
6. 使用後は、注射筒を本品につけたまま耐貫通性廃棄容器に廃棄します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) 本品は、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジイソノニルが溶出する恐れがあるので注意すること。
- ＊ ＊ 3) 針付注射筒で血液培養ボトル又は真空採血管に検体を直接注入することは推奨しない [陽圧が生じ検体が飛散する可能性があるため]。
- 4) カニューレが中心にあり、曲がっていないことを確認すること。

〈その他の注意〉

- ＊ ＊ 1) 本品を正しく取り扱うこと [機器の誤使用は、血液への暴露、針刺しによる感染症の原因となるため]。
- ＊ ＊ 2) 真空採血管用のアダプタが不要な場合は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国