

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000
ビジテック サージカルスポンジ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・滅菌包装が破損していた場合あるいは開封されていた場合は、使用しないこと。

- ・使用中にスポンジが外れた場合や本品が破損した場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- ・本品は 1 回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしないこと。また、未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
- ・使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

**【形状・構造及び原理等】

本品にはスポンジ（材質：セルロース、パルプ、ポリビニルアルコール（PVA）と柄からなるサージカルスポンジ 槍型及び LASIK サージカルスポンジ、ビスコース製スポンジのサージカルスポンジ スティック型がある。本品は滅菌済みである。

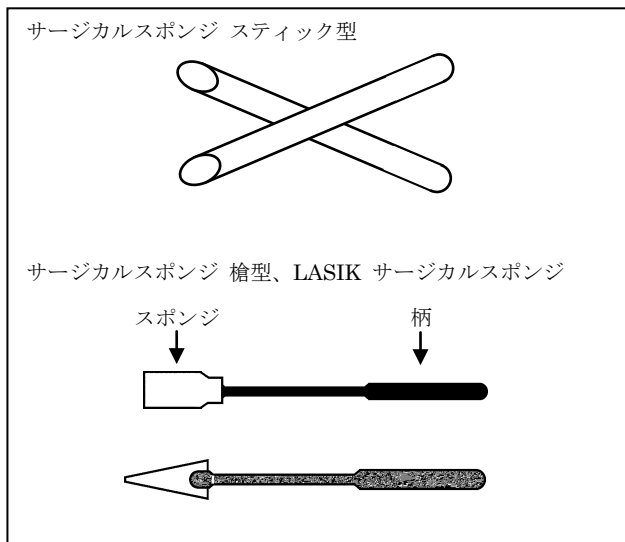

**【使用目的、効能又は効果】

手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。

【操作方法又は使用方法等】

本品は、眼科手術時等において本品のスポンジを用いて施術部および施術部周辺の余分な水分を吸収する。また、LASIK サージカルスポンジはスポンジによりフラップの位置を調整する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・医師の監視指導下でのみ使用すること。
- ・使用目的〔手術・処置などの医療行為〕以外の目的で使用しないこと。
- ・併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- ・滅菌包装が破損・汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用前に滅菌包装に記載されている使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・LASIK サージカルスポンジを使用時、スポンジが乾燥した状態で、角膜に直接使用しないこと。
- ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。〕

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

〈使用期限〉

外箱及び包装に記載

**【包装】

- * 2 本/袋 (LASIK サージカルスポンジ 膨張型)
- * 5 本/袋 (サージカルスポンジ 槍型)
- * 10 本/袋 (サージカルスポンジ スティック型)
- * 10 本/袋 (LASIK サージカルスポンジ 槍型)
- 40 本/箱 (LASIK サージカルスポンジ 膨張型)
- 100 本/箱 (LASIK サージカルスポンジ 槍型)
- 100 本/箱 (サージカルスポンジ 槍型)
- 250 本/箱 (サージカルスポンジ スティック型)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目 13 番 9 号
Tel：03-5651-2861

外国製造業者：

ビーバービジテック インターナショナル インク
(Beaver-Visitec International, Inc.)
国名：米国

*メドソーブ ドミニカナ、エス、エイ
(Medsorb Dominicana, S.A.)
国名：ドミニカ共和国