

機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN：70965001）
MISインプラント外科用インスツルメント

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

次の患者には使用しないこと。

- ・ 本品の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

<併用医療機器>

- ・ 当社が指定する製品以外には使用しないこと。（[相互作用] の項参照）

<使用方法>


- ・ 本品の形態変更や改造等はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は単品又はキットの一部として流通される。

【構成品】

ボディ トライ イン

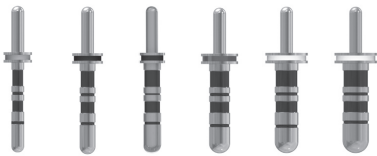

2.4mm/2.8mm/3.2mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm

ラチェット アダプター NP ロング



インサージョンツール ラチェット用



ロング




ショート

インプラント除去 キー




ロング

スクリュー部 本体

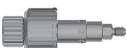

ショート

パラレルピン

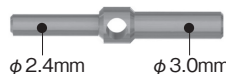

φ2.4mm

φ3.0mm

ラチェットレンチ




シャフト

サージカル トルクレンチ (35 ～ 70Ncm)



シャフト

インプラント デプスプローブ

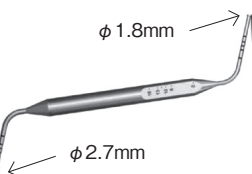

φ1.8mm

φ2.7mm

【原材料】

チタン合金 (Ti-6Al-4V)：ボディトライイン、ラチェットレンチ及びサージカルトルクレンチ（シャフト）

ステンレス鋼：上記以外

（体に接触する部分の組成：鉄、クロム、モリブデン、マンガン、ケイ素、ニッケル、炭素、リン、硫黄）

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な手動式の器具である。

【使用方法等】

- （1）本品は末滅菌品のため、使用前に洗浄と滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌 温度：135℃ 時間：10 分間
- （2）インプラント窩の形成時には埋入するインプラントフィクスチャの深さまでパラレルピン、ボディトライイン、インプラントデプスプローブ等で方向及び深さを確認しながら行う。
- （3）インプラント埋入時にはインサージョンツールラチェット用を使用し、ラチェットレンチ又は手指で仮埋入を行う。最後にサージカルトルクレンチに付け替えて推奨トルク値（35 ～ 60Ncm）にて埋入を行う。
- （4）ナローインプラント埋入後、必要に応じてラチェットアダプター NP ロングを使用し深度調整を行う。
- （5）埋入後にインプラントフィクスチャの除去を行う場合は、インプラント除去キーのスクリュー部をフィクスチャ内部のスクリュー部にねじ込み、次に本体をラチェットレンチ又は手指で反時計回り方向に回してフィクスチャの除去を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 本品は MIS インプラント SEVEN 以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 1. 滅菌中、温度が 135℃を超えないように注意すること。
 2. 乾熱滅菌は高温になり劣化・変色の原因になるので使用しないこと。
- 2) [相互作用]（他の医療機器との併用に関すること）
[併用禁忌・禁止]（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本品は、当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

- （1）直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- （2）歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- （3）血液が付着した場合、使用後に直ちに拭き取るか、防錆殺菌液入りのシャーレ等に入れること。[血液が凝固すると錆びや汚染を引き起こすおそれがある。]
- （4）超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用しないこと。
- （5）洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、また一本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分注意すること。
- （6）洗浄液使用後は十分水洗いし、洗浄後の乾燥は十分に行うこと。また、洗浄後は極力素手で扱わないようにすること。
- （7）本品は、使用方法、環境により錆びることがあるので、洗浄、乾燥、保管には十分注意すること。
- （8）「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。

と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

デンツプライシロナ株式会社

製造業者

MIS Implants Technologies Ltd.（イスラエル）