

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

デンツプライ洗浄針


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 発疹、皮膚炎などの過敏症既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

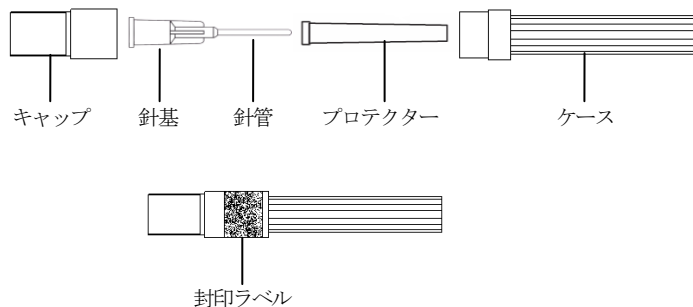

2. 寸法

針管形状	針管外径 (mm)	針管長さ (mm)	針基の色	封印ラベル の色
2 穴タイプ	0.6	25	ブルー	グリーン
	0.5		オレンジ	イエロー
	0.4		グレー	ブラック
	0.3		イエロー	ブルー

針管の材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去、吸引等に用いる器具である。

【使用方法等】

1. ケースとキャップをお互い逆方向にねじり封印ラベルを破ります。
2. ケース、キャップを真っ直ぐ取り外し、そのままの状態では針基をシリンジに装着します。
3. 洗浄針に残ったプロテクターを真っ直ぐ取り外します。
4. 根管、歯周ポケットの洗浄を行います。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 封印ラベルを必ずお互い逆方向にねじり破って、ケース、キャップ、プロテクターを真っ直ぐ外すこと。〔折るようにケース、キャップ、プロテクターを取り外すと、洗浄針がケースから外れて落ちたり曲がる恐れがある。〕
2. 洗浄液が針管から注出できることを確認後使用すること。そうでない場合は使用を中止すること。〔本品をシリンジに装着する際に、異物により詰まったりする場合がある。〕

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は歯科用のみに使用すること。
2. 有効期間が過ぎたものは使用しないこと。
3. 封印ラベルと針基の色が異なるため、注意して使用すること。
4. 使用前、封印ラベルが完全に破れていたり、ケース、キャップ、プロテクターが破損しているものは使用しないこと。
5. 本品は滅菌済みのため、使用直前に封印ラベルを開封しシリンジに装着すること。
6. 針管と針基の固定部に接着剤が付いていないもの、又は異常が認められるものは使用しないこと。
7. 針管には直接手を触れないこと。
8. 針管を繰り返し折り曲げて使用すると、針管が破折する恐れがあるので充分注意すること。

9. 使用時及び使用後リキャップする場合は、取り扱いには十分注意すること。
10. 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
11. 使用後の針は、感染性医療廃棄物に該当するので、定められた方法で廃棄すること。未使用品を廃棄する場合も同様に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 直射日光及び高温多湿を避けて、保管すること。
2. 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は、包装に記載されている有効期間までに使用すること。
(記載の有効期間は、製造業者データによる。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 韓国
製造業者 シーケーデンタル社
C-K DENTAL IND.CO.,LTD

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123