

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器(12304020)
Luzzani シリンジ


【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

ミニブライト・ストレートタイプ



ミニブライト・アングルタイプ

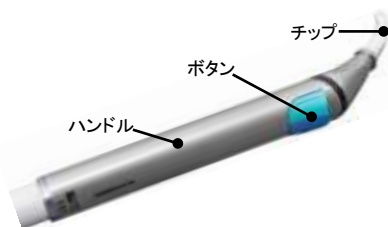

ミニライト・ストレートタイプ



ミニライト・アングルタイプ



原材料: ステンレス鋼、PEEK 樹脂、シリコンラバー

2. 原理

本品は、接続した能動型医療機器から供給された水及びエアを、チップから噴出する。

【使用目的又は効果】

本品は能動型医療機器に接続し、口腔内の洗浄及び乾燥、異物除去などに用いる。

【使用方法等】

1. 患者ごとにハンドル、ヘッド(ミニライトのみ)、チップをオートクレーブで滅菌(135℃、3 分以上)する。その他の表面は柔らかい布にマイルドの洗剤などで湿らせ、軽く拭き取る。
2. ボディ、ハンドル、ヘッド(ミニライトのみ)、チップを組み立てる。
3. ボタンを押して、エア、水、スプレーを噴出し、洗浄や乾燥、異物除去を行う。冷/温を切り替えることができるタイプは、根元を回すことで切り替えることができる。ミニブライトは、根元を回して LED ライトを点灯/消灯することができる。
4. 使用後は、表面を柔らかい布にマイルド洗剤などで湿らせ、軽く拭き取る。

【使用上の注意】

1. 能動型医療機器などの接続は確実に行うこと。不用意に外れ、人体に接触する恐れがある。
2. 患者ごとにハンドル、ヘッド、チップは滅菌をすること。感染症の恐れがある。
3. 供給する空気圧及び水圧は適宜確認すること。破損、損傷の恐れがある。
4. 衝撃、振動を与えないこと。破損の恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・温度: -5～60℃
 - ・相対湿度: 5～95%(結露がないこと)
 - ・大気圧: 700～1060hPa
2. 日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより、悪影響の生じる恐れがない場所に保管すること。
3. 振動や衝撃などの加わらない場所に保管すること。
4. 使用耐用期間
 - ・設置引渡し後 7 年(自己認証による)。
 - 但し、指定の保守・点検を実施した場合。

【保守・点検に係る事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検をおこなうこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

*

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社メディサイエンスプランニング
TEL: 03-5544-8152

製造業者: ルッツアーニ デンタル(イタリア)
LUZZANI DENTAL S.R.L.

お問い合わせ先:

Planmeca Japan 株式会社

住所: 東京都中央区日本橋室町二丁目 3 番 1 号
室町古河三井ビルディング 16 階

TEL: 03-6665-0095

FAX: 03-6665-0096