

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 睡眠評価用センサ 70075000

体位センサ

*【禁忌・禁止】

- ・本電極は未滅菌品のため被検者の衣服の上、又は生体の皮膚表面以外で使用しないこと。

<併用禁忌>

- ・高気圧酸素治療装置内での使用
- ・可燃性麻酔ガスあるいは高濃度酸素の雰囲気内での使用
- ・磁気共鳴画像診断装置 (MR I) との併用

【形状、構造及び原理等】


*1. 概要

本品は睡眠評価装置や脳波計等に接続して、被検者の体位を測定するセンサです。被検者の衣服の上または体表面に装着して、加速度センサにて体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力します。

2. 外観



3. 形状及び寸法

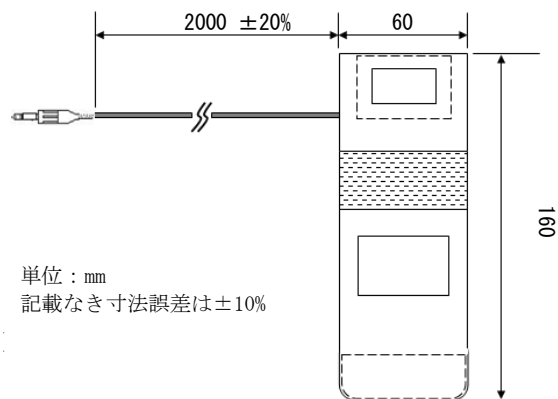

単位: mm

記載なき寸法誤差は±10%

*4. 作動原理

本品には 3 軸の加速度センサが内蔵されており、被検者に装着することにより、各軸に発生した電位により体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力します。

5. 品番

No.	品 名	品 番
1	体位センサ	AP-C033

*【使用目的又は効果】

<使用目的>

本体位センサは、被検者の衣服の上または体表面に装着し、加速度センサを用いた方式で体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力するものです。

*【使用方法等】

使用する前に必ず使用上の注意を読んでください。

本製品は、未滅菌品です。

1. 電池ホルダにコイン電池 CR2032 を挿入します。
2. センサ部を胸腹部用呼吸ピックアップのベルト等に巻き付け、面ファスナーにて固定します。取り付け向きはラベルが表に、矢印の方向に頭部が来るようしてください。
3. コネクタブラグを睡眠評価装置又は脳波計のセンサ入力端子に接続します。体位に応じた電圧を出力します。
4. 使用後は電池を取り外してください。
※電池は中央のタブを指またはペン先等で押すと、取り外せます。



*本品と組み合わせて使用可能な医療機器には以下の承認機器又は認証品があります。

販売名	承認・認証番号	製造販売業者
携帯型多用途生体アンプ ホリマイト AP1000 シリーズ	21300BZZ00509000	(株) ミユキ技研
ホリマイト II	22100BZX00459000	(株) ミユキ技研
脳波計 EEG-9100 ニューロファックス μ	21300BZZ00024000	日本光電工業 (株)
脳波計 EEG-9200 ニューロファックス	21400BZZ000257000	日本光電工業 (株)
脳波計 EEG-1200シリーズ ニューロファックス	218AHBZX00013000	日本光電工業 (株)
脳波計 EEG-1250 ニューロファックス	224ADBZX00090000	日本光電工業 (株)
睡眠ホリマイトラフィ装置 PSG-1100	223ADBZX00130000	日本光電工業 (株)
携帯用睡眠時無呼吸検査装置 SAS-3200	223ADBZX00122000	日本光電工業 (株)

【使用上の注意】

1. 取扱いの注意

- ・本品を折り曲げたり、衝撃を与えないでください。
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないでください。
- ・コネクタブラグは測定装置の入力端子にしっかり接続してください。
- ・しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本器が正常かつ安全に作動することを確認してください。

2. 使用後の清掃

- ・本品を水などに浸けたり、洗い流したりすることは絶対に避けてください。
- ・コネクタに水が掛からないように注意してください。
- ・本品を清掃するときは、センサ部に水や消毒剤などの液体が付着しないように注意して、ケーブルやコネクタブラグは強く絞った酒精綿などで拭き取ってください。

***【保管方法および有効期間】**

1. 保管方法

- ・水分、気圧、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの影響を受ける恐れのない場所に保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 有効期間

- ・電池寿命： 約 385 時間（使用時間）

【主要文献及び文献請求先】

名称：株式会社ミュキ技研 営業本部

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 18 番 14 号

本郷ダイヤビル 6 F

TEL：03-3818-8631 FAX：03-3818-8632

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

名称：株式会社ミュキ技研

TEL：03-3818-8631 FAX：03-3818-8632

製造業者：株式会社ミュキ技研