

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 睡眠評価用センサ 70075000

体位センサⅡ

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器

- (1) 高気圧酸素治療装置内での使用[爆発または火災を起こすことがある。]
- (2) 磁気共鳴画像診断装置（MR I）との併用[誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがある。]
- (3) 可燃性麻酔ガスあるいは高濃度酸素の雰囲気内での使用[爆発または火災を起こすことがある。]

【形状、構造及び原理等】


1. 概要

本体位センサは、当社製の多用途測定記録装置等と接続し、被検者の衣服の上または体表面に装着し、加速度センサで体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力するセンサである。

2. 外観



3. 形状及び寸法

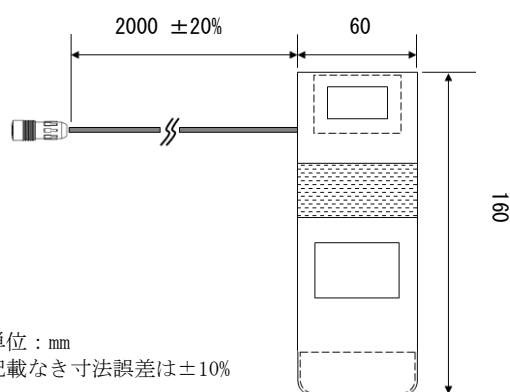

4. 作動原理

被検者の衣服の上または体表面に装着し、加速度センサを用いた方式で体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力します。

5. 品番

No.	品 名	品 番
1	体位センサⅡ	MP-C033

【使用目的又は効果】

本体位センサは、被検者の衣服の上または体表面に装着し、加速度センサを用いた方式で体位を感知し、それぞれの体位に応じた電位を出力するものである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 電池ホルダにボタン型電池 CR2032 を挿入します。
- (2) 布袋を胸腹部用呼吸ビックアップのベルトに巻き付け、面ファスナで固定します。ラベルが表に、矢印の方向に頭部が来るようにして被検者に装着します。
- (3) プラグを多用途測定記録装置等に接続します。

2. 使用

- (1) 多用途測定記録装置等の電源を ON にし、体位に応じた電圧を測定します。
- (2) 測定を終了するときは装置の電源を OFF にし、装置から外します。
- (3) 被検者から本センサを外します。

3. 使用後

- ・使用後は電池を取り外してください。

※電池は中央のタブを指またはペン先等で押すと、取り外せます。



【使用上の注意】

1. 取扱いの注意

- ・本品を折り曲げたり、衝撃を与えないでください。
- ・本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないでください。
- ・コネクタプラグは測定装置の入力端子にしっかり接続してください。
- ・本品を装置から外す時は、コネクタ部を持って静かに引き抜き、リード線を強く引っ張らないでください。
- ・しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本器が正常かつ安全に作動することを確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 水分、気圧、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの影響を受ける恐れのない場所に保管してください。
- (2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

2. 有効期間

- ・電池寿命：約 385 時間（使用時間）

【保守点検に係る事項】

1. 清掃

- ・本品を清掃するときは、布袋に水や消毒剤などの液体が付着しないように注意し、ケーブル・プラグは強く絞った酒精綿などで拭き取ること。
- ・本品を水などに浸けたり、洗い流したりすることは絶対に避けること。
- ・プラグ部は水が掛からないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社ミュキ技研

TEL：03-3818-8631 FAX：03-3818-8632

製造業者

名称：株式会社ミュキ技研