


一般医療機器

機械器具(58) 整形用機械器具
歯科用インプラント手術器具 JMDN コード：70965001

B E C S 用ドライバー

【形状・構造及び原理等】

○材質：ステンレス鋼

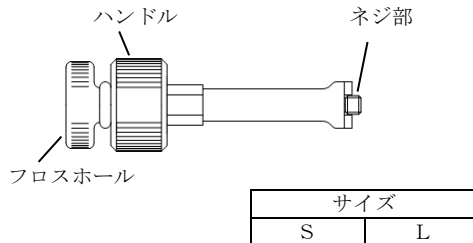

【原理等】

ハンドル部を手指で回転し、ネジ部に取り付けたカバースクリューをインプラント体に装着する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。各種ネジの締め付けに使用する。尚、本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- (1) 本品のフロスホールにフロスを通し、術者が保持する。
- (2) 本品のネジ部にカバースクリューを取り付け、インプラント体に装着する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 本品は BECS 以外には使用しないこと。BECS の締結以外で使用了場合、安全性の保障はできません。
- (3) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (4) 使用後は感染予防のため、使用・未使用に関わらず直ちに滅菌消毒を行うこと。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行ない、次回からの使用時にも同様に行動すること。
オートクレーブ可 121℃20分間
- (2) 滅菌後は汚染に注意し、手指・未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- (3) 錆や変色のおそれがあるため、長時間生理食塩水に浸漬しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 湿度が低く、清潔清潔な場所に保管すること。
- (2) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品の消毒用薬液は、防錆効果のある次のものを推奨する。その際、使用法は各薬液の指示に従うこと。
 - ・グルタラル製剤（例：ハイドリッド）
 - ・グルコン酸クロルヘキシジン（例：ヒビテン）
 - ・界面活性剤系薬液（例：塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液）
- (2) 次の成分を含む消毒用薬液は使用しないこと。
 - ・塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウム等）
 - ・過酸化水素系薬液（オキシドール等）
 - ・強酸性水
- (3) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。

- (4) オートクレーブ滅菌の場合、機種・条件によっては滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、滅菌バッグと本品とが直接接していると錆が発生する原因となるので、滅菌ケースなどを用いて本品と滅菌バッグとが直接接触しないようにして滅菌すること。
- (5) 錆びた製品は、汚染を引き起こす可能性があるため、錆びていない製品と一緒に滅菌しないこと。
- (6) 滅菌後は、錆がないか点検し、錆が認められた場合には、新しいものと交換すること。
- (7) 錆びる恐れがあるため次のことについて留意すること。
 - ・血液・骨が凝固付着したまま乾燥させないこと。
 - ・最終洗浄は精製水を使用すること。
 - ・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
 - ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
 - ・オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。
- (8) 本製品使用後は、すぐに消毒用薬液（上記(1)、(2)参照）又は消毒効果及び防錆効果のある洗浄液に浸せきし、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、付着物を完全に除去すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 販売業者

和田精密歯研株式会社

〒532-0002 大阪市淀川区東三国1-12-15

TEL：06-4807-6700

FAX：06-4807-6788