

類別 : 機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器 : 直像検眼鏡 JMDN12817000

ナイツハロゲン検眼鏡 BX α -RC

【警告】

被検者の眼底に照射する光量および時間はともに必要最低限とし、照射時間は片眼 1 分を超えないこと。[最大光量で長時間の照射を続けると、網膜に障害が起こる可能性があるため。]

【禁忌・禁止】


- (1) 本器を滅菌しないこと。[変形や故障する可能性があるため。]
- (2) 高酸素濃度雰囲気および引火ガス、粉塵のそばで使用しないこと。[引火、爆発の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本器は、以下の構成からなり、補充用として単品で供給する場合もある。(6)～(9)については、別売附属品となる。

- (1) ハロゲン検眼鏡 BX α (以下、本体) 1
- (2) 充電柄 (以下、電源ハンドル) 1
- (3) 充電電池 1000RS (以下、充電電池) 1
- (4) 予備球 L-29 1
- (5) ハードケース 1
- (6) 2 連卓上型充電器 RC-II (以下、充電器) 1
- (7) AC アダプタ 1
- (8) AC コード 1
- (9) ビニールカバー 1

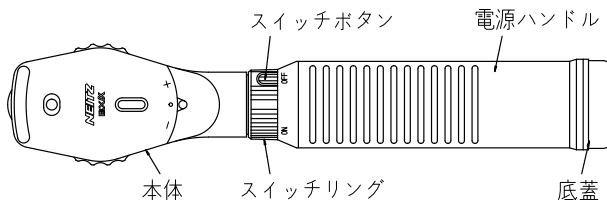

< 寸法・質量 > : $\phi 32 \times 223\text{mm}$ (突起含まず)
: 330g (電池含む)

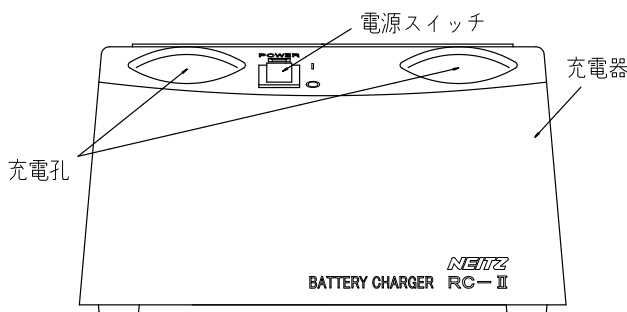

< 充電器寸法・質量 > : $180 \times 80 \times 100\text{mm}$ (突起含まず)
: 850g

2. 構造

本体および電源ハンドルは着脱できる構造になっており、以下の製品に取り付け可能な複数の電源ハンドルと互換性がある。

- (1) 販売名 : 咽喉鏡
届出番号 : 13B2X00131107518

- (2) 販売名 : ナイツストリークレチノスコープ RX
届出番号 : 13B2X00131108941
- (3) 販売名 : ナイツスポットレチノスコープ RX-SP
届出番号 : 13B2X00131109111
- (4) 販売名 : ファイバー耳鼻鏡ヘッド F0-H (アダプタ付き)
届出番号 : 13B2X00131122003

3. 仕様

- (1) 電球光源 : L-29 (ハロゲン電球 : 4V、2.5W)
- (2) 補正レンズ : $-36\text{D} \sim +35\text{D}$ (1D ステップ)
- (3) 照明系フィルタ : フィルタなし (素通し) / 偏光 / 4000K
- (4) 観察系フィルタ : 偏光 ON/OFF 切り替え
- (5) 目盛ディスク : 普通検査孔 / 小孔 / スリット / 固視標 / 無赤フィルタ
- (6) 使用電池 : 充電電池 1000RS 1 本
- (7) 連続点灯時間 : 80 分
- (8) 充電時間 : 15 時間
- (9) 商用電源からの入力 : AC100-240V / 50-60Hz (充電器)
- * (10) EMC 適合規格 : JIS T 0601-1-2 : 2018
- (11) 動作保証条件 : 温度 $10 \sim 35^{\circ}\text{C}$
: 湿度 $30 \sim 90\%$ (結露なきこと)

※ 充電機にかかわる仕様は全て充電電池が新品時の数値を記載。

4. 作動・動作原理

本器電球光源の電源は、専用充電器によって充電した電源ハンドルから供給される。電球光源からの光は、集光レンズ・対物レンズにより照明光となり、さらに反射鏡により前面の被検眼に照射される。検者は被検眼瞳孔から光を投入し、被検眼の間際まで接近することにより眼底観察が可能となる。

【使用目的又は効果】

眼球内部の検査に用いる手持型の機器で、眼球内部を照明することで明るく且つ拡大された正像が得られる。

【使用方法等】

専用充電器によって電源ハンドルを充電し、スイッチボタンを押しながらスイッチリングを回すことで電球が点灯する。必要に応じ、照野径や明るさの調節、補正レンズ・フィルタの切り替え等ができる。

※ 詳細については、附属の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

< 重要な基本的注意 >

- (1) 使用する電池は専用の充電電池のみとし、その他の電池・充電電池などは使用しないこと。[点灯時間が短くなるなど、本来の性能が発揮されなくなるため。]
- (2) 充電をする際は、照明が消灯していることを必ず確認すること。[充電ができない・熱を帯び火傷する可能性があるため。]
- (3) 前述した他の異なるタイプの電源ハンドルと組み合わせて使用する場合は、電球および電源ハンドルの定格が合うように組み合わせること。[製品仕様を満たさない、あるいは故障の原因となるため。]
- (4) 照明を点灯させたまま放置したり、袋や布を被せるなど放熱を妨げるような使用をしないこと。[内部が高温にな

取扱説明書を必ず参照してください。

- り、故障や火災、火傷する可能性があるため。]
- (5) 消灯直後の電球は高温のため素手では触らないこと。また、電球交換の際は消灯後、温度が下がってから実施すること。
[火傷の原因となるため。]

【保管方法及び有効期間等】

＜ 保管方法 ＞

- (1) 保管時温度：-10～55℃
- (2) 保管時湿度：10～95%（結露なきこと）
- (3) 使用後は、防塵のためダストシャッターを閉めること。

＜ 耐用期間 ＞

本器の耐用期間は、附属の取扱説明書に基づく使用で8年間とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係わる事項】

＜ 清拭・消毒の方法 ＞

本器が汚れた場合、取扱説明書に記載の手順にしたがって清拭や消毒をすること。

＜ 使用者による保守点検事項 ＞

- (1) 充電を繰り返すと充電電池の劣化が進み、点灯時間が短くなるなど製品仕様を満たさなくなるため、その際は充電電池の交換が必要となる。その際は、底蓋を着脱し電池交換をすること。使用期間2年ごとの交換を推奨する。
- (2) 点灯しない場合、フィラメントが切れた可能性があるため確認をし、切れていた際には新しい電球に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：株式会社ナイツ