

機械器具（76）医療用吸入器
非加熱式ネブライザ 35457000 一般医療機器

e s コンプレッサーネブライザ CN160NR

【警告】

1. 本品を使用する際は必ず医師の指導に従うこと。
2. 薬液の種類、用量、用法については、必ず医師の指導に従うこと。〔症状悪化の恐れがある〕
3. ネブライザキット、マウスピース、マスクは、使用後に必ず洗浄・消毒すること。洗浄・消毒後は、速やかに乾燥させ、汚染を防ぐこと。〔雑菌の繁殖、感染の恐れがある〕
4. 本品を複数の患者が共有する場合は、必ず使用する患者ごとにネブライザキット、マウスピース、マスクを使用すること。〔感染の恐れがある〕

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造しないこと。
2. 自動呼吸装置に本品を接続しないこと。
3. 薬液消毒は行わないこと。
4. 次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液で消毒しないこと。〔錆びの原因となる〕
5. 専用ACアダプタ以外は使用しないこと。〔火災、感電の原因となる〕
6. 水の吸入はしないこと。〔症状悪化の恐れがある〕


【形状・構造及び原理等】

本品は、コンプレッサーにより発生した圧縮空気が、ネブライザキット内の薬液と混ざり合いバッフルに衝突することで細かい霧となって外部に噴出させる装置である。

本品は、器械本体、ネブライザキット、マウスピース、マスク等で構成されている。

1. 形状及び寸法

形状

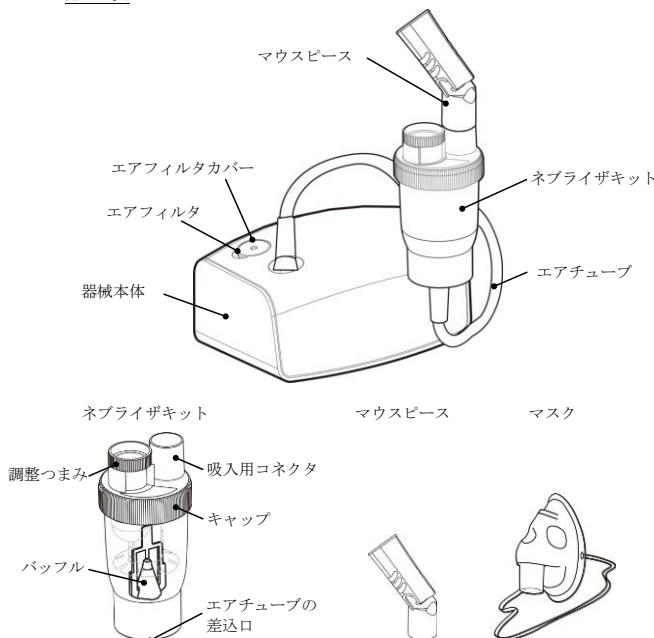

寸法：器械本体 135mm×54mm×88mm

重量：286.5 g（器械本体のみ）

2. 原材料

マウスピース：ポリプロピレン

3. 電氣的定格

機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B F形装着部

定格電圧

DC12V

消費電力：約12W

専用ACアダプタ：AC100-240V、50/60Hz

本品は、IEC60601-1-2のEMDに適合しています。※※

4. IP規格・防水保護構造及び保護等級
水及び微粒子状物質の有害な浸入に対する保護の程度：IP21

【使用目的又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した医薬品を供給する装置をいう。エアロゾルを発生させる空気源、医薬品のリザーバ、コンプレッサー等から構成される。（本装置は呼吸器疾患の吸入療法に使用することを目的とする）

【使用方法等】

1. 薬液の入れ方

- 1) ネブライザキットからキャップを取り外し、バッフルが正しく接続されていることを確認する。
- 2) ネブライザキットに薬液を入れる。適正薬液量は、約2～5 mLです。
- 3) キャップをネブライザキットに取り付ける。固定されたことを確認する。固定されていない場合、薬液漏れが発生します。
 - ・正しく接続していれば、バッフルが薬液ボトルの底にあるノズル部に被ります。

2. 構成品の取り付け方

- 1) 器械本体のエアコネクタにエアチューブを取り付ける。
- 2) ネブライザキットの差込口にエアチューブを取り付ける。
 - ・薬液がこぼれるため、ネブライザキットを横にしないでください。
 - ・使用中に抜けないように、しっかりと取り付けてください。
- 3) マウスピースまたは、マスクを吸入用コネクタに取り付ける。

3. 作動方法

- ・電源スイッチをオンの位置（一）に押すと、作動する。
- ・電源スイッチをオフの位置（〇）に押すと、停止する。

4. 吸入方法

- 1) 吸入量の調整は、ネブライザキットの調整つまみを回すことで吸入量を調整できます。
- 2) ネブライザキットを45度以上傾けないでください。
- 3) 1回のご使用は20分以内とし、次のご使用まで30分以上間隔を開けてください。
 - ・エアフィルタカバーを塞がないでください。

【使用上の注意】

1. 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。
2. ネブライザキット内に薬液が入っていない状態で電源を入れないこと。
3. 器械本体、専用ACアダプタの水濡れに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 温度：-20～60℃、湿度：90%以下の場所で保管してください。※※
2. 直射日光のあたる場所には置かないでください。

【保守・点検に係る事項】

1. 初めて使うとき、使用前、長時間使用しなかったときは、ネブライザキット、マウスピース、マスクを洗浄・消毒すること。
2. ネブライザキットは煮沸消毒しないこと。
3. 器械本体、専用ACアダプタ、ネブライザキット、マウスピース、マスクを電子レンジ内で乾燥させたり、煮沸しないこと。
4. ネブライザキットをティッシュなどで拭かないこと。
5. ネブライザキットに薬液を入れたまま放置しないこと。
6. 使用前、使用後に点検をし、異常が認められたときは、製造販売業者に点検依頼をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed株式会社 ※

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085

取扱説明書を必ずご参照ください