

機械器具 68 医療用鉗子
一般医療機器 歯科矯正用プライヤー(33209000)

インビザライン プライヤー


*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造(外観写真)及び種類

② イレーサー (全長:152.0mm±5.1mm)



② ディテール (全長:152.0mm±5.1mm)、付属品としてディテールプライヤー用レンチが含まれる。

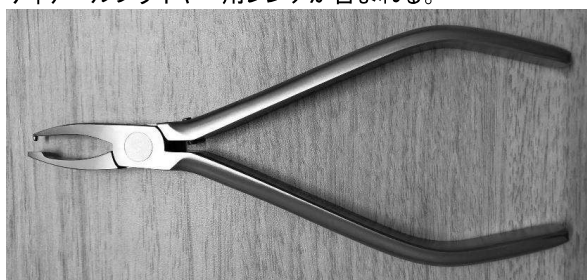

2. 原理

歯科矯正治療時、矯正装置を加工する際に使用する。

3. 原材料

構成品名	原材料
① イレーサー	ステンレス鋼
② ディテール	

【使用目的又は効果】

用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を把持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いる。

【使用方法等】

歯科矯正治療時、矯正装置を加工する際に使用する。使用する際は、必ず滅菌処理を行ってから使用すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品は、ニッケルとクロムが含まれています。ごく少数ですが、これらの金属に対して、アレルギー反応を起こす人がいます。アレルギー反応が生じた場合は、患者に医師の診断を受けるように指示すること。

2. 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上に力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管すること。
2. 錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用後は、防錆洗浄剤、精製水を用いて超音波洗浄し、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
2. 洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジを使用し、磨き粉、金属ウール、金属ブラシは器具の表面を損傷させるので使用しないこと。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等、金属を腐食するような消毒剤は使用しないこと。
4. 超酸化水等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
5. オートクレーブ滅菌器などの乾燥温度に注意すること。高温乾燥は、器具が変質変色することがある。
6. 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
7. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。
8. ディテールプライヤー用レンチは、防錆の目的でオイルが塗布されているが、使用後も同様の処置を要する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

インビザライン・ジャパン株式会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号
JR 東急目黒ビル
TEL:0120-944-187
FAX:03-4266-7380

外国製造業者

Align Technology, Inc.(国名:米国)