

2023年 8月 (第1版)

届出番号：13B2X10479302027

機械器具13 聴診器

一般医療機器 一般的名称：機械式聴診器 JMDN コード：13755000

聴診器 ME092


【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
 - ・本品を分解・改造しないで下さい。
 - ・すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
 - ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。
- 〈適用対象(患者)〉材質に過敏症がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

本品はチェストピース、チューブ（導管）、耳管部、イヤープースの4つの部分からできています。

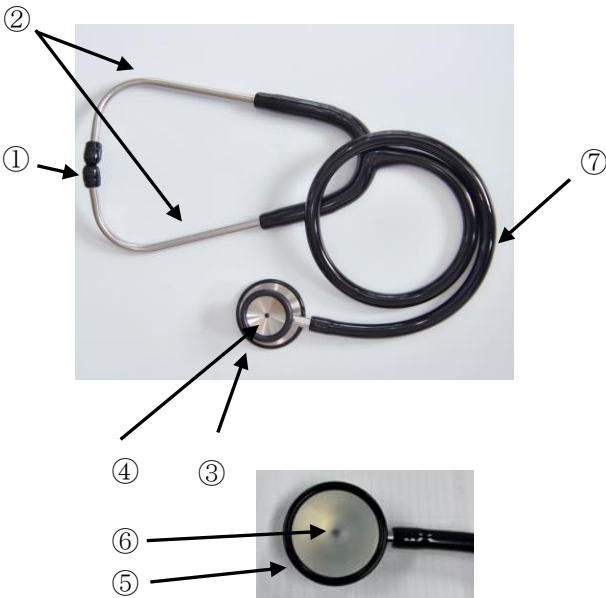

- ① イヤーチップ（ポリ塩化ビニール）
- ② 耳管部：（ステンレススチール）
- ③ ベルリング（ポリ塩化ビニール）
- ④ チェストピース（ステンレススチール）
- ⑤ ダイアフラムリング（ポリ塩化ビニール）
- ⑥ ダイアフラム（ポリ塩化ビニール）
- ⑦ Yチューブ（ポリ塩化ビニール）

サイズ：83.5X8X2.2cm
168g

【使用目的又は効果】

本製品は、人体各部の生体音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。

【使用方法等】

1. イアーチューブの前後の向きを確認し、正しい方向になるように、イアーチップを耳に挿入する。
2. チェストピースとチューブとを接続している金属部を回転させて、聴診する面にあわせて適切な方向に調節し、聴きたい部位の皮膚にチェストピースを当てる。
3. パイノーラルの調整（左右の調整）
左右の耳管を持ち、上下に動かして合わせてください。
4. スプリングの調整
耳管の締め付けが弱い場合は、センターコアの部分を手で絞る。
耳管の締め付けが強い場合は、耳管を両手で広げる。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 本品を分解・改造しないで下さい。
- (3) すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
- (4) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (5) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行って下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

涼しく換気の良い倉庫で保管し、腐食性のある品物と一緒に置かないこと。過圧がなく、地面から 200mm 以上の高さに置くこと。

〈耐用期間〉

標準的な使用期間:2 年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- (1) 耳金具、Yチューブ、イヤーチップは消毒用エタノールまたは中性洗剤で清拭して下さい。
- (2) 液体に浸したり、スチーム消毒をしないで下さい。また、直接高温、溶剤、低温、オイル等と接触させないで下さい。
- (3) 耳金具は極端な張力を調整することにより、スプリングの張力を緩める恐れがあるのでご注意下さい。
- (4) 部品は本製品用純正部品のみご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町 1 1 1
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)