

*ノーズリフレ鼻用洗浄器 ME119（案）

【禁忌・禁止】

以下の患者に使用しないこと。
・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるので使用しないこと。
・鼻づまりがひどい時や耳に疾患のある際は、医師と相談の上、使用すること。
・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。
・洗浄後に鼻をかむ必要があるため、鼻をかむことのできない方や小さなお子様は使用を控えてください。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)

本品の構成品と付属品は下記の通り。

内容	名称	数量
構成品	鼻用洗浄器	1セット
付属品	ノズル大小	2個
付属品	液晶温度シール	1枚
付属品	鼻洗浄剤	40包
付属品	カバー	1個

各部の名称と材質は下記の通り。

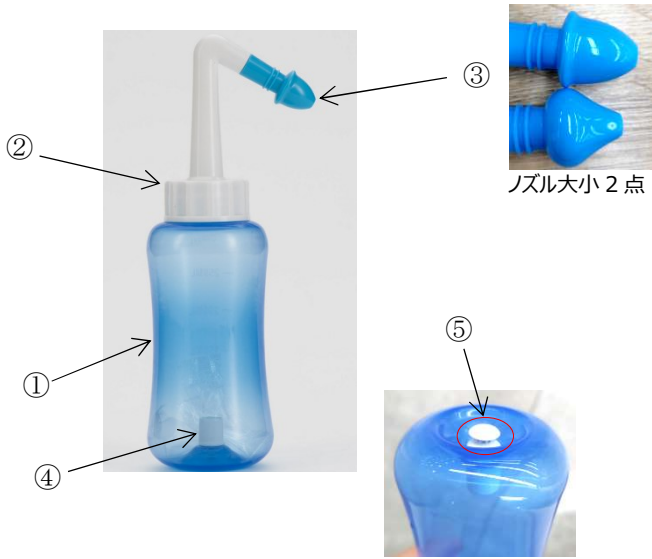

No.	名称	材質
①	ボトル	PP
②	キャップ	PPT
③	ノズル	ABS
④	キャップ	ABS
⑤	底部ボタン	ABS

寸法：65mm×65mm×225mm

【原理】

ボトルに300mlの洗浄液を入れ、ボトル底部の中心にあるボタンを押して、ノズル先端の穴より水流が出る。鼻腔内の埃、雑菌等の除去の為の鼻用洗浄器である。

付属品：鼻洗浄剤

成分：塩化ナトリウム

使用方法：洗浄液の濃度を調節するために300mlの水に1包を入れて使用する。



【使用目的又は効果】

洗浄液を鼻腔に噴出によって、鼻腔内の埃等を除去し、鼻腔内の衛生を維持の目的とする。

*【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ①使用前に、本体及び内部を十分に洗浄し、製品を清潔に保つ。
- ②ボトルキャップを左に回し、ノズルを取り外す。
- ③ボトルに温水を 300mL の目盛りまで注ぐ。
- ④液晶温度シールが「OK」を示し、水温が 35℃～40℃の範囲内であることを確認してから、「ノーズリフレ鼻洗浄剤」1 包を加える。
(液晶温度シールは消耗品のため、長時間ご使用いただくと故障する可能性が高くなる。快適にご使用いただくためにも、故障が見られた際はお手数ですが新しい液晶温度シールへの交換をお願いいたします。)
- ⑤適切なノズルを取り付け、キャップをしっかり締める。(使用中の漏水を防ぐため、必ず最後まで回し切る)。内容物が完全に溶解するまで、優しくボトルを振る。

2. 使用

- ①身体を前傾させます、ボトルを逆さに持ち、ノズル先端を鼻孔外側に軽く当て、洗浄する側の鼻孔をもう一方より高く上げ、洗浄液が下側の鼻腔からスムーズに流れ出るようにする。
- ②リラックスして、口を少し開け、「アー」と発声しながら、ボトル底部のボタンを指で押して、洗浄液を流す。

残留液の排出方法

- ①体を前に倒し、頭を下げ、左右にゆっくりと振って、鼻腔内の水分を自然に排出する。
- ②片方の鼻をやさしく押さえながら、もう一方の鼻からゆっくりと息を吹き出し、鼻腔内に残った洗浄液を排出する。

3. 使用後

- ①使用後は、ノズルをよく洗い、ボトル全体もよく洗う。
- ②内部の水分を完全に取り除くために、ノズルを装着したまま、ボトルの底にあるボタンを何度か空押しした後で、自然乾燥させる。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

- ①子供は保護者の指示のもとで使用するこ
- ②交差感染を防止する為に、他の人と共用しないこと。
- ③本体全体のつけ置き場消毒や煮沸消毒しないこと。
- ④本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ⑤鼻づまりや耳に疾患がある時は本製品を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光や高温高湿の場所を避けて保管する。
使用を再開する時は、本体をよく水洗いしてから使用すること。

〈耐用期間〉

本体の有効期間:3 年〔自己認証（当社データ）による〕
保証期間：1 年

【保守・点検に係る事項】

- ①使用後は、ノズルをよく洗い、ボトル全体もよく洗う。
- ②内部の水分を完全に取り除くために、ノズルを装着したまま、ボトルの底にあるボタンを何度か空押しした後で、自然乾燥させる。

※詳しく使用方法及び保守方法等は取扱説明書を確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町 1 1 1
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。