

器55 医療用洗浄器
一般医療機器 一般的名称：手動式生体用洗浄器 JMDN コード：34630000

*ノーズリフレPro鼻用洗浄器 ME120（案）

【禁忌・禁止】


- 以下の患者に使用しないこと。
- ・内耳と耳膜手術後の場合は使用しないこと。
 - ・5歳以下の子供は使用しないこと。
 - ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるので使用しないこと。
 - ・両側の鼻腔が完全に詰まる時、使用しないこと。
 - ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。
 - ・鼻の炎症がひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用すること。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉(原材料)
本品の構成品と付属品は下記の通り。

内容	名称	数量
構成品	鼻用洗浄器	1台
付属品	液晶温度シール	1枚
付属品	鼻洗浄剤	40包

各部の名称と材質は下記の通り。

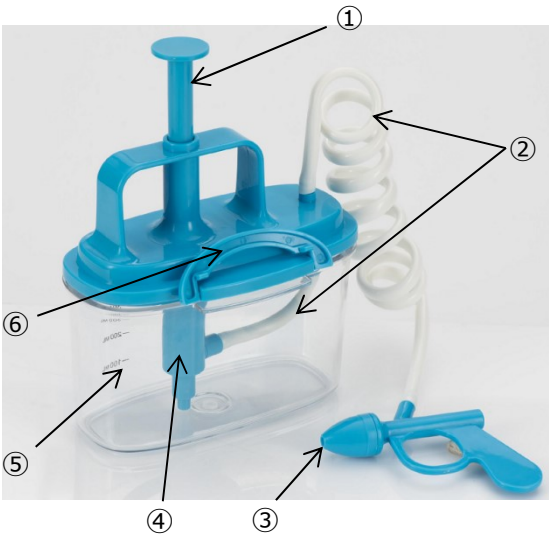

No.	名称	材質
①	ピストン（シャフト）	ABS
②	ホース	TPU
③	ノズル	ABS
④	パイプ	ABS
⑤	ボトル	PC
⑥	フタ止め	ABS

寸法：135mm＊60mm＊185mm

原理：ボトルに300mlの洗浄液を入れて本体のピストンを押すことによりノズル先端の穴から水流が出る。ノズルの出水モードは必要に応じて選択できる。
①ヘッドを短く縮めてロックするとミスト状である、②ヘッドを引き伸ばすと水流状である。ピストンを押す力により水压の調整が可能。

付属品：鼻洗浄剤
成分：塩化ナトリウム
使用方法：洗浄液の濃度を調節するために300mlの水に1包を入れて使用する。



【使用目的又は効果】

洗浄液を鼻腔に噴出によって、鼻腔内の埃等を除去し、鼻腔内の衛生を維持の目的とする。

*【使用方法等】

1. 初回使用前の準備
(初めて使用する際は,本体を流水でよく洗い、ポンプ内部にも水を通してください。)
①蓋の両側にある留め具を上を持ち上げてポンプをボトルから取り外し、給湯器(湯沸かし器)などで、約 40℃のお湯をボトルの 300ml ラインまで注ぐ。
②液晶温度シールが[OK]を示し,水温が 35℃～40℃の範囲内であることを確認する。
③付属の鼻洗浄剤を 1 包入れ、上下にしっかりとかきまぜる。
④ポンプをボトルに戻して、留め具でしっかり固定する。
⑤ミスト（初期時）広範囲をより優しく洗える。ストレート（切替時）太い水流で鼻の奥をしっかりと洗える。
2. 洗浄
①ノズルを鼻にあて、上半身を前に倒し、下向きの姿勢になる。
②「ア-」と発声しながらピストンを下まで押して洗浄する。
③左右の鼻を 5 プッシュずつ交互に洗浄液が無くなるまでくり返す。
3. 洗浄後
①洗浄後は鼻を片方ずつやさしくかんで、鼻に残った洗浄液を出す。
②体を前に倒し、頭を下げ、左右にゆっくりと振って、鼻腔内の水分を自然に排出する。
③片方の鼻をやさしく押さえながら、もう一方の鼻からゆっくりと息を吹き出し、鼻腔内に残った洗浄液を排出する。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

- ①子供は保護者の指示のもとで使用するこ
- ②交差感染を防止する為に、他の人と共用しないこ
- ③本体全体のつけ置き場消毒や煮沸消毒しないこ
- ④本品を使用中に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けるこ
- ⑤鼻づまりや耳に疾患がある時は本製品を使用しないこ

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本体をよく乾燥させ、直射日光や高温多湿を避けて保管する。
TPU ホース内に水分が残る可能性がありますので、ピストンポンプを繰り返し押し、残った水分を排出する。

〈耐用期間〉

本体の有効期間:3 年〔自己認証（当社データ）による〕
保証期間：1 年

【保守・点検に係る事項】

- ①毎回使用後、必ず全ての付属品を水で洗浄する。
- ②ボトルに 1/3 くらい水を入れ、ピストンを押して内部の洗浄液を洗い出し、水分が取り除けるまで空押す。
- ③ポンプとボトルに分けて自然乾燥させる。

※詳しく使用方法及び保守方法等は取扱説明書を確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社
東京都新宿区矢来町 1 1 1
TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD.
(中華人民共和国：China)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。