

機械器具 5I 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000


プレメントシリンジ リング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

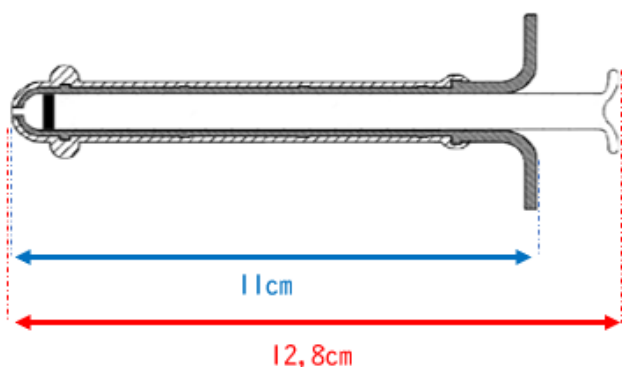

長さ：128mm±0,5mm

各部の名称および成分

名称	成分
カテーテル	・ エラストマー（表面） ・ ポリエチレン（内部）
プランジャー	ポリプロピレン
O リング	エラストマー

【使用目的、効能又は効果】

- 本品は膈内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
- 本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

- 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
 - ・ 本品
 - ・ プレメント採精シート mini
 - ・ プレメント採精シート mini 固定具
- 本品を開封後、プレメント採精シート mini に採取した精液をカテーテル先端の開口部からシリンジのプランジャーを引いてゆっくり吸引して下さい。
- 本品を膈内に挿入して下さい。
- 精液をゆっくりと注入して下さい。
- 精液の注入後、本品をゆっくりと抜去して下さい。

【使用上の注意】

- 開封は使用直前に行うこと。
- 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用に際して不安がある方は、ご使用前に専門医に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

1. 貯蔵・保管方法

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 本／袋 1 個（個別包装）

【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社 オンリースタイル
〒165-0031 東京都中野区上鷺宮 3-16-9 オーエスビル
TEL03-4455-7426 FAX 03-4586-6331
MAIL:customer-info@onlystyle.jp