

器30 結紮器及び縫合器

管理医療機器

臍帯閉鎖術用クリップ 32192000

## JMS 臍帯クリップ


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造等】

湾曲部を介してレ字形に屈折している。柄部の内側には結紮後、臍帯が移動することを防止するため、刻目のある噛合部が設けられている。柄部の先端には一方は嵌合嘴、他方には嵌合受入部があり緊着できる構造である。

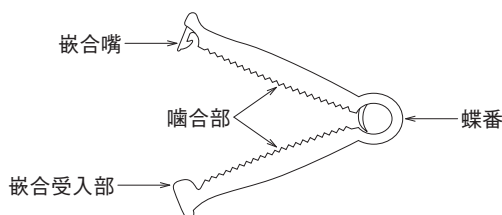

### 【性能、使用目的】

胎児分娩時における臍帯の結紮に使用するクリップで、そのまま直ちに使用できかつ1回限りの使用で使い捨てるものである。

### \*【使用方法等】

- 1.包装から本品を取出します。\*
- 2.腹部から6mm離れたところでへその緒を臍帯クリップで締めます。
- 3.へその緒は臍帯クリップから胎盤側に約6mm離れたところで切り離します。\*
- 4.臍帯が確実に結紮されていることを確認し、結紮・切断の約30分～1時間後には臍帯から出血のないことを確認してください。\*
- 5.約24時間後に、へその緒が十分乾燥したことを確認し、臍帯クリップの蝶番部分を切って臍帯クリップを取外します。

### 使用方法に関連する使用上の注意

- 結紮部をよく確認して使用すること。[一度本品を締めると、嵌合嘴と嵌合受入部が外れなくなる。]\*
- 本品の使用で、結紮部が開放した場合は、新しい製品と交換すること。\*

### 【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
  - 包装を開封したらすぐに使用すること。
  - 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2.その他の注意
  - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
  - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 2.使用期限
  - 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

### \*【包装】

50個入／箱  
(箱の入数表示を参照)\*

### \*【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元\*  
株式会社ジェイ・エム・エス  
広島市中区加古町12番17号  
郵便番号：730-8652  
電話番号：082-243-5806