

機械器具30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 臍帯閉鎖術用クリップ 32192000

JMS 臍帯クリップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

湾曲部を介してレ字形に屈折している。柄部の内側には結紮後、臍帯が移動することを防止するため、刻目のある啖合部が設けられている。柄部の先端には一方は嵌合嘴、他方には嵌合受入部があり緊着できる構造である。

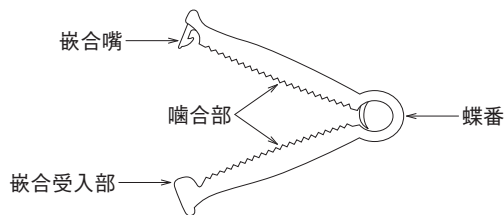

**【使用目的、効能又は効果】

胎児分娩時における臍帯の結紮に使用するクリップで、そのまま直ちに使用でき、かつ1回限りの使用で使い捨てるものである。

**【品目仕様等】

1.折れ試験

湾曲部を固定し柄部の先端部に3kgの荷重を垂直に加えたとき柄部が折れない。*

2.機能試験

嵌合嘴部と嵌合受入部とを接合し緊着し、嵌合受入部を固定して嵌合嘴部に外す方向に3kgの荷重を加えるとき、緊着が外れない。*

**【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取出します。*
- 2.腹部から約2cm離れたところでへその緒を本品で締めます。*
- 3.へその緒は本品から胎盤側に約1cm離れたところで切り離します。*
- 4.臍帯が確実に結紮されていることを確認し、結紮・切断の約30分～1時間後には臍帯から出血のないことを確認してください。*
- 5.約24時間後に、へその緒が十分乾燥したことを確認し、本品の蝶番部分を切って本品を取外します。

使用方法に関連する使用上の注意

- 結紮部をよく確認して使用すること。[一度本品を締めると、嵌合嘴と嵌合受入部が外れなくなる。]*
- 本品の使用で、結紮部が開放した場合は、新しい製品に交換すること。*

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

2.その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]**

*【包装】

50個入/箱

(箱の入数表示を参照)*

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元*

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806