

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器

単回使用一般静脈用翼針 70378000

JMSスカルプベインセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

●再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

メスコネクタ、チューブ、翼、針基、針管、キャップからなる。

<構成>

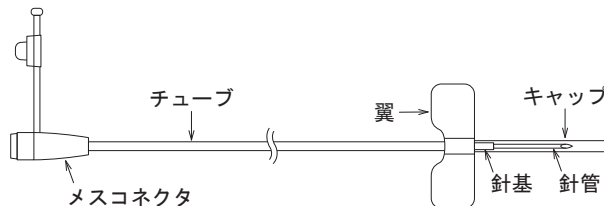

・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

【使用目的、効能又は効果】

注射筒及び輸液セット等を用いて多量の静脈注射用医薬品を注入すること。

【品目仕様等】

1. 漏れ

150kPaのゲージ圧で水を送り込み15分間保持したとき、水漏れがない。

2. 気密性

20～30℃の水中で、150kPaの内圧を15分間保持したとき、空気漏れがない。

3. 引張り試験

各接続部が15Nで15秒間保持したとき、緩まない。

【操作方法又は使用方法等】

1. プライミング及び穿刺

- (1) 包装から本品を取出します。
- (2) 本品のメスコネクタを輸液セット等と確実に接続します。
- (3) 薬液を針管の先端まで満たします。
- (4) 翼を折りたたんで、しっかり摘み、キャップをまっすぐ引いて外します。
- (5) 針管を血管に穿刺してチューブ内に血液が流入するのを確認します。
- (6) 針管が動かないように注意して翼を広げた後、テープ等で確実に固定します。

使用方法に関連する使用上の注意

- 本品と他の医療機器を接続する際は、過度な締め付けをしないこと。
[接続を外す際に本品の破損等が生じる可能性がある。]
- メスコネクタのテープ部分に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる可能性がある。]
- 使用中は、本品が患者の下敷きにならないように注意し、定期的に確認すること。[メスコネクタ部からの外れ又は破損等により、血液又は薬液の漏れ、エアの混入等が生じる可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する可能性があるため、注意すること。
- 包装を開封したらただちに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 開封時は接続部の外れや緩みがないことを確認してから使用すること。
- 使用中は、接続部の緩み、液漏れ又は破損等に注意し、定期的に確認すること。
- 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[チューブ接続部等の破損、外れが生じる可能性がある。]
- 鉗子等でチューブをクランプする場合、チューブを傷つけないように注意すること。[チューブの破損、液漏れが生じる可能性がある。]
- チューブの接続部を曲げたり、チューブを過度に引っ張ったり、押し込むような負荷がかからないようにすること。[接続部の外れ及び液漏れ、チューブの破損等が生じる可能性がある。]
- リキャップする必要がある場合は、誤穿刺を防止するため、保護具等を使用するか、キャップを手で持たずに台等に置いて、キャップをまっすぐに被せること。[傾けると、針管がキャップを突き抜ける可能性がある。]

2. その他の注意

- 本品の針管には直接手を触れないこと。
- 誤穿刺に注意すること。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

50本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806