

医療用品 04 整形用品
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 JMDN 38609000
デンタータス チタニウム スクリューポスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品はねじ部（ねじが切ってある箇所）と頭部から成り、頭部には十字の溝（スリワリ）があり、下記の 26 タイプがある。表面全体につや消し処理（サンドブラस्टリング）が施されている。


タイプ	直径 mm 長さ mm	1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80					
		1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
RST-S (ショート)	7.8						
RST-M (メディウム)	9.3						
RST-L (ロング)	11.8						
RST-EL (エクストラ ロング)	14.2						
RST-SL (スーパー ロング)	17.0						
	番 号	1	2	3	4	5	6

【付属品】

装着工具：本品を根管に挿入する際に使用する。



ホローキー NLH タイプ

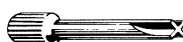

クロスキー NLK タイプ

【材質】

成分	含有率
チタン	99.990%
鉄	0.005%
炭素	0.005%

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物等の維持又は補強

【使用方法等】

【使用方法】

1. 本品を軽く流水で洗浄した後、超音波洗浄機で 5-10 分間洗浄する。
2. 高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌する。
3. 通法により破損歯牙の抜髄処理を行い、破損部分を成形する。
4. 本品を根管内に挿入しやすくするため、リーマまたはファイルを用いて根管を拡大する。

- **5. パット上で本品のスクリュー部にセメントを絡ませた後、歯科用ピンセットで根管内へ運び入れ、回転させながら挿入する。
- **6. クロスキーを用いて頭部のクロス溝を押し広げることによりアンダーカット部とし、コア材の保持を確実にする。
7. 修復材を用いて、歯冠部を修復する。これにより、修復部分は本品により保持される。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品を使用する前に、高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌すること。
2. 本品を挿入する時、強い力でねじ込まないこと。
- **3. 装着工具（ホローキー、クロスキー）は本品を根管内へ運ぶためのものではない。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 本品を用いる場合の根管形成には、同社製のリーマを使用すること。
2. 口腔内への落下防止のため、治療中はラバーダムを使用すること。
- **3. 本品を口腔外から運び入れる際は、必ず歯科用ピンセットで本品を把持して根管内へ運び入れること。

【重要な基本的注意】

本品の使用により過敏症が現われた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【不具合・有害事象】

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	Dentatus AB（デンタータス）
国名	スウェーデン