

機械器具 74 医薬品注入器
*管理医療機器 インスリンポンプ用輸液セット 35838000

ニプロSPセット



再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

○再使用禁止

【 形状・構造及び原理等 】

本品は、主に微量注入ポンプに装着されたシリンジ内の薬剤を、直接または各種カテーテルを介して体内に輸送する目的で使用される機器である。

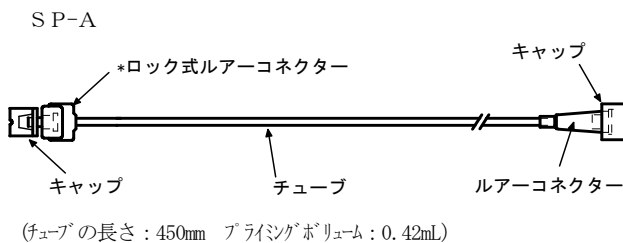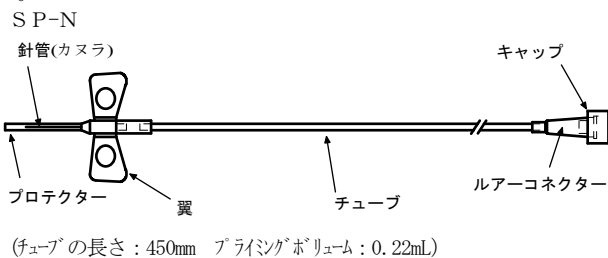


本品は連結管部分にポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております。

【 使用目的、効能又は効果 】

本品は滅菌済みであるから、そのまま直ちに使用できる。

【 操作方法又は使用方法等 】

- (1) 包装を開封し、本品を包装内から取り出します。
- (2) ルアーコネクターのツバとニプロC Iセットのツバの向きが同じになるように、確実に接続してください。

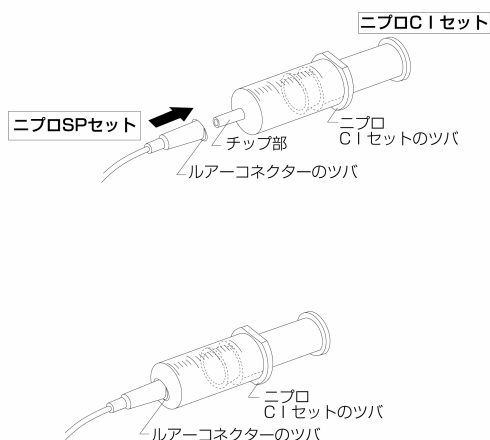


- (3) 薬液をプライミングして下さい。


*[注意] 薬液をプライミングするには必ず針先から薬液が出るか確認して下さい。
また、薬液モレについても必ず確認して下さい。

《モレ確認のしかた》

- ①下図のように、ニプロSPセットの先端部の柔らかいチューブの部分を指で完全に閉塞します。

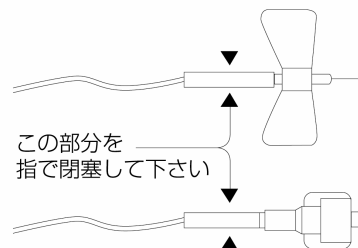

- ②次にプランジャーを押し、各接続部から液がモレないことを確認して下さい。

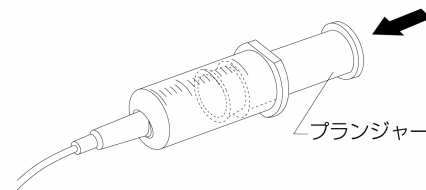

*[注意] ルアーコネクターとニプロC Iセットの接続部からモレを確認した場合は、C Iセットのチップ部に付着した薬液など取り除いてから再度確実に接続し、モレのないことを確認してください。それでも尚モレが生じた場合、また他の部分からモレを確認した場合は、新しいニプロSPセットと交換して下さい。

【 使用上の注意 】

1. 重要な基本的注意

- 使用前には必ずニプロシリンジポンプの取扱説明書を参照すること。
- *○使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について定期的に確認すること。
- *○脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクターのひび割れについて注意すること。(薬液により延長チューブ等のメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。)
- *○ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 必ず医師の指導に従い使用すること。
- 本品はニプロシリンジポンプ専用のセットであるため、他のポンプには使用しないこと。
- 使用は1回限りとし、使用後は直ちに廃棄すること。また使用後は感染防止に留意し廃棄すること。
- SP-Nを使用の際には、プロテクターをかぶせる時、誤刺に注意し慎重に行うこと。

- 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1) 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管のこと。
- (2) 使用の期限
内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(当社データ)による。]

【包装】

50本/箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社
