

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 透析用留置針 JMDN コード:70204030

ハッピーキャス クランプキャス (カテーテルガイド)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>（代表図）

本品は外套針に挿入して操作することにより、外套針を血管内の適正な位置へ導く等の補助を行うものである。

- ・ラバーアダプター付

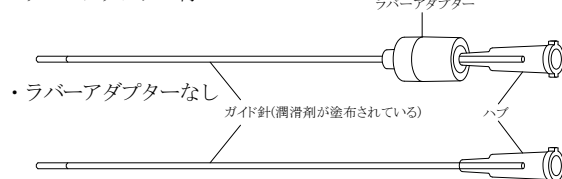

- ・ラバーアダプターなし

<材質>

ガイド針：ステンレス鋼
潤滑剤：シリコーン油

<製品仕様>

ガイド針外径
18G (1.25mm)
19G (1.05mm)


【使用目的又は効果】

人工腎臓透析を含む血液浄化療法を行うための非金属製の血管留置針である。

【使用方法等】

<ラバーアダプター付の場合>

1. 包装を開封する。
2. 留置針の外套針にガイド針をゆっくりと挿入する。
【注意】 留置針の内針は外套針から抜去しておくこと。
【注意】 ガイド針の挿入が困難な場合は本品を無理に使用せず、新しい留置針に交換すること。
3. 留置針のコネクターにラバーアダプターを接続する。
4. ハブを持って操作を行い、外套針を血管内の適正な位置へと導く。
【注意】 操作が困難な場合は本品を無理に使用せず、新しい留置針に交換すること。
5. ガイド針先端をラバーアダプター手前まで引き上げて、外套針への逆血を確認する。
【注意】 ガイド針が無空針のためガイド針による逆血はないので、外套針への逆血を確認すること。

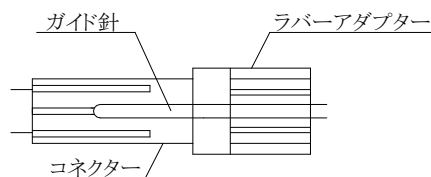

6. ラバーアダプターを取り外し、外套針から本品を抜去する。
【注意】 ラバーアダプターを取り外す際は、コネクターを保持しながら取り外すこと。コネクター以外を保持すると取り外せない場合がある。

<ラバーアダプターなしの場合>

1. 包装を開封する。
2. 留置針の外套針にガイド針をゆっくりと挿入する。
【注意】 留置針の内針は外套針から抜去しておくこと。
【注意】 ガイド針の挿入が困難な場合は本品を無理に使用せず、新しい留置針に交換すること。
3. ハブを持って操作を行い、外套針を血管内の適正な位置へと導く。
【注意】 操作が困難な場合は本品を無理に使用せず、新しい留置針に交換すること。
4. ガイド針先端をコネクターまで引き上げて、外套針への逆血を確認する。
【注意】 ガイド針が無空針のためガイド針による逆血はないので、外套針への逆血を確認すること。
5. 外套針から本品を抜去する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用が困難な場合は、新しい血液透析用留置針に交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

包装の使用期限を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東郷メディキット株式会社
住所：〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6
電話番号：0982-53-8000

販売業者：メディキット株式会社
住所：〒113-0034 東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号
電話番号：03-3839-0201

