

機械器具 74 医薬品注入器  
\*管理医療機器 単回使用注射用針 30889000  
**ニプロディスポーザブル注射針**


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は針管、針基及びプロテクターから構成されている。

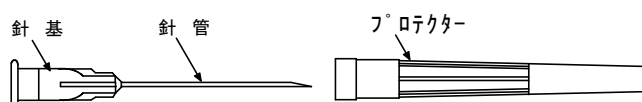

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

**【操作方法又は使用方法等】**

1. 包装を開封し、本品を取り出してください。
2. 本品をシリンジと確実に接続してください。
3. プロテクターを真っ直ぐ取り外し、穿刺してください。  
〈注意〉本品からプロテクターを取り外す際は、プロテクターが針先に触れないよう注意すること。針先が変形する可能性がある。  
〈注意〉本品の針管部には直接手を触れないように注意すること。

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

- 包装が破損している場合、または製品に破損等の異常がある場合は使用しないこと。
- 使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

1. 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用の期限  
包装の使用期限を参照のこと（自己認証による）。

**【包装】**

50～300本／箱

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号  
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社