

機械器具 74 医薬品注入器
*管理医療機器 単回使用注射用針 30889000

ニプロディスポーザブル注射針


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は針管、針基及びプロテクタから構成されている。

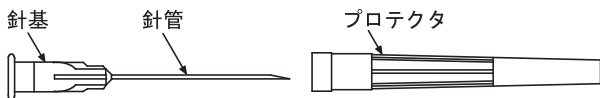

【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

**【品目仕様等】

○弾性

針管の外径が1.0mm以下のものにあつては、針管を12度曲げて1分間保った後放して目視したとき、針管は、もとの位置に復する。

○曲げ強さ

針管の長さが12mm以上のものにあつては、針管を5mmの曲率半径で90度曲げたとき、折れない。

○引抜強さ

針基から針管を引き抜く方向に、3kg（針管の外径が0.6mm未満のものにあつては、2kg）の荷重を加えたとき、引き抜けない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出してください。
2. 本品をシリンジと確実に接続してください。
3. プロテクタを真っ直ぐ取り外し、穿刺してください。

〔注意〕本品からプロテクタを取り外す際は、プロテクタが針先に触れないよう注意してください。〔針先が変形するおそれがあります。〕

〔注意〕本品の針管部には直接手を触れないように注意してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後は、感染防止に留意し、直ちに安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

包装の使用期限を参照のこと（自己認証による）。

**【包装】

40～300本／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社