

メディキットガイドワイヤー

再使用禁止

【警告】


- ガイドワイヤーの血管内での操作は、X線透視下で先端の動きや位置を確認しながら慎重に行うこと。[血管内でのガイドワイヤー先端の動きを確認せずに操作した場合、血管壁への突き当たり等による血管損傷を引き起こしたり、目的部位以外の血管に迷入したりする恐れがある]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 樹脂製ガイドワイヤーは、金属製セルジンガー針に使用しないこと。[樹脂製ガイドワイヤーの切断、或いは表面の樹脂部分の剥離が生じる恐れがある]

※※【形状、構造及び原理等】

<代表図>

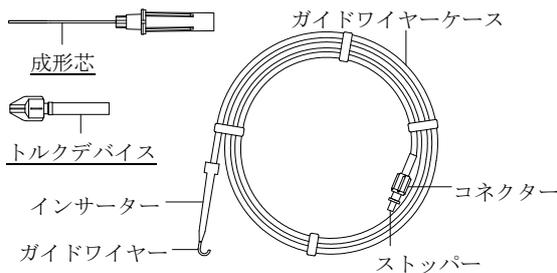

本品は、使用方法により以下の構成品の組み合わせで構成されている。

構成品	個数
ガイドワイヤー	1個
ガイドワイヤーケース	1個
トルクデバイス	0～1個
成形芯	0～1個

- ガイドワイヤー
血管を確保したセルジンガー針(外套管)又はカテーテルイントロドューサーに挿入し、カテーテル等を血管内に導入することができる誘導ワイヤーである。金属製と樹脂製のものがある。

<材質>

金属製: ステンレス鋼
樹脂製: ポリウレタン

- インサーター
ガイドワイヤーをセルジンガー針(外套管)又はカテーテルイントロドューサー内に挿入するときに使用する。
- ガイドワイヤーケース
ガイドワイヤーを固定するストッパーと、ガイドワイヤーをフラッシュするためのコネクタを備えた保護ケースである。
- トルクデバイス
ガイドワイヤーの手元端に取り付け、回転方向の操作などを行い易くするものである。
- 成形芯
ガイドワイヤーの先端を目的血管に応じた形状に成形するために使用する。

※※【使用目的、効能又は効果】

血管を損傷させることなくカテーテルを血管内に導入することができる誘導ワイヤーである。

※※【品目仕様等】

接合部強度

- ヘッド部-フラットワイヤー 9.8N以上

※※【操作方法又は使用方法等】

- コネクタにストッパーが装着されている場合、ストッパーを外す。
- ケースのコネクタに生理食塩液等を入れたシリンジを接続して、ケース内をフラッシュし、ガイドワイヤーの表面を十分に濡れた状態にする(図1参照)。

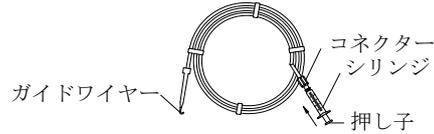


図1

- ガイドワイヤーをケースから慎重に取り出す。

【注意】

- ガイドワイヤーを取り出す際は、インサーターの先端でガイドワイヤーに損傷を与えないよう慎重に行うこと。

- 必要に応じガイドワイヤー先端を目的の形状に成形する。

【注意】

- ガイドワイヤーは過度に曲げると復元しないので、形状を付ける場合は慎重に行うこと。

- ガイドワイヤーを、インサーターを使用して外套管又はカテーテルイントロドューサーに通し、ゆっくりと血管内に挿入する。外套管を通してガイドワイヤーを血管内に挿入した場合は、外套管を抜去する。

【注意】

- ガイドワイヤー操作時に抵抗を感じた場合には無理に挿入せずに、X線透視下で先端の位置を確認すること。血管損傷の恐れがある。

【注意】

- 橈骨動脈アプローチ(TRA)により樹脂製ガイドワイヤー(特にアングル形状)を進める際、極めてまれに上腕動脈の側枝にほとんど抵抗無く迷入することがある。アングル形状の樹脂製ガイドワイヤーの場合、側枝への迷入を確認する方法として上腕動脈に上げる時にガイドワイヤーを回転させる手法がある。このとき上腕動脈本幹では樹脂製ガイドワイヤーの先端が回転するのが見られるが、細い側枝に入っていくと真っ直ぐのままである。この場合は慎重に樹脂製ガイドワイヤーを引き抜くこと。樹脂製ガイドワイヤーを抜去する際に抵抗を感じた場合は、無理に引き抜かず適切に処置すること。無理に引き抜いた場合、血管損傷、樹脂製ガイドワイヤーの損傷や切断の恐れがある。

- カテーテル先端をガイドワイヤー尾端に被せて進め、血管に挿入する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ガイドワイヤーを切断して使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 包装が水濡れ、開封、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 包装の開封は、使用直前に行うこと。開封したらすぐに使用し、使用後は安全な方法で処分すること。
- 本品は、手技に精通した術者が使用すること。
- 全ての操作は、無菌的に行うこと。
- 血管造影カテーテル等、併用するデバイスに適合するサイズを使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【有効期間・使用の期限】

包装の使用期限を参照(自己認証による)

※※【包装】

1～10セット/箱

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 東郷メディキット株式会社
住所: 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6
電話番号: 0982-53-8000

製造業者: 東郷メディキット株式会社

住所: 〒113-0034 東京都文京区湯島 1丁目 13番 2号

販売業者: メディキット株式会社

住所: 〒113-0034 東京都文京区湯島 1丁目 13番 2号

電話番号: 03-3839-0201

