

機械器具74 医薬品注入器
*高度管理医療機器 止血剤注入キット 70397000

ベリプラスト調製器セット (微量滴下セット)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品はベリプラスト専用ですので、他用途への転用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は同一容量(1mL)のシリンジ(2本)とジョイントチューブ(2個)、及び薬液を投与するために使用するフレキシブルニードル(2本)よりなるセット品である。

微量滴下セットの形状・構造

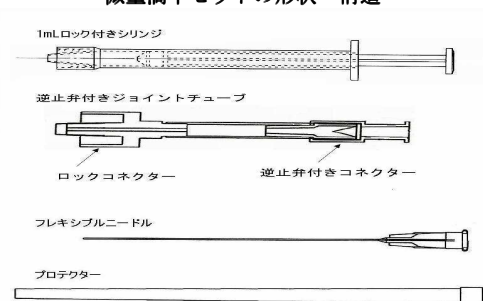

【使用目的、効能又は効果】

本品は主に2種類の薬液を混合しつつ注入する為の医薬品注入器である。
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。


【操作方法又は使用方法等】

1




薬液が既に充填されている1mLロック付きシリンジを、ジョイントチューブの逆止弁付きコネクター側へ接続し、更に、ジョイントチューブのロックコネクター側へフレキシブルニードルを接続して下さい。

2

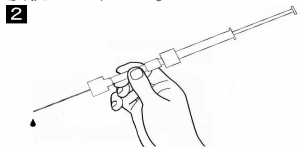


1mLロック付きシリンジの押し子を摺動させ、薬液をジョイントチューブも含みフレキシブルニードル先端まで滴量にして下さい。
その後、ジョイントチューブをポンピングすることにより、フレキシブルニードル先端から薬液を微量に滴下出来ます。


3

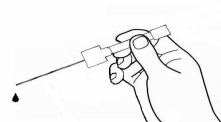

4

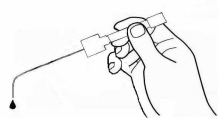

5

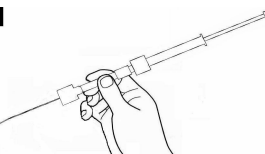

薬液を様々な方法で微量に滴下出来ます。

- ①シリンジを取り外し、薬液を微量に滴下する方法(図3・4)
- ②シリンジを装着したままの薬液を微量に滴下する方法(図5)

※フレキシブルニードルは折り曲げて使用することも出来ます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1包 1セット入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331(代表)

製造：ニプロ医工株式会社

お問い合わせ先：

ニプロ株式会社(東京営業部)
東京都文京区本郷4丁目3番4号
電話番号：03-5684-5611



ニプロ株式会社