

再使用禁止


ウェッジ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造
下記の通り
クリアタイプ

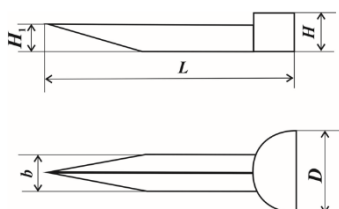

	L	D	b	H ₁	H
薄型	14.6	4	1.4	1.5	2.4
中型	15.7	4	1.75	1.7	2.9

(単位：mm)

木製タイプ

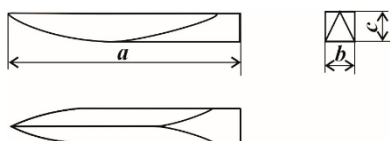

カラー	サイズ (a×b×c)
ホワイト	14×1.7×1.5
イエロー	15.6×1.7×2.0
ブルー	13.5×1.5×2.0
ピンク	16.2×1.5×2.0

(単位：mm)

エラストックタイプ



カラー	タイプ
ブルー	ハード
イエロー	ソフト

アドオンタイプ



(※デルタリング(別売)を使用して歯間に挿入することを推奨)

2. 原材料

- ・ウェッジクリアタイプ：ポリカーボネート
- ・木製タイプ：木、着色材
- ・エラストックタイプ：シリコンラバー、着色材
- ・アドオンタイプ：シリコンラバー、着色材

3. 包装

- ・ウェッジクリアタイプ：薄型×50個、中型×30個 合計80個 / ケース
- ・木製タイプ：各種100個 / ケース
アソートタイプ：4種×50個 合計200個 / ケース
- ・エラストックタイプ：各種10個 / 包
2種入り：2種×20個 合計40個 / ケース
- ・アドオンタイプ：40個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 適切な種類のウェッジを処置する歯の歯頸部の歯間に差し込む。
- 2) 処置が終わったあとは、速やかにウェッジを抜き取る。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・歯間に差し込めない場合は、種類を変えるか使用を中止すること。
- ・無理な力を加えないこと。

*【使用上の注意】

器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：TOR VM Ltd
(ティーオーアール ヴィエム社)
製造国：ロシア