

再使用禁止

ポリマトリックス

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。


*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



① アドヒーシブ

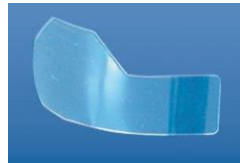

② トランスペアレントカーブ



③ プレフォーム



④ プレフォームクランプ付

- ① アドヒーシブタイプ：小臼歯用・大臼歯用 2 種
- ② トランスペアレントカーブタイプ：ナロー・ワイド 2 種
- ③ プレフォームタイプ：小臼歯用・大臼歯用 2 種
- ④ プレフォームクランプ付タイプ：小臼歯用・大臼歯用 2 種

2. 原材料

- ① アドヒーシブタイプ：プラスチック
- ② トランスペアレントカーブタイプ：プラスチック
- ③ プレフォームタイプ：プラスチック
- ④ プレフォームクランプ付タイプ：プラスチック＋アルミニウム

3. 包装

- ① アドヒーシブタイプ：各 12 個 / ケース
- ② トランスペアレントカーブタイプ：各 30 個 / ケース
- ③ プレフォームタイプ：各 30 個 / ケース
- ④ プレフォームクランプ付タイプ：各 10 個 / ケース

【使用目的又は効果】


本品は修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

①-1 アドヒーシブタイプ

歯間に本品をセットして、赤の粘着テープをはがし、粘着部分同士を貼りあわせる。

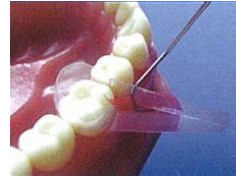

①-2 トランスペアレントカーブタイプ



歯間に本品をセットする。

①-3 プレフォームタイプ

歯間に本品をセットする。

①-4 プレフォームクランプ付タイプ

歯間に本品をセットしたのち、メタル部分をプレスする。

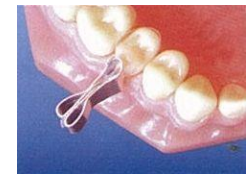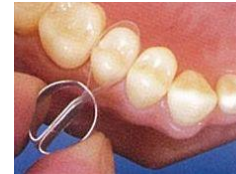

② 必要があれば、歯間離開の為にウェッジ等を使用する。

③ 充填終了後、ハサミなどでカットして取り外す。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 誤飲には十分注意すること。
- 2) 歯牙ないし、歯列の形態により、装着できない場合は無理に使用しないこと。

*【使用上の注意】

使用前に、劣化、破損、変形がないかどうかを確認すること。

*【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に劣化、破損、傷、腐食などがなければどうか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1 - 9 - 1

電話番号：076-278-8800

製造業者：TOR VM Ltd

（ティーオーアール ヴィエム社）

製造国：ロシア