

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 JMDN コード：35700000


CSAフェイスボー

【禁忌・禁止】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 2) 落下させたり強い衝撃を与えないこと。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1. 形状・構造
下記外観写真の通り

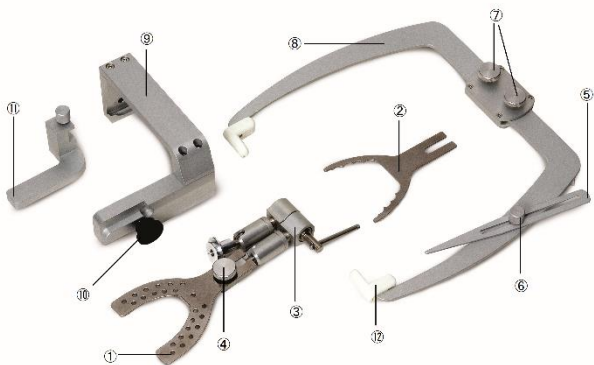

	名称
①	バイトフォーク・プレーン
②	バイトフォーク
③	ユニバーサル・ジョイント
④	バイトフォーク・スクリュー
⑤	眼窩下点インジケータ
⑥	眼窩下点インジケータ・スクリュー
⑦	アーム・スクリュー
⑧	アーム
⑨	トランスファー・ジグ
⑩	トランスファー・スクリュー
⑪	トランスファー・アダプター
⑫	イアピース

2. 原材料

- ①～⑪：アルミニウム
- ⑫：ポリ塩化ビニル

【使用目的又は効果】

本品は、顎の開口運動軸に対する上顎弓の相対位置を記録する他、口腔模型を顎の開口運動軸と同じ関係に合わせるために用いる。

*【使用方法等】

- 1) モデリングコンパウンドもしくはパラフィンワックス（別売）をバイトフォーク（①もしくは②）に巻き付け、患者に軽く噛ませる。
- 2) アーム（⑧）を患者の外耳道に合わせ、水平にし、アーム・スクリュー（⑦）を締める。
- 3) バイトフォークがきちんとかまれているか、チェックした後、ユニバーサルジョイント（③）部のレバーを固定する。
- 4) アーム・スクリューをゆるめ、アームを開き、耳と口から外し、咬合器にトランスファーする。

【使用上の注意】

- 1) 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
- 2) 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりすることがあるのでしないこと。
- 3) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際は磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- 4) バイトフォークはオートクレーブ可【オートクレーブ温度（乾燥温度も含む）134℃以下厳守】。イアピースはオートクレーブ不可。（アルコールを含ませた脱脂綿等で清掃のこと）

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：CORIDENT（コリデント社）
製造国：大韓民国