

添付文書

**2020 年 10 月改訂（第 4 版）

*2017 年 4 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000584

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000

再使用禁止

サージカルエジェクター

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



タイプ	先端径
S	φ2.5mm
M	φ3.8mm
L	φ5.8mm


※φ11mm タイプの接続口に適合

〔チップ付〕



チップ径（先端 / チューブ側）
φ2.5mm / φ5.25mm

〔付属アダプター〕（先端脱着式のみ）

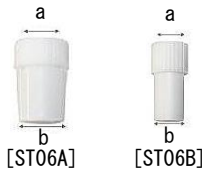

	ST06A	ST06B
a	φ10.5mm	φ6.5mm
b	15.7mm	10.8mm

※φ11mm/6.5mm タイプの接続口に適合

2. 原材料
ポリプロピレン、ABS 樹脂

3. 包装
25 本 / 袋
〔チップ付〕
アスピレーター（先端チップ含む）25 本、
アダプターφ11、φ6.5 各 1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の単回使用の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が消毒済みかどうか確認すること。（オートクレーブ不可）
- 2) 非能動型吸引装置（別売）のチューブ先に装着し、吸引を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
 - ・薬剤の種類によっては、樹脂成分に影響を及ぼすことがある。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
- 3) 誤飲のおそれがあるので使用前に先端チップの装着に緩みがないか確認すること。
- 4) 使用中に抜けないように、吸引装置にしっかりと差し込むこと。
- 5) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は十分に注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800